



BEDIENUNGSANLEITUNG

Toronto Rollator Kohlenstofffaser (faltbar)



Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und Wartung zu gewährleisten.

Einleitung

Der Kohlenstofffaser-Faltrollierer Toronto verfügt über einen Sitz, einen Rückenlehnen und einen Beutel sowie ein robustes, faltbares Gehgestell mit verstellbarer Griffhöhe. Mit vier robusten, weichen Rädern erhält er mehr Stabilität, und das leichte Gehgestell sorgt für einfache Transportierung und gute Manövrierbarkeit. Der Rollierer dient ausschließlich als Gehhilfe für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Er soll Menschen mit Gleichgewichtsproblemen oder anderen Gehbeschränkungen unterstützen und ihnen beim Gehen Stabilität und Sicherheit bieten.

Zweckbestimmung

Der Brooklyn ist ein Rollator, der dem Nutzer beim Gehen Halt und Stabilität sowie eine Sitzgelegenheit für den Innen- und Außenbereich bietet.

Indikationen

Erwachsene mit Einschränkungen der Gehfähigkeit.

Kontraindikationen

Das Produkt ist nicht für Personen mit geringer Kraft in den Armen, mit sehr schlechtem Gleichgewicht oder mit erheblichen kognitiven Einschränkungen geeignet.

Vorgesehene Verwendung:

Der Rollator ist:

- für den privaten Gebrauch bestimmt.
- ausschließlich für den Außenbereich konzipiert..
- nicht geeignet für Sand, Kies, sehr unebenes Gelände oder sehr steile Gelände.
- ein medizinisches Produkt und entspricht der EU-Richtlinie 2017/7/45 über medizinische Geräte. Es handelt sich nicht um ein Spielzeug.

ausschließlich für Personen mit einem Gewicht von bis zu 136 kg (300 lb). Verwenden Sie den Rollator ausschließlich gemäß den Anweisungen. Jede andere Nutzung ist unangemessen und kann zu materiellen Schäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler haftet nicht für Schäden, die durch fehlerhafte oder unangemessene Nutzung entstehen.

Bitte beachten Sie:



Die Installation dieser Ausrüstung muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.

Gewichtsbeschränkung: 136 kg (300 lb). Überschreiten Sie diese Grenze nicht.

hier. Dies könnte den Nutzer gefährden.

Bestandteil:

1 x faltbarer Kohlenstofffaser rollator mit 4 weichen Rädern

1 x Rückenlehne mit 2 x Schrauben

1 x Tasche

Technische Daten


Empfohlene Körpergröße des Benutzers:	150 cm bis 180 cm ± 5 cm
Abstand zwischen den Griffen:	47 cm $\pm 0,5$ cm
Verstellbare Griffhöhe:	86–96 cm ± 1 cm
Nettogewicht mit Zubehör:	5 kg
Nettogewicht ohne Zubehör:	4,5 kg
Tragfähigkeit Korb/Tasche:	5 kg
Material:	Kohlenstofffaser
Wenderadius:	86 cm ± 1 cm
Spezifikation	Daten (Einheit)
Radgröße	8" vorne, 8" hinten
Maximale Tragfähigkeit	136 kg
Nettogewicht	4,5 kg
Entfaltet abmessungen	
Gesamtbreite	62 ± 1 cm
Gesamtlänge	68,5 ± 1 cm
Gesamthöhe	86 - 96 ± 1 cm
Sitzhöhe	54 $\pm 0,5$ cm
Sitzbreite	46 $\pm 0,2$ cm
Sitztiefe	22.5 $\pm 0,2$ cm
Erste gefaltete abmessungen	
Faltbreite	21 ± 1 cm
Faltlänge	68,5 ± 1 cm
Falthöhe	86 - 96 ± 1 cm

Conditions de stockage et de fonctionnement

Punkt	Bedingung
Maximales Benutzergewicht	136 kg
Betriebstemperatur	-5°C ~ +40°C (Empfohlen)
Lagertemperatur	-10°C ~ +50°C
Lagerluftfeuchtigkeit	≤80% RH (Relative Luftfeuchtigkeit)
Empfohlene Untergründe	Innenböden, Außenböden, Asphalt, Beton und andere ebene Flächen.
Eingeschränkt zugelassen	Vorsicht bei der Nutzung des Rollators auf nassen, rutschigen oder vereisten Oberflächen (z.B. Eis und Schnee). Die Nutzung auf solchen Oberflächen wird nicht empfohlen.
Ungeeignete Untergründe	NICHT auf Kies, Sand oder ähnlichen instabilen und unebenen Flächen verwenden. NICHT auf steilen Steigungen verwenden. NIEMALS auf Treppen, Rolltreppen oder Fahrsteigen verwenden.

VOR DER EINSETZUNG




1. Entfernen Sie alle Verpackungen sorgfältig. Verwenden Sie keine Messer oder andere scharfe Instrumente, da dies das Produkt oder dessen Oberfläche beschädigen kann.
2. Prüfen Sie das Produkt auf sichtbare Beschädigungen. Zeigen sich Beschädigungen oder besteht Verdacht auf einen Fehler, verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Lieferanten, um Unterstützung zu erhalten.
3. Falls alle Teile in Ordnung sind, entsorgen Sie die Verpackung gemäß den geltenden lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.

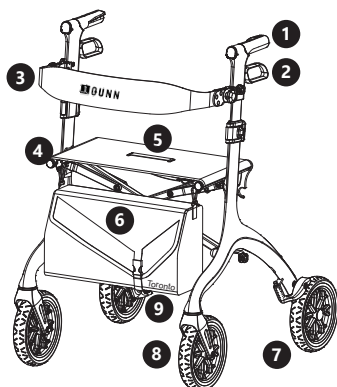**Hauptkomponenten des faltbaren Rollstuhls**



1. Handgriff
2. Brems
3. Rückenlehne
4. Sitz
5. Griff zum Falten des Rollstuhls
6. Beutel
7. Hinterwelle
8. Vorderrad mit Drehfunktion
9. Ankipphilfe

Montage des Rollators

1. Nehmen Sie den Rollator und stellen Sie ihn aufrecht mit den Rädern am Boden.
2. Greifen Sie die Griffe und drücken Sie diese seitlich, um den Rollstuhl auf die vollen Seitenbreite auszulegen (Abb. 1).
3. Drücken Sie auf beiden Seiten des Sitzrahmens, bis ein „Klicken“ zu hören ist und der Mechanismus verriegelt ist (Abb. 2). Legen Sie Ihre Handfläche oder Finger nicht zwischen den Rahmen und die Rohre auf beiden Seiten des Sattels, um Quetschverletzungen zu vermeiden.

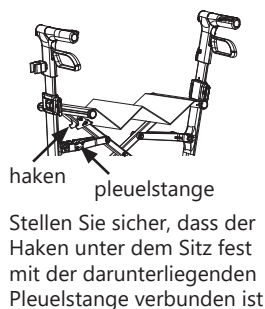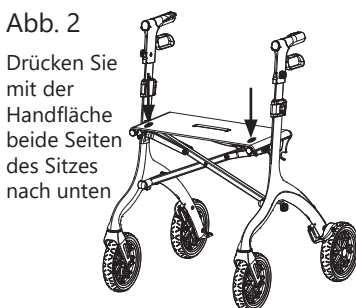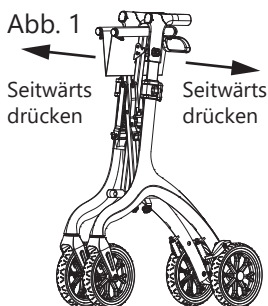

4. Stellen Sie die Griffhöhe entsprechend der Körpergröße des Nutzers ein (siehe Punkt „HANDLE HEIGHT ADJUSTMENT“).
5. Montage des Rückgrats (Abb. 3): Stecken Sie die Nuten am Ende des Rückgrats von oben nach unten in die Vorsprünge an der Vorderseite der Lenkstange (3-1). Befestigen Sie die Schrauben am Ende des Rückgrats (3-2). Die Rückenlehne verfügt über eine Funktion zur kleinen Winkeleinstellung. Wenn Sie die Rückenlehne entfernen möchten, drücken Sie die Tasten an beiden Seiten der Rückenlehne, ziehen Sie die Rückenlehnenklemme nach oben, und dann können Sie die Rückenlehne abnehmen.

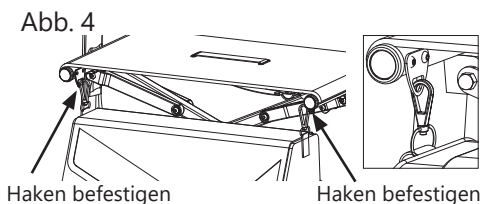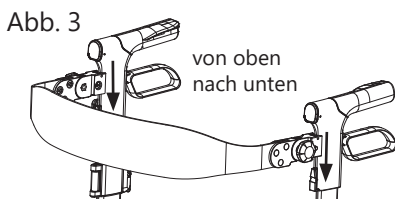

6. Falls gewünscht, befestigen Sie den Beutel am Rollstuhl. Der Beutel ist über einen Haken am Rahmen des Sitzes befestigt (Abb. 4). Die Zugkordel auf der Rückseite der Einkaufstasche kann in der Mitte des Querrohrs eingehängt werden, um das Schwanken zu reduzieren.



Warnung

Bevor der faltmechanismus vollständig eingefaltet ist, darf weder gelaufen noch gesessen werden. Dieser Rollstuhl verfügt über einen einzigartigen, patentierten, einfachen faltmechanismus, der bedeutet, dass der gesamte Rollstuhl sofort und problemlos vollständig faltbar wird, sobald die Ziehtaste in der Mitte des Sitzes angehoben wird. Beim Gebrauch stellen Sie sicher, dass der Sitz fest und sicher eingedrückt ist und der Mechanismus ordnungsgemäß eingeschlossen ist.


Regeln Sie die Griffhöhe

Stehen Sie aufrecht und halten Sie sich an der Seite des Rollators. Lassen Sie Ihre Arme locker hängen. Greifen Sie nun die Griffstangen des Rollators. Sind die Arme leicht gebogen, ist die Griffhöhe korrekt eingestellt. Ist dies nicht der Fall, passen Sie die Griffhöhe gemäß der Beschreibung im nächsten Absatz an.

Anpassung der Handhöhe

Die Griffhöhe lässt sich sehr einfach an die Körpergröße der jeweiligen Nutzer angepasst werden.

Abb. 5

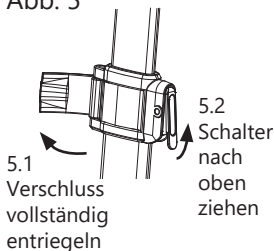

1. Verschluss vollständig entriegeln, den Schalter am Handgriff nach oben ziehen (Abb. 5) und den Handgriff nach oben oder unten ziehen.
2. Lassen Sie den Schalter los, während sich der Griff bewegt. Dadurch rastet er automatisch in der nächstmöglichen Höhe ein.
3. Wiederholen Sie diesen Vorgang (Schritt 1 und 2), bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Stellen Sie sicher, dass der Schalter richtig einrastet. Verriegeln Sie dann den Verschluss.

4. Wiederholen Sie den Vorgang für die zweite Handgriffe.

HINWEIS: Die Griffhalterungen sind auf die richtige Höhe eingestellt, wenn sie sich am Handgelenk befinden und die Arme locker hängen.

Faltung des Rollators

1. Entfernen Sie den Beutel vor der Faltung!
2. Zur Faltung ziehen Sie den Sitz über die schwarze Handgriffe am Sitzplatte nach oben.
3. Der gesamte Rollator lässt sich nun schnell und einfach falten.



Gefahr einer Verletzung!

Halten Sie die Hände bei der Anfaltung des Rollers von den Seitenstützen fern.

Mit einem Rollator

Allgemeine Informationen zur Verwendung des Rollators

Beim Gebrauch des Rollators ist es wichtig, die folgenden Informationen zu beachten. Die Anweisungen, die Sicherheitshinweise sowie die vorgesehene Verwendung müssen strikt befolgt werden, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten!



Gefahr einer Verletzung!

- Überprüfen Sie den Zustand des Rollators regelmäßig. Verwenden Sie ihn nicht, wenn Sie äußere Beschädigungen feststellen.
- Stellen Sie vor der Verwendung des Rollators stets sicher, dass alle Schrauben fest sind.
- Bevor Sie den Rollator verwenden, sollten Sie stets überprüfen, ob die Bremsen ordnungsgemäß funktionieren.
- Der Rollator ist eine Gehhilfe. Verwenden Sie ihn ausschließlich zur sicheren Fortbewegung. Verwenden Sie ihn niemals als Rollstuhl oder ähnliches Gerät.
- Regen, Feuchtigkeit und Schmutz können die Bremsleistung des Rollators negativ beeinflussen.
- Vermeiden Sie ungeeignete Oberflächen und Pfade. Fahren Sie den Rollator nicht über Kies, Sand oder andere unebene Flächen.
- Auf schrägen Wegen kann die Drehgeschwindigkeit des Rollators höher sein als Ihre Gehgeschwindigkeit. Es besteht das Risiko, zu stürzen! Bremsen Sie ausreichend und gehen Sie vorsichtig.

Mit dem Rollator korrekt laufen



Gefahr einer Verletzung!

- Beim Gehen sollte der Rollator stets eng am Körper gehalten werden, um eine gute Stütze zu bieten und ein sicheres Gehen zu ermöglichen. Ist der Rollator zu weit entfernt, kann er leicht wegrollen. Genauso gilt, wenn man zu sehr gebogen geht – es besteht Gefahr zu stürzen!
- Beim Gehen stützen Sie sich auf den Rollator, um Ihre Stabilität zu gewährleisten.
- Gehen Sie stets aufrecht und halten Sie die Augen direkt vor sich.
- Verwenden Sie den Rollator nur, wenn die Griffhöhe auf Ihre Körpergröße korrekt eingestellt ist (siehe CORRECT HANDLE HEIGHT).

Mit den Bremsen

Bremmen beim Gehen:

Um Ihre Gehgeschwindigkeit zu verringern, ziehen Sie beide Handbremshebel zum Griff hin. Drücken Sie stärker, um eine stärkere Bremswirkung zu erzielen. Um die Bremswirkung zu verringern, entspannen Sie die Handbremse vorsichtig.


Bremsen einstellen:

Drücken Sie beide Handbremshebel, bis sie klicken und in der Niederlage bleiben. Die Bremse ist nun verriegelt.

So stellen Sie die Bremsen ein:

Der Rollator ist mit von Hersteller voreingestellten Bremsen ausgestattet, eine weitere Justierung ist nicht erforderlich. Bitte justieren Sie die Bremsen nicht selbst, es sei denn, Sie befinden sich in besonderen Umständen. Bei Störungen der Bremsen empfiehlt es sich, Ihren örtlichen Händler oder einen qualifizierten Wartungstechniker zu kontaktieren. Der Bremsjustiermechanismus befindet sich an der in Abbildung 6 angegebenen Position.

Abb. 6

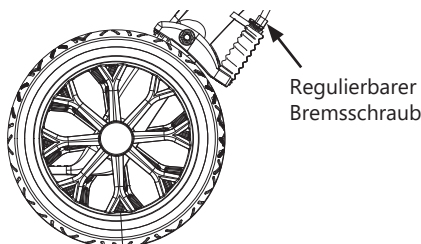

Gefahr einer Verletzung!

Beim Anhalten, Parken und besonders wenn Sie sich auf dem Rollstuhl setzen möchten, sollten Sie stets beide Bremsen einstellen. Überprüfen Sie, ob sie noch aktiviert sind, bevor Sie sich vom Rollstuhl aufstehen, um sich sicher zu bewegen.

Die Parkbremse lockern:

Ziehen Sie die Handbremshebel nach oben, bis sie losgelassen sind und im Neutralstand stehen. Die Bremsen sind nun gelöst.

HINWEIS: Die Bremsen des Rollators sind von der Herstellerseite voreingestellt und müssen nicht angepasst werden. Falls Sie feststellen, dass sie nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler für technische Unterstützung.

Hindernisse überwinden



Gefahr einer Verletzung!

- Halten Sie den Rollator fest, wenn Sie Hindernisse überwinden.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie entlang der Gehwegspuren gehen!
- Nutzen Sie die Ankipphilfe.
- Verwenden Sie den Rollstuhl nicht auf Treppen!
- Neigen Sie den Rollstuhl nicht mehr als 5 Grad seitlich – sonst droht ein Sturz!

Den Sitz richtig verwenden



Gefahr einer Verletzung!

- Nur wenn beide Parkbremse aktiviert sind und der Rollator auf einer ebenen Oberfläche steht, darf er verwendet werden!
- Warten Sie darauf, dass Sie nicht von einem anderen Personen getrieben werden, und drücken Sie niemals andere Personen, die ebenfalls auf dem Rollator sitzen. Gefahr eines Sturzes!
- Vermeiden Sie das Sitzen auf dem Rollator, wenn die Oberfläche sehr glatt und rutschig ist. Der Rollator kann sich auch mit aktivierter Parkbremse rutschen lassen.
- Nur eine Person darf gleichzeitig auf dem Rollator sitzen. Achten Sie auf die maximale Tragfähigkeit des Rollators!
- Setzen Sie sich stets in die Mitte des Sitzes und stellen Sie sicher, dass beide Füße den Boden berühren!

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Reinigen Sie den Rollator mit einem weichen, feuchten Reinigungstuch und gegebenenfalls mit einer leichten, milden Reinigungsmittellösung. Trocknen Sie ihn anschließend gründlich ab. Lassen Sie den Rollator nach der Reinigung eine Weile trocknen, damit auch schwer zugängliche Bereiche vollständig austrocknen.

Besonders die Räder, die Griffe und die Bremsvorrichtungen müssen vollständig trocken sein, bevor Sie den Rollator erneut verwenden.

Bei der Desinfektion befolgen Sie die Anwendungshinweise des verwendeten Desinfektionsmittels und desinfizieren Sie alle zugänglichen Flächen. Nutzen Sie als Desinfektionsmittel ausschließlich haushaltsübliches Desinfektionsmittel und trocknen Sie das Produkt anschließend an der Luft.



Gefahr von Schäden!

Verwenden Sie niemals organische Lösungsmittel und / oder abrasives Reinigungsmittel.

Wartung von Kostenvorkehrungen

Prüfen Sie vor jeder Nutzung die Funktionsfähigkeit des Rollators. Insbesondere sollten Sie folgende Punkte überprüfen:

- Die Bremsen sind vollständig funktionsfähig, und die Bremskabel weisen keine Verformungen oder Risse auf.
- Die Räder sind vollständig funktionsfähig. Alle Räder drehen sich problemlos, und die Vorderräder können sich leicht drehen. Die Reifen weisen keine deutlichen Anzeichen von Verschleiß auf.
- Alle Schraubverbindungen sind fest.
- Der gesamte Rollator ist frei von Beschädigungen, Rissen und grober Verunreinigung.



Gefahr einer Verletzung!

Verwenden Sie den Rollator nicht, wenn seine Funktionalität nicht garantiert ist oder nur teilweise gewährleistet ist. Selbst geringfügige Beschädigungen oder Verschmutzungen – beispielsweise an den Bremsen – können zu Verletzungen oder Unfällen führen.

Wiederaufbereitung und Wiedereinsatz

Dieses Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet. Um das Produkt für einen neuen Benutzer wiederaufzubereiten, sind die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:

- Prüfung
- Reinigung und Desinfektion

Stellen Sie sicher, dass die Gebrauchsanweisung zusammen mit dem Produkt übergeben wird.

Speicherung



Gefahr einer Verletzung!

Wenn Sie den Rollstuhl nicht über einen längeren Zeitraum verwenden, sollten Sie ihn mit dem Parkbremshebel festhalten, um zu verhindern, dass er herunterrollt, und ihn nur an einem Ort parken, an dem niemand darauf fallen könnte.

- Wenn der Rollator nicht über einen längeren Zeitraum verwendet wird, reinigen Sie ihn vor dem Aufbewahren (siehe Reinigung).
- Lagern Sie den Rollator an einem trockenen und gut belüfteten Ort.
- Schützen Sie den Rollator vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung.
- Halten Sie den Rollator außer Reichweite von Kindern.



Gefahr von Schäden!

Lassen Sie den Rollstuhl niemals über einen längeren Zeitraum außen stehen und schützen Sie ihn vor schlechten Wetterbedingungen, da dies zu Beschädigungen führen kann.

Verkehr

Falten Sie den Rollator für den Transport (siehe FALTEN DER ROLLATOR). Stellen Sie sicher, dass der Rollator während des Transports ordnungsgemäß befestigt ist. Falls erforderlich, ergreifen Sie zusätzliche Maßnahmen zur Sicherung des Transports.

Beratung zu Sicherheitsmaßnahmen



Gefahr für Kinder sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (z. B. Menschen mit teilweisen Behinderungen, ältere Menschen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten) oder für Personen ohne entsprechende Erfahrung und Kenntnisse (z. B. Kinder).

- Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse dürfen das Rollstuhl nur unter Aufsicht verwenden oder haben die sichere Bedienung bereits erlernt und die damit verbundenen Gefahren verstanden.
- Halten Sie Kinder vom Rollstuhl fern. Kinder könnten sich beim Gebrauch des Rollstuhls umkippen und sich verletzen.



Gefahr einer Verletzung!

Eine unsachgemäße Handhabung des Rollators kann zu schweren Verletzungen führen. Es ist wichtig, die folgenden Informationen zu beachten:

- Verwenden Sie den Rollator nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Substanzen stehen, die Ihre geistige und körperliche Leistung beeinträchtigen (z. B. starke Medikamente oder Alkohol).
- Verwenden Sie den Rollator nicht auf Kies, Sand oder anderen unebenen und instabilen Oberflächen.
- Verwenden Sie den Rollator nicht auf steilen Hängen.
- Verwenden Sie den Rollstuhl niemals auf Treppen, Rolltreppen oder beweglichen Gehbahnen.

- Vorsicht beim Bedienen auf nassen, rutschigen oder eisigen Oberflächen (z. B. Eis und Schnee). Es ist am besten, den Rollstuhl auf solchen Flächen nicht zu verwenden.
- Verwenden Sie den Rollstuhl nicht im Dunkeln oder bei schlechter Sichtbarkeit.
- Vermeiden Sie es, den Rollstuhl über Manndachdecken, Gitter, Bodenplatten oder ähnliche Oberflächen zu fahren. Die Reifen können sich an den Unebenheiten verfangen.
- Nützen Sie den Rollstuhl ausschließlich auf der Gehwegfläche. Verwenden Sie die Straße nur zum Überqueren.
- Überschreiten Sie niemals die maximale Tragfähigkeit des Rollstuhls. Die maximale Nutzermasse beträgt 136 kg.
- Nutzen Sie den Rollstuhl niemals als Rollstuhl oder als Transportmittel für Personen. Das bedeutet: Schieben Sie den Rollstuhl nicht, wenn jemand darauf sitzt.
- Bewahren Sie keine Taschen am Rollstuhl, außer die im Lieferumfang enthaltene.
- Ändern Sie den Rollstuhl keinesfalls, insbesondere nicht die beweglichen Teile. Bei jeglicher Modifikation ist die sichere Nutzung nicht mehr gewährleistet. Sie könnten sich verletzen.
- Stellen Sie sicher, dass beide Parkbremse eingeschaltet sind, bevor Sie sich auf den Rollstuhl setzen oder ihn legen. Der Rollstuhl ist nur für eine kurze Zeit geeignet und dient keinesfalls als Stuhl für den dauerhaften Einsatz. Bevor Sie sich erneut auf den Rollstuhl setzen, stellen Sie sicher, dass beide Parkbremse weiterhin eingeschaltet sind. Erst dann dürfen Sie aufstehen.
- Stellen Sie sich niemals auf dem Rollator. Nutzen Sie ihn niemals als Kletterhilfe oder als Leiter!



Brandschutzrisiko!

Verwenden Sie den Rollator nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder an ähnlichen Wärmequellen. Achten Sie darauf, ihn nicht vor einen offenen Feuer zu stellen. Einzelne Teile des Rollators können sehr heiß werden.



Schadensgefahr!

Schützen Sie den Rollator vor ständiger Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen, da Teile des Geräts im Laufe der Zeit verblasen und beschädigt werden können.

Vorsicht

Verwenden Sie dieses Produkt nur nach Anweisung eines medizinischen Fachpersonals.

- Dieses Produkt ist auf ein Patientengewicht von 136 kg beschränkt.
- DMEone übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch eine unsachgemäße Installation dieses Produkts verursacht werden.
- Wenn Komponenten fehlen oder beschädigt sind, DAS SIE NIE ANWenden. Kontaktieren Sie Ihren Händler unverzüglich.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile und Komponenten vor der Nutzung festgezogen sind.
- Überprüfen Sie die Rollstuhlunterstützung wöchentlich auf ordnungsgemäßen Betrieb und Verschleiß. Sollte ein Bauteil nicht mehr funktionieren oder verschlissen sein, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Händler, um Ersatzteile zu erhalten.
- Sollte ein schwerwiegendes Ereignis mit dem Gerät auftreten, ist dies dem Hersteller sowie dem lokalen autorisierten Händler zu melden.

Garantie

Um die Sicherheit und Lebensdauer Ihres Rollstuhls zu verbessern, empfiehlt es sich, ihn regelmäßig zu warten. Ab dem Tag der Lieferung erhalten Sie eine umfassende 24-Monate-Garantie, die Reparaturen oder den Austausch des Rollstuhls während dieser Zeit versichert. Weitere Details finden Sie unter den Garantiebedingungen unten:

1. Jede Installation von Arbeiten oder Ersatzteilen muss von einem autorisierten Händler oder Service-Vertreter durchgeführt werden.
2. Für die Anwendung der Garantie, falls Ihr Rollstuhl oder Rollgurt Wartung benötigt, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie ihn gekauft haben.
3. Sollte ein Teil des Rollators aufgrund eines Herstellungs- oder Materialfehlers innerhalb der Garantiezeit repariert oder vollständig oder teilweise ausgetauscht werden müssen, werden die Teile kostenlos bereitgestellt. Hinweis: Die Garantie ist nicht übertragbar.
4. Reparierte oder ausgetauschte Teile sind für den verbleibenden Garantiezeitraum des Rollators weiterhin abgedeckt.
5. Ersatzteile, die nach Ablauf der ursprünglichen Garantie ersetzt werden, sind drei Monate lang unter der Garantie.

6. Verbrauchsgüter, die geliefert werden, fallen normalerweise nicht in die Standardgarantie, es sei denn, sie müssen ausdrücklich aufgrund eines Herstellungs- oder Materialfehlers repariert oder ausgetauscht werden. Dazu gehören unter anderem: Möbelbezüge und Reifen.
7. Die oben genannten Garantiebedingungen gelten für brandneue Rollstühle. Falls Ihr Rollstuhl nicht abgedeckt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
8. Unter normalen Umständen wird keine Haftung übernommen, wenn die Person, die einen Rollstuhl benötigt, aufgrund eines direkten Vorfalls Hilfe benötigt hat:
 - a. der Rollatorteil wurde nicht gemäß den Herstellerempfehlungen gewartet
 - b. Nichtverwendung der vom Hersteller vorgesehenen Teile.
 - c. der Rollierer-Teil des Gehhilfsgeräts ist aufgrund von Nachlässigkeit, Unfall oder unsachgemäßer Nutzung beschädigt
 - d. der Rolliererteil des Gehhilfsgeräts wurde von den Herstellervorgaben abgewichen oder es wurden Reparaturen vorgenommen, bevor der Händler informiert wurde.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Gewichte, Maße oder sonstige technische Angaben, die in diesem Handbuch angegeben sind, ohne Vorankündigung zu ändern. Alle in diesem Handbuch dargestellten Werte, Maße und Kapazitäten sind nur ungefähre Angaben und stellen keine technischen Spezifikationen dar.

	Hersteller	Zhongshan Qunn Medical Equipment Co., Ltd. Stand 3, Nr. 108, Zhaoyi Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong, China E-Mail: info@qunn.com
	Ermächtigte Vertreterin	Luxus Lebenswelt GmbH kochste1 47877 willich Germany Info@luxuslw.de





No.108 zhaoyi Road 528414
Zhongshan
www.qunn.com
info@qunn.com