



MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

DuBaStar 3016702 / 3016712 / 3016722 Duschhocker / Duschstühle

BEDEUTUNG DER VERWENDETEN KENNZEICHNUNGEN

Farblich hinterlegte Sicherheitshinweise sind zwingend zu befolgen!

- ➔ Dieses Symbol steht für Hinweise und Empfehlungen.
- [] Verweis auf eine Bildnummer.
- () Verweis auf ein Funktionselement innerhalb eines Bildes.

Verwendete Abkürzungen

Mit dem Ausdruck „DuBaStar Produkt“ sind alle in dieser Montage- / Gebrauchsanleitung beschriebenen Produkte gemeint.

EINLEITUNG

Lesen und beachten Sie vor der erstmaligen Inbetriebnahme dieses Dokument.

Kinder und Jugendliche sollten dieses Dokument vor dem erstmaligen Gebrauch ggf. zusammen mit den Eltern bzw. einer Aufsichts- oder Begleitperson lesen.

Ihr Fachhändler sollte Sie zusätzlich in die Benutzung Ihres DuBaStar Produktes einweisen.

Die vorliegende Montage- und Gebrauchsanleitung soll Ihnen helfen, sich mit der Handhabung Ihres DuBaStar Produktes vertraut zu machen sowie Unfälle zu vermeiden.

- ➔ Die abgebildeten Ausstattungsvarianten können von Ihrem Modell abweichen.

Benutzer mit Sehbehinderung finden die PDF-Dateien zusammen mit weiteren Informationen über unsere Produkte auf unserer Webseite unter:

< www.meyra.com >.

- ➔ Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Fachhändler.

Alternativ können sich Benutzer mit Sehbehinderung die Dokumentationen von einer Hilfsperson vorlesen lassen.

Informieren Sie sich regelmäßig über die Produktsicherheit und mögliche Rückrufaktionen unserer Produkte im < Infozentrum > auf unserer Webseite:
< www.meyra.com >.

Wir haben ein Produkt entwickelt, das die technischen und gesetzlichen Vorgaben für Medizinprodukte erfüllt. Für die Mitteilung eines dennoch nicht auszuschließenden schwerwiegenden Vorfalles nutzen Sie bitte unsere Emailadresse < info@meyra.de > und informieren die zuständige Behörde Ihres Mitgliedstaates.

MODELLAUZÄHLUNG

Diese Montage- / Gebrauchsanleitung ist für folgende Modelle gültig:

Modell 3016702 Duschhocker

Modell 3016712 Duschstuhl

Modell 3016722 Duschstuhl, faltbar

INDIKATIONEN / KONTRA-INDIKATIONEN

Bei allergischen Reaktionen, Hautrötungen und/oder Druckstellen bei der Verwendung des DuBaStar Produktes ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen.

Die DuBaStar Produkte dienen zur Verbesserung der selbstständigen Ausübung der Körperpflege für Personengruppen mit nicht zwingend krankheitsbedingten Mobilitätseinschränkungen (eingeschränkte Muskelkraft, starke Bewegungseinschränkungen, Gliedmaßenverluste, Gehunfähigkeit oder starke Einschränkung der Gehfähigkeit).

Die DuBaStar Produkte dürfen nicht eingesetzt werden bei:

- Unfähigkeit zum Sitzen.

- Starken Gleichgewichts- und/oder Wahrnehmungsstörungen.
- Kognitiven Einschränkungen und mentaler Retardierung, die ein selbstständiges Nutzen der Sitzhilfen ausschließen.
- Einfluss beeinträchtigender Medikamente (Rücksprache mit Arzt oder Apotheker).

Die DuBaStar Produkte dürfen nur mit Hilfsperson eingesetzt werden bei:

- Nicht ausreichender Sehfähigkeit.
- Unkontrollierbaren Gleichgewichts- und/oder Bewegungsstörungen.
- Fehlenden Fähigkeiten selbstständig aufzustehen.

➔ Zu diesen und weiteren möglichen Risiken mit diesem Produkt fragen Sie Ihren Arzt, Therapeuten oder Fachhändler.

EMPFANG

Alle Produkte werden bei uns im Werk auf Fehlerfreiheit geprüft und in Spezialkartons verpackt.

- ➔ Wir möchten Sie dennoch bitten, das Fahrzeug sofort nach Erhalt – am besten im Beisein des Überbringers – auf eventuelle während des Transportes aufgetretene Schäden zu überprüfen.
- ➔ Die Verpackung des DuBaStar Produktes sollte für einen eventuell später notwendigen Transport aufbewahrt werden.

ZWECKBESTIMMUNG

Die DuBaStar Produkte dienen als Sitzhilfen zur Erleichterung der Körperpflege im Bad- und Duschbereich und unterscheiden sich nur geringfügig in der Ausstattung wie z.B. Armlehnen oder Rückenvarianten.

VERWENDUNG

Bei allergischen Reaktionen, Hautrötungen und/oder Druckstellen bei der Verwendung des Produkts ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen.

Die DuBaStar Produkte dienen Personen mit eingeschränkter Mobilität zur Erleichterung des Duschvorganges auf festen, ebenen und rutschhemmenden Böden.

KOMBINATION MIT HERSTELLERFREMDEN PRODUKTEN

Jede Kombination Ihrer DuBaStar Produktes mit nicht von uns gelieferten Komponenten stellt generell eine Veränderung Ihrer DuBaStar Produkte dar. Erkundigen Sie sich bei uns, ob es eine gültige Kombinationsfreigabe von uns gibt.

WIEDEREINSATZ

Ihre DuBaStar Produkte sind für einen Wiedereinsatz geeignet. Vor jedem Wiedereinsatz sind die DuBaStar Produkte einer kompletten Inspektion zu unterziehen.

- ➔ Die für den Wiedereinsatz erforderlichen hygienischen Maßnahmen sind nach einem validierten Hygieneplan durchzuführen und müssen eine Desinfektion einschließen.

In Abhängigkeit des Wartungsergebnisses ist ein mehrfacher Wiedereinsatz möglich.

LEBENSDAUER

Wir gehen bei ihrem DuBaStar Produkt von einer zu erwartenden durchschnittlichen Produktlebensdauer von 4 Jahren aus, soweit das DuBaStar Produkt innerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs eingesetzt wird und sämtliche Wartungs- und Servicevorgaben eingehalten werden.

Die Lebensdauer ihres DuBaStar Produktes ist sowohl von der Benutzungshäufigkeit, der Einsatzumgebung und der Pflege abhängig.

Durch den Einsatz von Ersatzteilen lässt sich die Lebensdauer des DuBaStar Produktes verlängern. Ersatzteile sind im Regelfall bis zu 5 Jahre nach Fertigungsauslauf erhältlich.

➔ Die angegebene Lebensdauer stellt keine zusätzliche Garantie dar.

LIEFERUMFANG

Duschhocker / Duschstühle:

- (1) 1x Sitzplatte
- (2) 1x Seitenrahmen rechts
- (3) 1x Seitenrahmen links
- (4) 1x Sitzrohr vorn
- (5) 1x Sitzrohr hinten
- (6) 4x Verschraubung
- 1x Montage- und Gebrauchsanleitung

Duschstühle:

- (7) 1x Rückenlehne (Option)
- 2x Kunststoffstopfen

MONTAGEANLEITUNG

Die Durchführung der folgenden Montage ist von einem qualifizierten Fachmann durchzuführen.

Während der gesamten Montage auf Klemmstellen achten. – Quetschgefahr!

Den Arbeitsbereich während der Montage sauber halten!

Duschhocker / Duschstühle

1. Die Sitzrohre (4 auf Seite 14)+(5 auf Seite 14) auf die Zapfen der Seitenrahmen (2 auf Seite 14)+(3 auf Seite 14) stecken und verschrauben.
 2. Die Sitzplatte (1 auf Seite 14) fest auf die Sitzrohre aufdrücken [B auf Seite 14].
 3. Die Sitzhöhe einstellen.
- ➔ Zur Sitzhöhereinstellung das Kapitel Sitzhöhe einstellen auf Seite 5 beachten.

Duschstuhl

1. Die Rückenlehne (7 auf Seite 14) auf die Rückenrohre aufschieben [D auf Seite 14].
2. Die zwei beiliegenden Kunststoffstopfen (15 auf Seite 14) fest in die dafür vorgesehenen Löcher zur Fixierung der Rückenlehne drücken.
3. Stellen Sie sicher, dass die Rückenlehne fest mit den Rückenrohren verbunden ist.

Duschstuhl, faltbar

Der faltbare Duschstuhl wird fertig montiert geliefert.

- ➔ Zum Entfalten das Kapitel Falten/Entfalten auf Seite 5 beachten.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Stellen Sie sich nicht mit den Füßen auf die Sitzplatte. – Sturzgefahr!

Prüfen Sie vor jeder Verwendung die einwandfreie Funktion der Gummifüße.

Abgenutzte oder beschädigte Gummifüße sind zu erneuern. – Unfallgefahr!

Achten Sie darauf, dass beim Benutzen immer alle vier Füße fest auf dem Boden stehen. – Unfallgefahr!

Setzen Sie sich immer mittig auf die Sitzfläche Ihres DuBaStar Produktes.

Stützen Sie sich nur senkrecht auf beide Seitenrahmen/Armpolster. – Kippgefahr!

Armpolster und Gummifüße Öl- und Fettfrei halten. – Unfallgefahr!

Vergewissern Sie sich, dass die Klammern (8) nach der eventuellen Höhenverstellung wieder fest eingerastet sind. – Unfallgefahr!

Überzeugen Sie sich vor der Benutzung von dem gebrauchsfähigen Zustand Ihres DuBaStar Produktes. – Unfallgefahr!

Ein verformtes DuBaStar Produkt nicht Richten und wieder einsetzen. – Unfallgefahr!

Seifen- und Duschmittel erhöhen die Rutschgefahr!

Nach dem Reinigen den korrekten Sitz der Klammern sowie der Sitzplatte und der Rückenlehne prüfen!

Vergewissern Sie sich vor Benutzung des Duschstuhles, dass die Rückenlehne mit den Kunststoffstopfen fixiert ist.

Die Fa. MEYRA kann im Sinne der Produkthaftung nicht für Schäden oder Risiken haftbar gemacht werden, die durch unbeaufsichtigte Kinder im Zusammenhang mit dem DuBaStar Produkt verursacht werden!

Ihr DuBaStar Produkt kann entflammbare Materialien enthalten.

Das Rauchen beim Umgang mit dem DuBaStar Produkt ist verboten.

Bei direkter Wärmestrahlung (Sonnenlicht, Wärmequellen etc.) kann sich das DuBaStar Produkt auf Temperaturen über 41 °C erhitzen.

– Es besteht Verletzungsgefahr bei Berühren durch unbedeckte Hautpartien!

Ihr DuBaStar Produkt ist nur auf festem, ebenem und rutschhemmendem Untergrund einzusetzen. – Kippgefahr!

Sitzhöhe einstellen

Die Teleskopfüße (10 auf Seite 14) auf gleiche Höhe einstellen.

Zum Einstellen der Sitzhöhe erst die jeweilige Feder (8 auf Seite 14) herausziehen. Dann die Teleskopfüße (10 auf Seite 14) auf die gewünschte Höhe verschieben. Anschließend die jeweilige Klammer wieder einstecken und sichtbar einschnappen lassen [C auf Seite 14].

➔ Die korrekte Arretierung der Klammern prüfen und sicherstellen.

Sitz

Die Sitzplatte (1 auf Seite 14) bei Bedarf durch leichten Druck von unten abnehmen. Vor dem Gebrauch die Sitzplatte ausrichten und wieder fest auf die Sitzrohre aufdrücken.

Rückenlehne

Duschstuhl:

Vor dem Gebrauch die Rückenlehne bis zum Anschlag auf die Rückenrohre der Seitenrahmen aufschieben und mit den Kunststoffstopfen (15 auf Seite 14) fixieren.

Falten/Entfalten

Duschstuhl faltbar:

Falten

1. Den Sitz durch leichtes Anheben entriegeln [F auf Seite 14].
2. Einen der Seitenrahmen (2 auf Seite 14) oder (3 auf Seite 14) hinter den Rückenrahmen schwenken [E auf Seite 14].

3. Den Sitz (1 auf Seite 14) nach unten klappen.

➔ Zuvor den Sitz anheben und den zweiten Seitenrahmen etwas nach außen schwenken.

4. Anschließend den zweiten Seitenrahmen vor den Sitz schwenken [E auf Seite 14].

Entfalten

1. Den vorderen Seitenrahmen nach außen schwenken.
2. Den hinteren Seitenrahmen nach vorn schwenken.
3. Den Sitz hochklappen und in die Aufnahmen (11 auf Seite 14) der Seitenrahmen herunterklappen.
4. Die Sitzrohre in die Aufnahmen (11 auf Seite 14) der Seitenrahmen drücken [H auf Seite 14].

REINIGUNG

Die Kunststoffteile werden durch nichtionische Tenside sowie durch Lösungsmittel und insbesondere Alkohole angegriffen.

Das DuBaStar Produkt ist nicht zur Reinigung in Reinigungsautomaten geeignet!

Zum Reinigen verwenden Sie am besten eine Seifenlösung. Das Reinigungsmittel sollte in jedem Fall einen pH-Wert von min. 6 aufweisen (Neutralreiniger).

DESINFEKTION

Wird das DuBaStar Produkt von mehreren Personen genutzt (z. B. im Pflegeheim), so ist die Anwendung eines handelsüblichen Desinfektionsmittels vorgeschrieben.

➔ Vor der Desinfektion ist das DuBaStar Produkt zu reinigen.

➔ Eine Sprüh- oder Wischdesinfektion ist mit geprüften und anerkannten Desinfektionsmitteln zugelassen.

Auskünfte über geprüfte und anerkannte Desinfektionsmittel und -verfahren kann Ihnen Ihre nationale Einrichtung für Gesundheitsschutz geben.

➔ Bei der Anwendung von Desinfektionsmitteln kann es vorkommen, dass u. U. Oberflächen durch die Anwendung in Mitleidenschaft gezogen werden, die die längerfristige Funktionsfähigkeit der Bauteile einschränken können.

➔ Dabei sind die vom Hersteller vorgegebenen Anwendungshinweise zu beachten.

REPARATUREN

Reparaturen sind grundsätzlich vom Fachhändler durchzuführen.

Instandsetzung

Zur Durchführung von Instandsetzungsarbeiten wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Fachhändler. Er ist in die Ausführung der Arbeiten eingewiesen.

Service

Falls Sie Fragen haben sollten oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, der Beratung, Service sowie Reparaturen übernehmen kann.

Ersatzteile

Ersatzteile sind nur über einen Fachhändler zu beziehen. Im Falle einer Reparatur sind nur Original-Ersatzteile zu verwenden!

➔ Bauteile von Fremdfirmen können Störungen hervorrufen.


Eine Ersatzteilliste mit den entsprechenden Artikelnummern und Zeichnungen liegt beim Fachhändler.

Für eine korrekte Ersatzteil-Lieferung ist in jedem Fall die entsprechende Serien-Nr. (SN) des DuBaStar Produktes mit anzugeben! Diese finden Sie auf dem Typenschild.

Bei jeder vom Fachhändler durchgeführten Reparatur am DuBaStar Produkt sind ergänzende Informationen wie z. B. Montage-/Bedienungshinweise der Bedienungsanleitung des DuBaStar Produktes beizulegen sowie das Datum der Änderung festzuhalten und bei Ersatzteilbestellungen mit anzugeben.

Dadurch soll bei späteren Ersatzteilbestellungen eine falsche Bestellangabe verhindert werden.

ENTSORGUNG

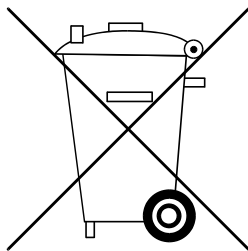

Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.

Erfragen Sie bitte bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung nach örtlichen Entsorgungsunternehmen.

WARTUNG

Eine mangelhafte oder vernachlässigte Pflege und Wartung des DuBaStar Produktes führt zur Einschränkung der Produzentenhaftung.

Wartungsarbeiten

Der folgende Wartungsplan stellt einen Leitfaden für die Durchführung der Wartungsarbeiten dar.

➔ Der Wartungsplan gibt keinen Aufschluss über den tatsächlich notwendigen, am DuBaStar Produkt festgestellten Arbeitsumfang.

Wartungsplan

WANN	WAS	ANMERKUNG
Vor der Benutzung	Rücken- und Rahmenrohre auf Beschädigung prüfen.	Prüfung selbst oder durch Hilfsperson durchführen. Bei Verformung oder Rissbildung im Schweißnahtbereich umgehend Fachwerkstatt zur Instandsetzung aufsuchen. – Unfallgefahr!
	Sitzplatte und Rückenschale auf Beschädigung prüfen.	Prüfung selbst oder durch Hilfsperson durchführen. Bei Verformung oder Rissbildung umgehend Fachwerkstatt zur Instandsetzung aufsuchen. – Unfallgefahr!
Nach der Benutzung	Reinigung	Reinigung selbst oder durch Hilfsperson durchführen.
Alle 6 Monate (je nach Gebrauchshäufigkeit)	Gummikappen auf Beschädigung und Schraubverbindungen auf festen Sitz prüfen.	Prüfung selbst oder durch Hilfsperson durchführen.
Empfehlung des Herstellers: Alle 12 Monate (je nach Gebrauchshäufigkeit)	Sicherheitsinspektion	Vom Fachhändler durchzuführen.

TECHNISCHE DATEN

Alle Angaben innerhalb der < *Technischen Daten* > beziehen sich auf die Standard-Ausführung.

Maßtoleranz ± 15 mm, $\pm 2^\circ$.

Angewendete Normen

Die DuBaStar Produkte entsprechen der Norm:

- ISO 17966

Modell: 3016702 Duschhocker

Länge	440 mm
Breite	530 mm
Höhe	650 – 720 mm
Sitzfläche	400 x 400 mm
Sitzhöhe	460 – 530 mm
Armlehnenhöhe	175 mm
Belastbarkeit	120 kg
Gewicht	2,5 kg
Umgebungstemperatur	+10°C bis + 40°C
Lagertemperatur	-40°C bis + 50°C
max. Wassertemperatur zum Reinigen des Produkts	80°C
Typenschild	am Sitzrohr


Modell: 3016712 Duschstuhl

Länge	530 mm
Breite	530 mm
Höhe	820 – 890 mm
Sitzfläche	400 x 400 mm
Sitzhöhe	460 – 530 mm
Armlehnenhöhe	175 mm
Belastbarkeit	120 kg
Gewicht	3,4 kg
Umgebungstemperatur	+10°C bis + 40°C
Lagertemperatur	-40°C bis + 50°C
max. Wassertemperatur zum Reinigen des Produkts	80°C
Typenschild	am Sitzrohr

Modell: 3016722 Duschstuhl faltbar

Länge	550 mm
Breite	530 mm
Höhe	820 – 890 mm
Sitzfläche	400 x 400 mm
Sitzhöhe	460 – 530 mm
Armlehnenhöhe	175 mm
Belastbarkeit	120 kg
Gewicht	3,8 kg
Umgebungstemperatur	+10°C bis + 40°C
Lagertemperatur	-40°C bis + 50°C
max. Wassertemperatur zum Reinigen des Produkts	80°C
Typenschild	am Sitzrohr

Bedeutung der Klebeschilder auf dem Produkt

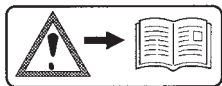

Achtung!
Gebrauchsanleitung
sowie beiliegende
Dokumentationen
lesen.



Hinweis auf
Quetschgefahr.
– Nicht hineingrei-
fen

Bedeutung der Symbole auf dem Typenschild



Hersteller



Bestellnummer



Seriennummer



Produktionsdatum



zul. Benutzergewicht



Medizinprodukt

GEWÄHRLEISTUNG / GARANTIE

Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung sowie unsachgemäß durchgeführte Wartungsarbeiten als auch insbesondere technische Änderungen und Ergänzungen (Anbauten) ohne unsere Zustimmung führen zum Erlöschen sowohl der Gewährleistungs- und Garantiesprüche als auch der Produkthaftung allgemein.

Nationale Gewährleistungs- / Garantiebedingungen zwischen Ihnen und Ihrem Fachhändler können von denen in diesem Kapitel genannten Bedingungen abweichen.

Für dieses Produkt übernehmen wir im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen die gesetzliche Gewährleistung und gegebenenfalls ausgesprochene bzw. vereinbarte Garantien. Für Gewährleistungs- bzw. Garantiesprüche wenden Sie sich bitte mit dem nachfolgenden GEWÄHRLEISTUNGS- / GARANTIE-ABSCHNITT und den darin benötigten Angaben über die Modellbezeichnung, die Lieferschein-Nr. mit Lieferdatum und Seriennummer (SN) an Ihren Fachhändler.

Die Seriennummer (SN) ist vom Typenschild abzulesen.











Voraussetzung für die Anerkennung von Gewährleistungs- bzw. Garantiesprüchen ist in jedem Fall der bestimmungsgemäße Gebrauch des Produktes, die Verwendung von Original-Ersatzteilen durch Fachhändler sowie die regelmäßige Durchführung von Wartung und Inspektion.

Für Oberflächenbeschädigungen, Bereifung der Räder, Beschädigungen durch gelöste Schrauben oder Muttern sowie ausgeschlagene Befestigungsbohrungen durch häufige Montagearbeiten ist die Garantie ausgeschlossen.

Diese Bedienungsanleitung als Bestandteil des Produktes ist bei einem Benutzer- sowie Besitzerwechsel diesem mitzugeben.

Für die Bewertung unserer Produkte können Sie unser < Infozentrum > Bereich < PMS > auf unserer Webseite < www.meyra.com > benutzen.

Technische Änderungen im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns vor.

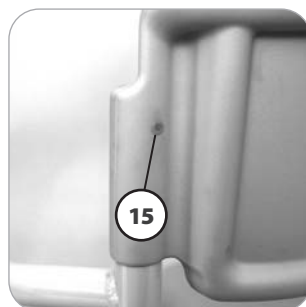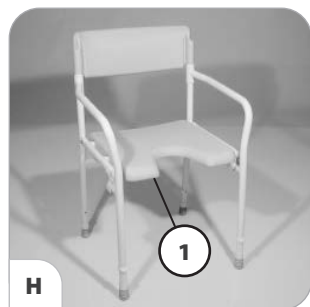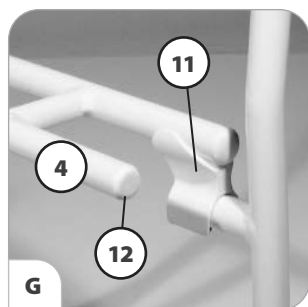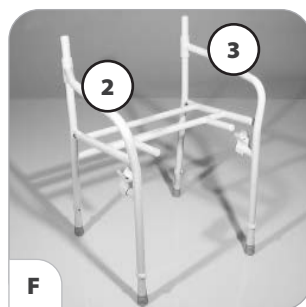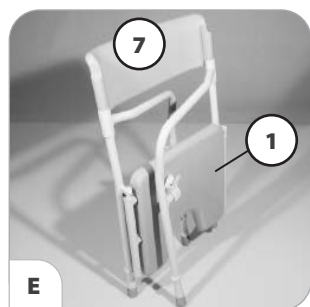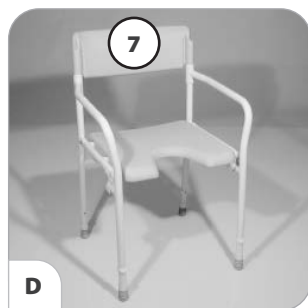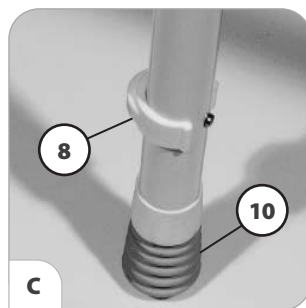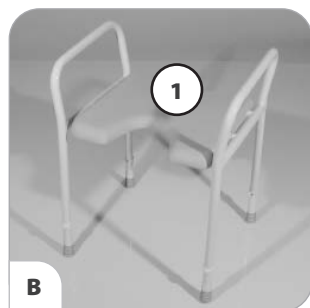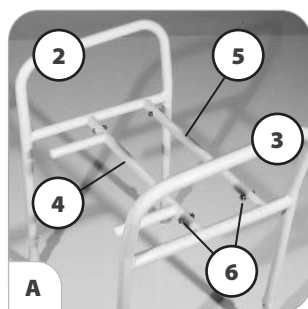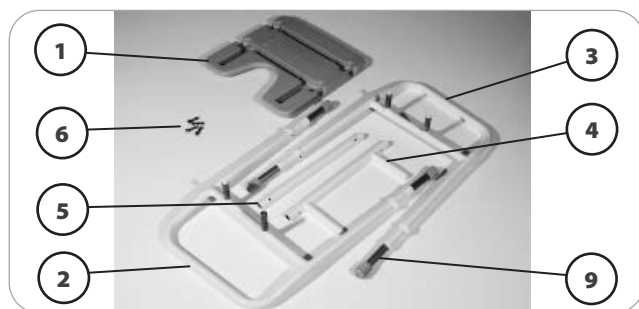

Gewährleistungs- / Garantie-Abschnitt

Bitte ausfüllen! Im Bedarfsfall kopieren und die Kopie an Ihren Fachhändler einsenden.

Gewährleistung / Garantie

Modellbezeichnung:

Lieferschein-Nr.:

SN (siehe Typenschild):

Lieferdatum:


Stempel des Fachhändlers:



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte.



Ihr Fachhändler

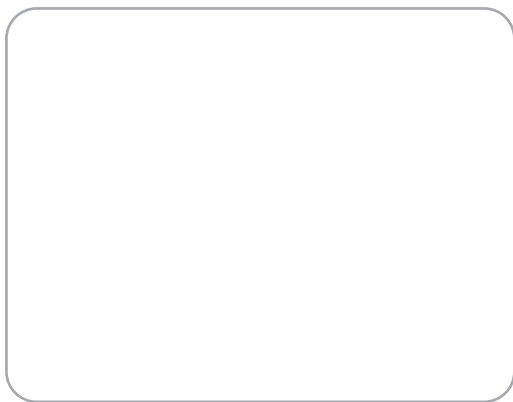

Original
Bedienungsanleitung

MEYRA GmbH Kleiststraße 49 | 32457 Porta Westfalica | Deutschland
info@meyragroup.com | Tel.: +49 571 93292 - 311 | Fax: +49 571 93292 - 9311 | www.meyra.de

2025-05 Technische Änderungen unserer Produkte sowie Druckfehler
in unseren Drucksachen behalten wir uns vor.

Teile-Nr. 205 993 400