


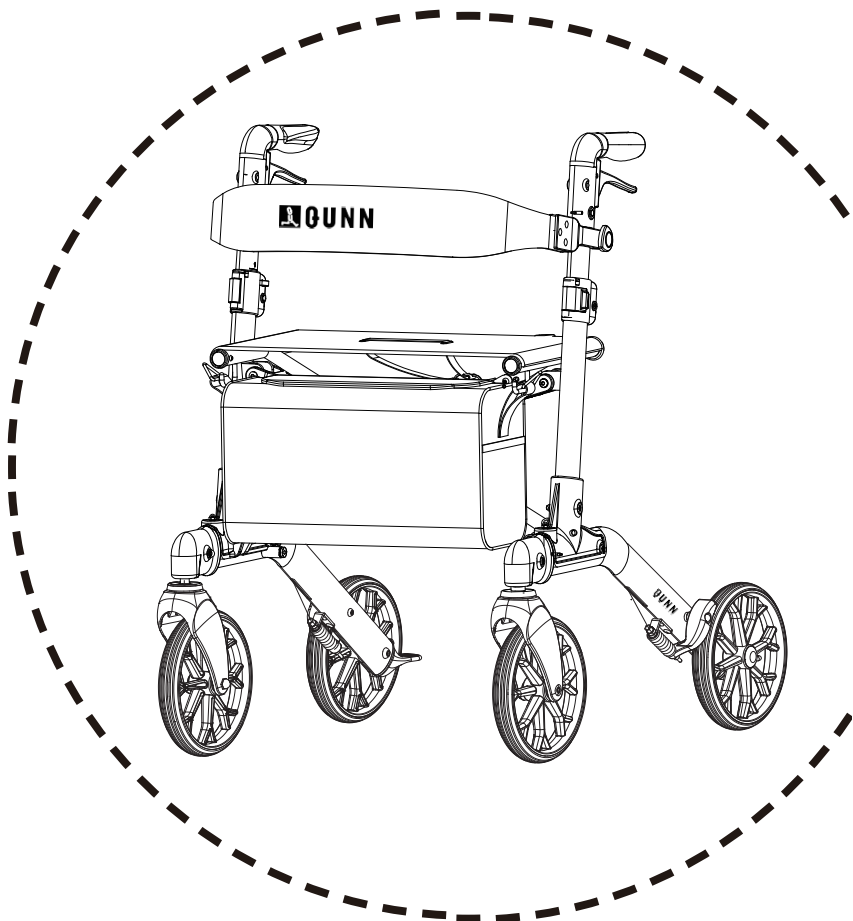

USER MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKERSHANDLEIDING LE MANUEL DE L'UTILISATEUR MANUAL DE USUARIO

BROOKLYN Rollator Aluminium (double foldable)

BROOKLYN Rollator Aluminium (doppelt faltbar)

BROOKLYN Rollator Aluminium (dubbel opvouwbaar)

BROOKLYN Rollator Aluminium (plié doublement)

BROOKLYN Rollator Aluminium (doblamente plegable)



BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR EINE SICHERE VERWENDUNG UND WARTUNG SORGFÄLTIG DURCH

EINFÜHRUNG

Der Aluminum-Faltrollator Brooklyn ist mit einem Sitz, einer Rückenlehne und einer Tasche ausgestattet und verfügt über einen robusten, zweifach faltbaren Rahmen und höhenverstellbare Griffe. Er hat 4 leichtgängige, robuste Räder und einen leichten Rahmen, der einen einfachen Transport und gute Manövrierfähigkeit ermöglicht. Der von Ihnen erworbene Rollator ist ausschließlich als Gehhilfe für Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit vorgesehen. Er soll Menschen, die Gleichgewichtsprobleme haben oder andere Einschränkungen beim Gehen vorweisen, unterstützen und Ihnen Halt und Sicherheit beim Laufen geben.

Zweckbestimmung

Der Brooklyn ist ein Rollator, der dem Nutzer beim Gehen Halt und Stabilität sowie eine Sitzgelegenheit für den Innen- und Außenbereich bietet.

Indikationen

Erwachsene mit Einschränkungen der Gehfähigkeit.

Kontraindikationen

Das Produkt ist nicht für Personen mit geringer Kraft in den Armen, mit sehr schlechtem Gleichgewicht oder mit erheblichen kognitiven Einschränkungen geeignet.

Bestimmungsgemäße verwendung

Der Rollator ist

- nur für den privaten Gebrauch gedacht.
- ausschließlich für den Außenbereich konzipiert.
- NICHT geeignet für Sand, Kies, sehr unebenes Gelände, sowie sehr steiles Gelände.

- ein Medizinprodukt und konform mit der EU Richtlinie 2017//745 über Medizinprodukte. Er ist KEIN Spielzeug.
- nur für den Gebrauch durch Personen mit einem Gewicht von max. 136 kg (300 lbs) bestimmt.

Verwenden Sie den Rollator nur wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen, falschen Gebrauch entstehen.

Bitte beachten sie:



Dieses Gerät muss von einer sachkundigen Person installiert werden. Gewichtsbeschränkung: 136 kg (300 lbs). Überschreiten Sie die angegebenen Gewichtsgrenze nicht! Dies könnte den Benutzer gefährden.

Lieferumfang

- 1 x faltbarer Aluminium Rollator
- 1 x Rückenlehne
- 2 x Schrauben
- 1 x Tasche

Technische Daten

Empfohlene Körpergröße des Benutzers:	150 cm bis 180 cm ± 5 cm
Abstand zwischen den Griffen:	48,4 cm $\pm 0,5$ cm
Verstellbare Griffhöhe:	82–93,5 cm ± 1 cm
Nettogewicht mit Zubehör:	7,8 kg
Nettogewicht ohne Zubehör:	7,3 kg
Tragfähigkeit Korb/Tasche:	5 kg
Material:	Aluminiumlegierung
Wenderadius:	87,5 cm ± 1 cm


Spezifikation	Daten (Einheit)
Radgröße	8" vorne, 8" hinten
Maximale Tragfähigkeit	136 kg
Nettogewicht	7.3 kg
Entfaltet abmessungen	
Gesamtbreite	62 ± 1 cm
Gesamtlänge	70 ± 1 cm
Gesamthöhe	82 - 93.5 ± 1 cm
Sitzhöhe	54.5 ± 0.5 cm
Sitzbreite	46 ± 0.2 cm
Sitztiefe	25 ± 0.2 cm
Erste gefaltete abmessungen	
Faltbreite	23 ± 1 cm
Faltlänge	70 ± 1 cm
Falthöhe	82 ± 1 cm
Zweite gefaltete abmessungen	
Faltbreite	23 ± 1 cm
Faltlänge	80.5 ± 1 cm
Falthöhe	43 ± 1 cm

Lagerungs- und Betriebsbedingungen

Punkt	Bedingung
Maximales Benutzergewicht	136 kg
Betriebstemperatur	-5°C ~ +40°C (Empfohlen)
Lagertemperatur	-10°C ~ +50°C
Lagerluftfeuchtigkeit	≤80% RH (Relative Luftfeuchtigkeit)
Empfohlene Untergründe	Innenböden, Außenböden, Asphalt, Beton und andere ebene Flächen.
Eingeschränkt zugelassen	Vorsicht bei der Nutzung des Rollators auf nassen, rutschigen oder vereisten Oberflächen (z.B. Eis und Schnee). Die Nutzung auf solchen Oberflächen wird nicht empfohlen.
Ungeeignete Untergründe	NICHT auf Kies, Sand oder ähnlichen instabilen und unebenen Flächen verwenden. NICHT auf steilen Steigungen verwenden. NIEMALS auf Treppen, Rolltreppen oder Fahrsteigen verwenden.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

1. Entfernen Sie vorsichtig das Verpackungsmaterial. Verzichten Sie dabei auf den Einsatz von Messern oder anderen scharfen Gegenständen, um die Oberfläche der Teile nicht zu beschädigen.
2. Nachdem Sie das Produkt ausgepackt haben, prüfen Sie bitte, ob der Lieferumfang vollständig ist und ob der Rollator und / oder die Zubehörteile Schäden aufweisen. Sollten Ihnen Schäden auffallen, verwenden Sie den Rollator nicht. Kontaktieren Sie in dem Fall bitte Ihren Händler.
3. Wenn alle Teile in Ordnung sind, entsorgen Sie das Verpackungsmaterial nach den örtlichen Entsorgungsrichtlinien.

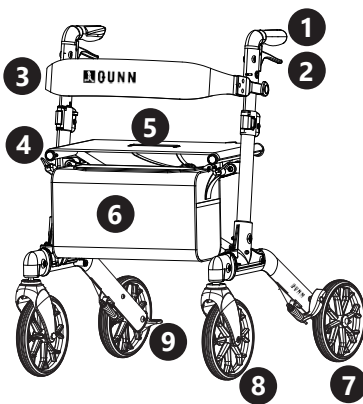

Hauptkomponenten des faltbaren rollators

1. Handgriffe
2. Bremshebel
3. Rückenlehne
4. Sitzfläche
5. Griff zum Zusammenfallen
6. Tasche
7. Hinterrad
8. Vorderrad schwenkbar
9. Ankipphilfe

Aufbauen des Rollators

WICHTIGER HINWEIS: Stellen Sie vor dem Zusammenbau sicher, dass der Rollator vollständig zusammengeklappt ist (Abb. 1), da dies für den korrekten Anschluss des Faltmechanismus entscheidend ist.

Überprüfen Sie nach jedem Schritt, ob alle Teile richtig verriegelt sind. Wenn Sie auf Widerstand stoßen, erzwingen Sie die Bewegung nicht; überprüfen Sie bitte den vorherigen Schritt.

1. Nehmen Sie den Rollator und stellen Sie ihn mit den Rädern auf den Boden, wie in Abb. 1 dargestellt. Stellen Sie sicher, dass der Faltmechanismus intakt ist.
2. Greifen Sie die Griffe, heben Sie sie an und schieben Sie den Rahmen nach vorne (Abb. 1), bis Sie ein „Klicken“ hören, was darauf hinweist, dass das Basisteil verbunden ist und der Faltmechanismus sicher verriegelt ist (Abb. 2).
3. Greifen Sie die Griffe und schieben Sie sie zur Seite, um die volle Breite des Rollators zu entfalten (Abb. 2).

Abb. 1



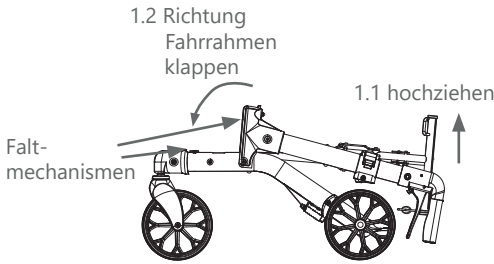


Abb. 2

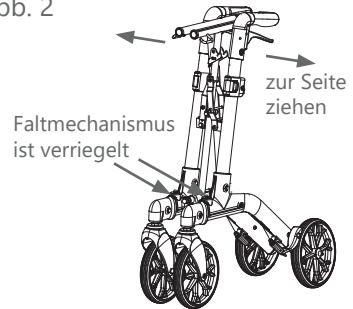

4. Drücken Sie mit beiden Händen auf beide Seiten des Sitzes, bis Sie ein „Klicken“ hören, um sicherzustellen, dass der Sitz verriegelt ist, und überprüfen Sie, ob der Verriegelungshaken unter dem Sitz eingerastet ist. Keine Hände zwischen Sitzrand und Innenrahmen des Rollators platzieren. Achtung: Einklemmgefahr.

Abb. 3

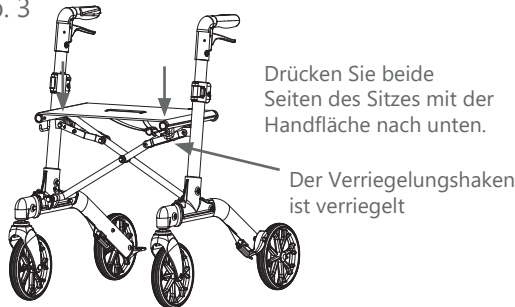

5. Stellen Sie die Höhe der Handgriffe auf den Nutzer ein (siehe EINSTELLEN DER HANDGRIFFHÖHE).
6. Nehmen Sie die Rückenlehne und bringen Sie das eine Ende am seitlichen Rahmen des Rollators an. Befestigen Sie sie mit einer Schraube (Abb. 4). Wiederholen Sie den Schritt für das andere Ende. Stellen Sie sicher, dass die Rückenlehne korrekt angebracht ist und die Schrauben festgezogen sind.
7. Wenn du möchtest, befestige die Tasche am Rollator. Sie wird mit einem Haken am Rahmen des Sitzes befestigt (Abb. 5).

Abb. 4


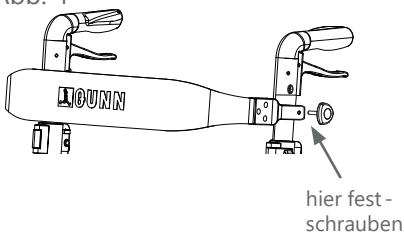


Abb. 5



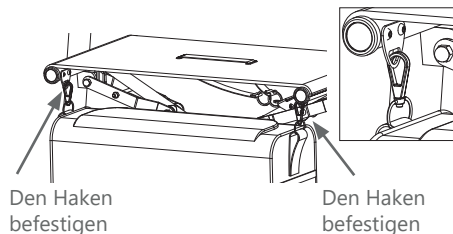

Warnung

Gehen oder sitzen Sie nicht, bevor der vordere Klappmechanismus vollständig eingerastet ist. Dieser Rollator verfügt über einen einzigartigen, patentierten Klappmechanismus, das bedeutet, sobald der Griff in der Mitte des Sitzes angehoben wird, lässt sich der gesamte Rollator schnell und einfach vollständig falten. Achten Sie bei der / vor der Nutzung darauf, dass der Sitz fest nach unten gedrückt wird und der Mechanismus eingerastet ist.


Korrekte Handgriffhöhe

Stehen Sie gerade und nah am Rollator. Lassen Sie die Arme locker hängen. Umfassen Sie nun die Handgriffe des Rollators. Die Arme sollten leicht gebeugt sein, dann ist die Höhe der Handgriffe richtig eingestellt. Ist dies nicht der Fall, verstellen Sie bitte die Höhe der Handgriffe entsprechend, wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

Einstellen der Handgriffhöhe

Die Höhe der Handgriffe lässt sich sehr leicht an unterschiedliche Benutzergrößen anpassen.

Abb. 6

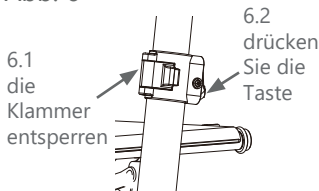

1. Die Klammer entsperren, drücke Sie den Knopf am Rahmen unterhalb des Handgriffs (Abb. 6) und ziehen Sie den Handgriff nach oben oder drücken Sie ihn nach unten.
2. Während sich der Griff bewegt, lassen Sie den Knopf los. Dadurch wird automatisch die nächstmögliche Höhe ardrücken retiert.

3. Wiederholen Sie diesen Vorgang (Schritt 1 und 2), bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Stellen Sie sicher, dass der Knopf richtig einrastet.
4. Wiederholen Sie den Vorgang für den zweiten Griff

HINWEIS: Die Griffe sind auf die richtige Höhe eingestellt, wenn sie sich bei locker hängenden Armen auf der Höhe Ihres Handgelenks befinden.

Falten des Rollators

1. Nehmen Sie die Tasche ab, bevor Sie den Rollator zusammenklappen.
2. Zum Zusammenklappen den schwarzen Griff auf der Sitzfläche nach oben ziehen. Der gesamte Rollator lässt sich nun schnell und einfach vollständig zusammenklappen.
3. Für das kompakte Maß des Rollators falten Sie ihn ein weiteres Mal indem Sie die Handgriffe nehmen und den Lenkrahmen nach unten drücken.
4. Um den Rollator ein zweites Mal zu falten, drücken Sie einfach die Griffe nach unten und der Rollator faltet sich in kompakte Maße.

Verletzungsgefahr!



Halten Sie beim Zusammenklappen des Rollators Ihre Hände von den Seitenstreben fern. Sie könnten sich ihre Hände klemmen.

NUTZUNG DES ROLLATORS

Generelle Informationen zur Nutzung des Rollators

Beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise zur Nutzung des Rollators. Für eine sichere Verwendung sind diese Anleitung, die Sicherheitshinweise und das Kapitel über den bestimmungsgemäßen Gebrauch unbedingt zu beachten!



Verletzungsgefahr!

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Rollators. Benutzen Sie den Rollator NICHT, wenn Sie äußere Schäden bemerken.
- Überprüfen Sie immer, ob alle Schrauben fest angezogen sind, bevor Sie den Rollator verwenden.
- Prüfen Sie stets, ob die Bremsen ordnungsgemäß funktionieren, bevor Sie den Rollator benutzen
- Der Rollator ist eine Gehhilfe. Benutzen Sie den Rollator nur, um beim Gehen sicher zu sein. Benutzen Sie den Rollator NICHT als Rollstuhl oder Ähnliches.
- Regen, Feuchtigkeit und Schmutz können die Bremsleistung des Rollators negativ beeinflussen.
- Vermeiden Sie ungeeignete Untergründe und Wege. Fahren Sie mit dem Rollator nicht über Kies, Sand oder ähnliche, unebene Untergründe.
- Auf abschüssigen Wegen kann die Rollgeschwindigkeit des Rollators höher sein als Ihre Gehgeschwindigkeit. Es besteht Sturzgefahr! Bremsen Sie ausreichend und gehen Sie vorsichtig.

Richtiges gehen mit dem Rollator



Verletzungsgefahr!

- Der Rollator muss beim Gehen immer nah am Körper gehalten werden, damit er guten Halt bietet und ein sicheres Gehen ermöglicht. Wenn der Rollator beim Gehen zu weit vom Körper entfernt ist, kann er leicht wegrollen. Das Gleiche gilt, wenn Sie zu gebeugt gehen. Sturzgefahr!
- Stützen Sie sich beim Gehen auf den Rollator und stabilisieren Sie Ihren Gang.
- Gehen Sie immer aufrecht und richten Sie den Blick geradeaus.
- Benutzen Sie den Rollator nur, wenn die Griffhöhe korrekt auf Ihre Körpergröße eingestellt ist (siehe KORREKTE HANDGRIFFHÖHE).

Nutzung der Bremsen

Nutzung der Bremsen während des Gehens:

Um Ihre Gehgeschwindigkeit zu reduzieren, ziehen Sie beide Handbremshebel zum Griff. Stärker ziehen, um eine stärkere Bremswirkung zu erzielen. Um die Bremswirkung zu verringern, lösen Sie vorsichtig den Handbremshebel.


Bremsen feststellen:

Drücken Sie beide Handbremshebel nach unten, bis sie einrasten und in der unteren Position bleiben. Die Bremsen sind jetzt blockiert.

So stellen Sie die Bremsen ein:

Der Rollator ist mit von Hersteller voreingestellten Bremsen ausgestattet, eine weitere Justierung ist nicht erforderlich. Bitte justieren Sie die Bremsen nicht selbst, es sei denn, Sie befinden sich in besonderen Umständen. Bei Störungen der Bremsen empfiehlt es sich, Ihren örtlichen Händler oder einen qualifizierten Wartungstechniker zu kontaktieren. Der Bremsjustiermechanismus befindet sich an der in Abbildung 7 angegebenen Position.

Abb. 7

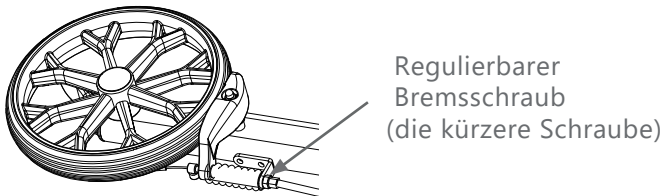

Verletzungsgefahr!

Beim Anhalten, Parken und insbesondere wenn Sie sich auf den Rollator setzen möchten, stellen Sie immer beide Bremsen fest! Überprüfen Sie vor dem Aufstehen vom Rollator, ob beide Bremsen noch blockiert sind, um ein sicheres Aufstehen zu ermöglichen.

Festgestellte Bremsen lösen:

Ziehen Sie die Handbremshebel nach oben, bis sie sich lösen und in der Neutralstellung anhalten. Die Bremsen sind nun gelöst.

HINWEIS: Die Bremsen am Rollator sind werkseitig eingestellt und sollten nicht angepasst werden müssen. Wenn Sie glauben, dass die Bremsen nicht mehr richtig funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort, um technische Hilfe zu erhalten.

Hindernisse überwinden



Verletzungsgefahr!

- Halten Sie den Rollator beim Überwinden von Hindernissen gut fest.
- Seien Sie beim Begehen von Bordsteinkanten besonders vorsichtig!
- Nutzen Sie die Ankipphilfe
- Benutzen Sie den Rollator nicht auf Treppen!
- Neigen Sie den Rollator nicht mehr als 5 Grad zur Seite. Sturzgefahr!

Korrekte Nutzung der Sitzfläche



Verletzungsgefahr!

- Setzen Sie sich nur auf den Rollator, wenn beide Feststellbremsen aktiviert sind und der Rollator auf einer ebenen Fläche steht!
- Lassen Sie sich NICHT schieben, während Sie auf dem Rollator sitzen, und schieben Sie keine andere Person, die auf dem Rollator sitzt. Sturzgefahr!
- Setzen Sie sich nicht auf den Rollator, wenn der Untergrund sehr glatt und rutschig ist. Der Rollator kann trotz aktivierter Feststellbremse wegrutschen.
- Es darf jeweils nur eine Person auf dem Sitz sitzen. Bitte achten Sie auf die maximale Belastbarkeit des Rollators!
- Setzen Sie sich immer in die Sitzmitte und achten Sie darauf, dass beide Füße den Boden berühren!

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Reinigen Sie den Rollator mit einem weichen, feuchten Putzlappen und bei Bedarf mit etwas mildem Reinigungsmittel. Trocknen Sie den Rollator anschließend gut ab. Lassen Sie den Rollator nach der Reinigung eine Weile trocknen, damit schwer zugängliche Stellen gründlich trocknen können. Insbesondere die Räder, Griffe und Bremsvorrichtungen müssen vor der erneuten Nutzung des Rollators vollständig trocken sein.

Bei der Desinfektion befolgen Sie die Anwendungshinweise des verwendeten Desinfektionsmittels und desinfizieren Sie alle zugänglichen Flächen. Nutzen Sie als Desinfektionsmittel ausschließlich haushaltsübliches Desinfektionsmittel und trocknen Sie das Produkt anschließend an der Luft.



GEFAHR DER BESCHÄDIGUNG!

Verwende Sie niemals organische Lösungsmittel oder Scheuermittel.

PFLEGE UND WARTUNG

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Funktionsfähigkeit des Rollators. Überprüfen Sie insbesondere folgende Punkte:

- Die Bremsen sind in einwandfreiem Zustand und die Bremszüge sind frei von Verformungen und Rissen.
- Die Räder sind in einwandfreiem Zustand. Alle Räder sind einwandfrei drehbar und die Vorderräder sind schwenkbar. Die Reifen weisen keine nennenswerten Gebrauchsspuren auf.
- Alle Schraubverbindungen sind fest angezogen.
- Der gesamte Rollator ist frei von Beschädigungen, Rissen und groben Verschmutzungen.



Verletzungsgefahr!

Benutzen Sie den Rollator NICHT, wenn die Funktionalität des Rollators nicht oder nur eingeschränkt gewährleistet ist. Bereits geringfügige Beschädigungen oder Verschmutzungen (z. B. an den Bremsen des Rollators) können zu Verletzungen und Unfällen führen.

WIEDERAUFBEREITUNG UND WIEDEREINSATZ

Dieses Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet. Um das Produkt für einen neuen Benutzer wiederaufzubereiten, sind die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:

- Prüfung
- Reinigung und Desinfektion

Stellen Sie sicher, dass die Gebrauchsanweisung zusammen mit dem Produkt übergeben wird.

LAGERUNG



Verletzungsgefahr!

Wenn Sie den Rollator längere Zeit nicht benutzen, sichern Sie den Rollator mit der Feststellbremse gegen Wegrollen und stellen Sie den Rollator nur dort ab, wo niemand darüber stürzen kann.

- Wenn Sie den Rollator längere Zeit nicht benutzen, reinigen Sie ihn, bevor Sie ihn wegräumen (siehe REINIGUNG).
- Lagern Sie den Rollator an einem trockenen und gut belüfteten Ort.
- Schützen Sie den Rollator vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung.
- Bewahren Sie den Rollator außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



Gefahr der Beschädigung!

Lassen Sie den Rollator niemals längere Zeit im Freien stehen und setzen Sie den Rollator keinen schlechten Witterungsbedingungen aus. Dies kann zu Schäden am Rollator führen.

TRANSPORT

Klappen Sie den Rollator für den Transport zusammen (siehe FALTEN DES ROLLATORS). Achten Sie darauf, dass der Rollator beim Transport ordnungsgemäß gesichert ist. Treffen Sie ggf. zusätzliche Vorkehrungen zur Transportsicherung.



SICHERHEITSHINWEIS

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (z. B. teilweise behinderte Menschen, ältere Menschen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen (z. B. Kinder).

- Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen dürfen den Rollator nur unter Aufsicht nutzen oder wenn sie in den sicheren Gebrauch eingewiesen wurden und die Gefahren verstanden haben, die beim Gebrauch des Rollators entstehen können.
- Halten Sie Kinder vom Rollator fern. Kinder könnten mit dem Rollator umkippen und sich verletzen.



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Rollator kann zu schweren Verletzungen führen. Auf folgende Informationen ist unbedingt zu achten:

- Benutzen Sie den Rollator NICHT, wenn Sie unter dem Einfluss von Substanzen stehen, die Ihre geistige und körperliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigen (z. B. starke Medikamente oder Alkohol).
- Benutzen Sie den Rollator NICHT auf Kies, Sand oder ähnlichen instabilen und unebenen Oberflächen.
- Benutzen Sie den Rollator NICHT auf steilen Steigungen / Neigungen.
- Benutzen Sie den Rollator NIEMALS auf Treppen, Rolltreppen oder Rollsteigen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Rollator auf nassen, rutschigen oder glatten Oberflächen (z. B. Eis und Schnee) betreiben. Es ist am besten, den Rollator NICHT auf solchen Oberflächen zu verwenden.

- Nutzen Sie den Rollator nicht im Dunkeln oder bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Vermeiden Sie es, mit dem Rollator über Schachtdeckel, Gitter und dergleichen zu fahren. Die Reifen könnten sich in den Unebenheiten verfangen.
- Gehen Sie mit dem Rollator nur auf dem Gehweg. Benutzen Sie die Fahrbahn / Straße nur zum Überqueren.
- Überschreiten Sie niemals die maximale Tragfähigkeit des Rollators. Das maximale Benutzergewicht beträgt 136 kg.
- Benutzen Sie den Rollator niemals als Rollstuhl oder als Transportmittel für Personen. Das bedeutet: Schieben Sie den Rollator nicht, wenn jemand auf dem Rollator sitzt.
- Hängen Sie KEINE Taschen an den Rollator, außer die mitgelieferte Tasche.
- Nehmen Sie KEINE Veränderungen am Rollator vor, insbesondere NICHT an den beweglichen Teilen des Rollators. Bei Änderungen ist die sichere Nutzung nicht mehr gewährleistet. Sie könnten sich verletzen.
- Stellen Sie sicher, dass beide Feststellbremsen angezogen sind, bevor Sie sich auf den Rollator setzen oder ihn abstellen. Der Rollator ist nur für kurzzeitiges Sitzen geeignet und keinesfalls als Stuhl für dauerhaftes Sitzen gedacht. Bevor Sie wieder vom Rollator aufstehen, prüfen Sie, ob beide Feststellbremsen noch angezogen sind. Stehen Sie erst dann auf.
- Stellen Sie sich NIEMALS auf den Rollator. Benutzen Sie den Rollator niemals als Aufstiegshilfe oder als Leiter!



Verbrennungsgefahr!

Setzen Sie den Rollator keiner dauerhaften direkten Sonneneinstrahlung oder ähnlichen Wärmequellen aus. Stellen Sie den Rollator nicht vor offenem Feuer ab. Einzelne Teile des Rollators können sehr heiß werden.



Gefahr der Beschädigung!

Schützen Sie den Rollator vor dauerhafter direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen, da Teile des Rollators mit der Zeit ausbleichen und beschädigt werden können.

Vorsicht

Verwenden Sie dieses Produkt nicht ohne ordnungsgemäße Unterweisung durch medizinisches Fachpersonal.

- Dieses Produkt hat eine Gewichtsbeschränkung von 136 kg für Patienten.
- QUNN übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Installation dieses Produkts verursacht werden.
- Wenn Komponenten fehlen oder beschädigt sind, den Rollator NICHT VERWENDEN. Kontaktieren Sie umgehend Ihren Händler!
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile und Komponenten vor der Verwendung festgezogen sind.
- Überprüfen Sie den Rollator wöchentlich auf ordnungsgemäße Funktion und Verschleiß. Wenn eine Komponente nicht funktioniert oder abgenutzt ist, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler, um Ersatzteile zu erhalten.
- Wenn ein ernsthafter Zwischenfall mit dem Gerät auftritt, sollte dies dem Hersteller und dem örtlichen autorisierten Händler sofort mitgeteilt werden.

GARANTIE

Um die Sicherheit und Lebensdauer Ihres Rollators zu verbessern, wird empfohlen, dass Sie ihn regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen. Ab Kaufdatum gibt es eine umfassende 24 monatige Garantie. Die Garantie deckt die Kosten für Reparaturen bzw. Ersatz während dieser Zeit. Weitere Einzelheiten finden Sie in den nachstehenden Garantiebedingungen:

1. Alle Arbeiten oder der Einbau von Ersatzteilen müssen von einem autorisierten Händler vorgenommen werden.
2. Um die Garantie geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle, bei der Sie den Rollator gekauft haben.
3. Sollte ein Teil des Rollators repariert oder vollständig oder teilweise ausgetauscht werden müssen, infolge eines Herstellungs- oder Materialfehlers innerhalb der Garantiezeit, werden die Teile kostenlos nachgeliefert. Hinweis: Die Garantie ist nicht übertragbar.
4. Alle reparierten oder ersetzten Teile werden durch den Rest der Garantiezeit abgedeckt.
5. Für Teile, die nach Ablauf der ursprünglichen Garantie ersetzt wurden, gilt eine Garantiefrist von drei Monaten.
6. Gelieferte Verbrauchsartikel sind während der normalen Gewährleistungsfrist im Allgemeinen nicht abgedeckt, hierzu gehören Polsterung und Reifen.

7. Die vorstehenden Garantiebedingungen gelten für fabrikneue Gehhilfen.
8. Unter normalen Umständen wird keine Verantwortung übernommen, wenn der Rollator eine Reparatur benötigt als direkte Folge von:
 - a. Teile des Gehwagens wurden nicht gemäß den Herstellerangaben gewartet.
 - b. Nichtverwendung der vom Hersteller angegebenen Teile.
 - c. Beschädigungen am Rollator oder Teilen des Rollators, die aufgrund von Nachlässigkeit, Unfall oder unsachgemäßem Gebrauch entstanden sind.
 - d. Änderungen, die am Rollator vorgenommen wurden , also die Herstellerspezifikation geändert wurden.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Gewichte, Maße oder Angaben ohne Vorankündigung zu ändern. Alle in diesem Handbuch angegebenen Zahlen, Maße und Kapazitäten stellen keine Spezifikationen dar.

	Hersteller	ZHONGSHAN QUNN MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD 3rd Booth No.108 Zhaoyi Road, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong, China info@qunn.com
	Bevollmächtigter in der EU	SUNGO Europe B.V. Fascinatia Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands Tel: +31(0)10 3034500 E-mail: ec.rep@sungogroup.com/ yan.zhang@sungoglobal.com





No.108 zhaoyi Road| 528414
Zhongshan
www.qunn.com
info@qunn.com