

Bedienungshilfe: GX-Display

Diese Bedienungshilfe bietet Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Eigenschaften und Funktionen des GX-Display's. Für detaillierte Informationen und Anleitungen verweisen wir auf das Handbuch, welches dem Lieferumfang Ihres Adaptionsgerät beiliegt.

Ein-/Ausschalten

Schalten Sie den Schlüsselschalter und den Akku ein. Drücken Sie ca. 2 Sekunden auf die Taste „“, welche sich auf der Unterseite Ihres Displays befindet.

Anzeigemodus des Display's ändern


Zum Wechseln zwischen den Ansichten drücken Sie kurz die Taste „“, welche sich auf der Unterseite Ihres Displays befindet.

Informationen und Einstellungen zur Fahrt

Stufe 1 - 5: Das Zuggerät kann in 5 verschiedenen Stufen gefahren werden.

Diese unterscheiden sich in der maximalen Geschwindigkeit. In Stufe 1 fährt das Zuggerät am langsamsten. In Stufe 5 fährt es die maximale Geschwindigkeit. In Stufe 0 ist das Beschleunigen nicht möglich.

Trip: Zum Wechseln der angezeigten Informationen wie „Trip“ zur Fahrt drücken Sie die Taste „**M**“, welche sich auf der Oberseite Ihres Displays befindet.

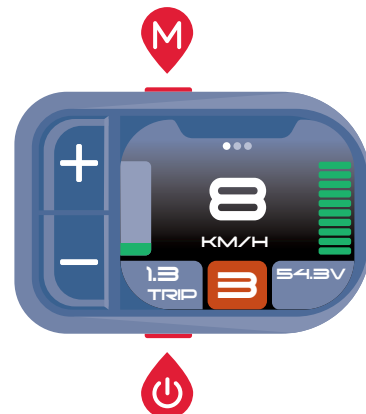

Anfahren an Steigungen

1. Halten Sie die Bremse ohne Bremsabschalter (eine Bremse mit Bremsabschalter deaktiviert den Motor, solange diese betätigt wird). In den meisten Ausstattungen ist dies der linke Bremshebel. Dies variiert jedoch von den Ausstat-

tungsformen und den individuellen Anpassungen.

2. Beschleunigen Sie mit dem Gasgriff oder dem Daumengas so weit, bis das Zuggerät vorwärts bewegen möchte

3. Lösen Sie die Bremse langsam, bis Sie sich vorwärts bewegen. Beschleunigen Sie stärker, falls Sie rückwärts rollen.

Walkmodus

Anwendungsfall

Der Walkmodus ist nützlich, wenn Sie einen Fußgänger begleiten.


Er sorgt dafür, dass Ihr Zuggerät auf eine Geschwindigkeit von 3 km/h beschleunigt und diese hält, solange Sie die zugehörige Taste gedrückt halten.

Einschalten

Drücken Sie die Taste „“, welche sich auf der Vorderseite des Displays befindet. Halten Sie die Taste solange, wie Sie den Walkmodus verwenden möchten.

Ausschalten

Der Walkmodus schaltet sich selbst ab, sobald Sie die Taste loslassen.

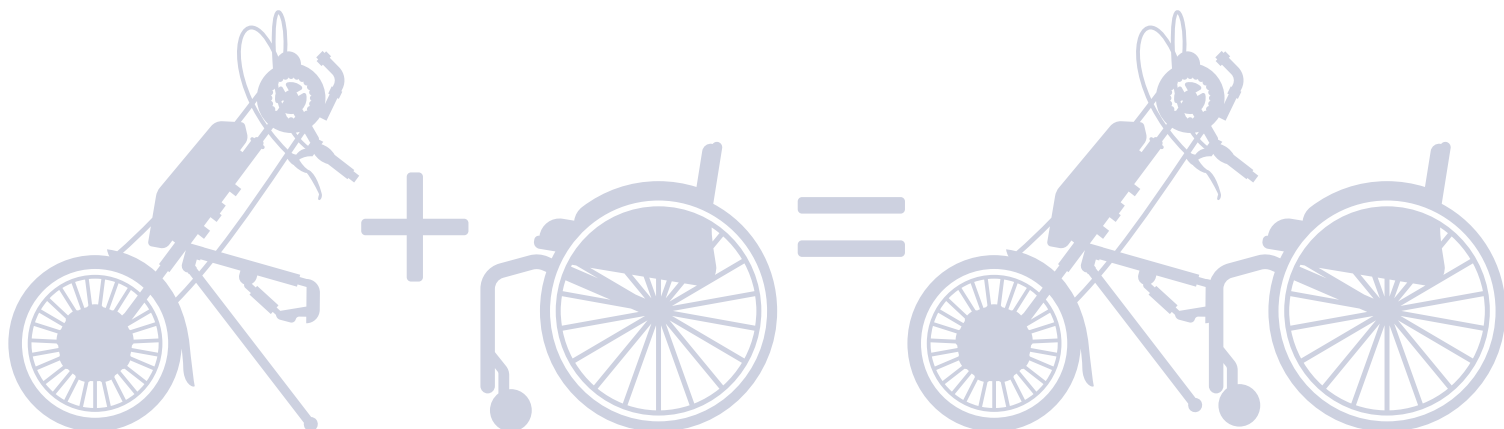

Operating guide: GX display: GX-Display

This operating guide provides you with an overview of the most important features and functions of the GX display. For detailed information and instructions, please refer to the manual supplied with your adaptation device.

Switching on/off

Switch on the key switch and the battery. Press the „“ button, which is located on the underside of your display, for approx. 2 seconds.


Changing the display mode of the display

To switch between the views, quickly press the „“ button located on the underside of your display.

Information and settings for the trip

Level 1 - 5: The power assist device can be operated in 5 different levels. These differ in terms of maximum speed. In level 1, the power assist device moves at the slowest speed. In level 5, it travels at maximum speed. Acceleration is not possible at level 0.

Trip: Press the „“ button on the top of your display to change the information displayed, such as „Trip“ for driving.

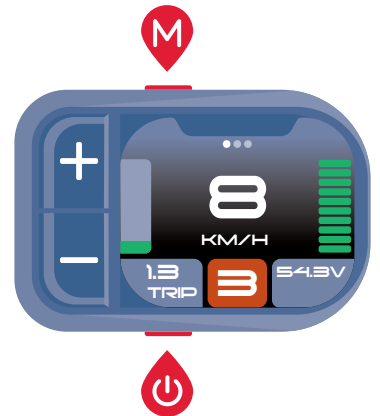

Starting off on inclines

1. Hold the brake without brake cut-off switch (a brake with brake cut-off switch deactivates the motor as long as it is actuated). In most equipment, this is the left brake lever. However, this varies de-

pending on the type of equipment and individual adaptations.

2. Accelerate with the throttle until the power assist device wants to move for-

ward

3. Release the brake slowly until you are moving forwards. Accelerate faster if you are rolling backwards..

Walk mode

Use case

Walk mode is useful if you are accompanying a pedestrian.

It ensures that your power assist device accelerates to a speed of 3 km/h and maintains this speed as long as you keep the corresponding button pressed.

Switching on

Press the „“ button located on the front of the display. Hold the button down for as long as you wish to use the walk mode.

Switching off

Walk mode switches itself off as soon as you release the button.

