

PAWS Horizontale Stützfüße

Montageanleitung



Artikelnummer:

EBL01CD (16" PAWS)

EBL01EF (20" PAWS)



Montageanleitung



1. Suchen Sie die Befestigungslöcher in der Gabel



2. Setzen Sie die Stützfußhalterung zwischen Bremszug und Gabel ein.



3. Befestigen Sie den Stützfuß mit zwei der mitgelieferten Schrauben an der Vordergabel



4. Mit einem 5-mm-Inbusschlüssel festziehen.



5. Klappen Sie den Stützfuß herunter. Das Rad sollte ganz bis zum Boden reichen. Auf dem Bild oben können Sie sehen, dass das Stützrad einige Zentimeter bis zum Boden reicht.



6. Lösen Sie die Schraube am Stützfuß mit einem 5-mm-Inbusschlüssel und ziehen Sie den Fuß nach unten, bis das Stützrad fest auf dem Untergrund steht. Ziehen Sie die Schraube wieder fest.



7. In der obigen Abbildung ist zu sehen, dass das Stützbein um etwa einen Zentimeter verlängert wurde, damit das Stützrad den Boden berühren kann.



8. Sobald der neue Stützfuß eingestellt ist, muss der alte Stützfuß auf derselben Seite entfernt werden. Lösen Sie die beiden Schrauben, mit denen er befestigt ist, mit einem 5 mm Inbusschlüssel.




9. Hier wurde der alte Stützfuß entfernt und der neue Fuß hat die Aufgabe übernommen.



10. Auf der anderen Seite müssen Sie das Motorkabel verschieben, um die Schraubenlöcher für den neuen Stützfuß freizulegen. Verwenden Sie einen 3-mm-Inbusschlüssel und einen 8-mm-Schraubenschlüssel, um die beiden Schrauben für das Kabel zu lösen.



11. Schieben Sie das Kabel nach oben und installieren Sie es in den oberen Löchern.

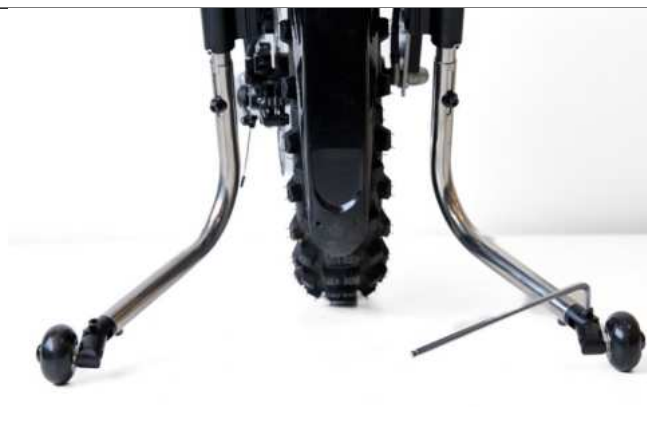

12. Wenn beide Stützbeine montiert sind, lösen wir mit einem 5-mm-Inbusschlüssel die Schrauben, die den Winkel der Stützräder einstellen. Stellen Sie sie so ein, dass sie parallel zur Fahrtrichtung stehen (parallel zum Antriebsrad) und arretieren Sie sie.