

Kompatibilitäts Guide

Empulse R20



Stand: 07/2024

Hersteller / Model	Docking	Hersteller / Model	Docking
Sunrise Medical		Pyro Start, Pyro Start Plus	B
Breezy UniX ²	B	BX 11	B
Breezy PariX ²	B	Meyra	
Breezy BasiX ²	B	Service 3.600	B
Breezy RubiX ²	B	Budget	B
Breezy RubiX ² Comfort	B	Avanti	B
Breezy HeliX ²	B	Avanti Pro	B
Breezy HeliX ² Comfort	B	S3 Swing	B
Breezy RelaX ²	B	Eurochair family	B
Breezy Cirrus G5	B	Smart F & S	B
Breezy Cirrus G5 Base	B	Invacare*	B
Breezy Ibis	C	Rea Clematis	B
Breezy Emineo	B	Rea Azalea Family	B
Breezy Exigo 10 / 20 / 30	B	Action 1 / 2 / 3 / 4 / 5	B
Sopur Easy Life	A/B	Action XT	B
Sopur Easy Life i	A/B	Rea Focus	B
Sopur Easy Life Eco	A/B	XLT	B
Sopur Easy Life T	A/B	Drive	
Sopur Easy Life R	A/B	Litec / Litec 2G / Litec 2G Plus	B
Sopur Easy Life RT	A/B	Fretec	B
Sopur Easy Easy 200	A/B	Ecotec / Ecotec 2G	B
Sopur Easy 300	A/B	Rotec / Rotec XL	B
Sopur Neon ² SA	B	Vassilli	
Zippie Youngster 3	B	VARIO Plus	B
Sopur Easy 160i	B	Dietz	
Sopur QS5 X	B	AS 01**	B
Bischoff & Bischoff		Caneo Serie (inkl. XL)	B
S-Eco 300, S-Eco 300 XL	B	Tomtar, BasiK, BasiK+	B
S-Eco 2	B	Serena II**	B
Pyro Light Optima, Pyro Light Optima XL	B		
Pyro Light, Pyro Light XL	B		

Bitte beachten Sie: Die obige Liste ist ein Hinweis auf Rollstuhlmodelle, an denen der R20 montiert werden kann. Baujahr, Rahmenform, Rücken Zubehör, Verbindungsstangen zwischen Seitenrahmen und Rahmenzubehör sind jedoch von Einfluss. Deshalb ist es wichtig, dass Sie es testen um 100% sicher zu sein! Bei Zweifeln wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Kombinationsübersicht zeigt nur Rollstühle mit einer unterschriebenen Kombinationsvereinbarung. Informationen zum Andocken finden Sie auf der nächsten Seite.

* Nur mit Trommelbremse ** Benötigen spezielles Kit für Rohrdurchmesser < 30 mm *** Für die Montage der Bedieneinheit werden evtl. längere Schiebegriffe benötigt

Hersteller / Model	Docking	Hersteller / Model	Docking
Pro Active***		Vermeiren*****	
Traveler (Classicline, 4all Ergo, 4you Ergo)	B	D100, D100 (30°)	B
Buddy (Classicline, 4all)	B	D200, D200 (30°)	B
Speedy (A1, A2, F4, 4all, 4you, 4all Ergo, 4teen)	B	V200D	B
Berollka****		V300D, V300D (30°), V300DL	B
F1 (Rohrdurchmesser 30 mm)	B	V500 (30°)	B
B2 (Rohrdurchmesser 30 mm)	B	Eclips+, Eclips+ (30°)	B
RACER (Rohrdurchmesser 30 mm)	B	Eclips X4, Eclips X4 (30°)	B
TRAXX / TRAXX TT (Rohrdurchmesser 23 mm)	B	Bobby	B
TOURER / CRUISER (Rohrdurchmesser 25 mm)	B	Inovys II, Inovys II-E	B
SLADE SLT / AR	B	ALU REHAB	
SPRINT SLT / AR	B	Netti 4u, CE, CE Plus, CED, Base	B
LUKE AR / SLT	B	Netti III, Netti III HD, Netti XHD	B
BASIC	B	Netti Dynamic System (SB 350 - 600 mm)	B
FINESS	B	Netti S (SB 350, 400 mm)	B
Filou	B	Netti Dynamic S (SB 350, 400 mm)	B
Junior 2 SLT / AR	B	ETAC	
Findus	B	Cross 5, Cross 5 XL, Cross 5 Active, Cross 6	B
Little AR / SLT	B	M 100	B
REHATEC		Crissy	B
Galileo (Größe 1, 2, 3, 4, 5)	B	Prio, Prio 3D	B
Sunny (Größe 2)	B	HOGGI*****	
Mika (Größe 1)	B	SHERPA	A
SORG		SWINGBO VTi, SWINGBO VTi XL	A
Vector	B	SWINGBO 2, SWINGBO 2 XL	B
Vector BSA	B	BINGO Evolution	B
Jump alpha	B	DURO, DURO Cross	B
Jump beta Sport	B		
Jump beta BSA	B		
Tilty Vario	B		

Bitte beachten Sie: Die obige Liste ist ein Hinweis auf Rollstuhlmodelle, an denen der R20 montiert werden kann. Baujahr, Rahmenform, Rückenzubehör, Verbindungsstangen zwischen Seitenrahmen und Rahmenezubehör sind jedoch von Einfluss. Deshalb ist es wichtig, dass Sie es testen um 100% sicher zu sein! Bei zweifeln wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Kombinationsübersicht zeigt nur Rollstühle mit einer unterschriebenen Kombinationsvereinbarung. Informationen zum Andocken finden Sie auf der nächsten Seite.

* Nur mit Trommelbremse, ** Benötigen spezielles Kit für Rohrdurchmesser < 30 mm, *** Für die Montage der Bedieneinheit werden evtl. längere Schiebegriffe benötigt, **** Nur mit Sicherheitsrad, ohne Blenden und Zubehörbox, ***** Nur mit Sicherheitsrad, ***** Bitte kontaktieren Sie immer HOGGI für weitere Informationen

Empulse R20

Docking Information

Die faltbare Schiebevorrichtung R20 passt mühelos auf nahezu alle gängigen manuellen Rollstühle mit folgenden Abmessungen:

Box Rahmen oder ähnlicher Rahmentyp mit einem Rohrdurchmesser von 22 - 28 mm. Für Rahmenrohrdurchmesser 30 mm kann ein spezielles Kit (Artikelnummer 07501106) bestellt werden.

Sitzbreite 320 - 600 mm

Hintere Sitzhöhe > 380 mm

Lange oder höhenverstellbare Schiebegriffe um die Bedieneinheit zu befestigen – Freiraum von minimum 10 mm benötigt.




Version A mit Schrauben:
 Benötigt ein vorhandenes horizontales Loch im Rahmenrohr. Wird im Allgemeinen mit Sunrise Medical Aktivrollstühlen aus Malsch (Easy 200/300 / Easy Life / Easy Life i / Easy Life Eco) verwendet.

Auch für X-Family²-Rollstühle wie PariX², BasiX², RubiX², HeliX² und HeliX² Komfort. Ersetzen Sie einfach den Kreuzstrebenclip.




Version B zum Klemmen:
 Wird am unteren Rahmenrohr festgeklemmt. Im Allgemeinen für alle Rollstühle außer Breezy Ibis und Aktivrollstühle. (Standard, z. B. für X-Family² Rollstühle).

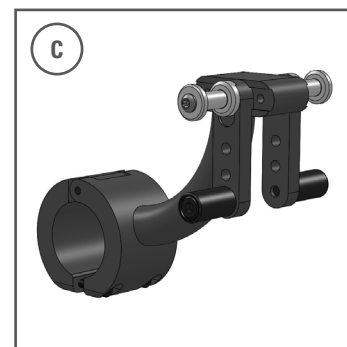

Version C zum Klemmen nur für Breezy Ibis:
 Wird in der Mitte des unteren Rahmenrohrs festgeklemmt.

Anbau Empulse R20 an Breezy X-Family Rollstühle

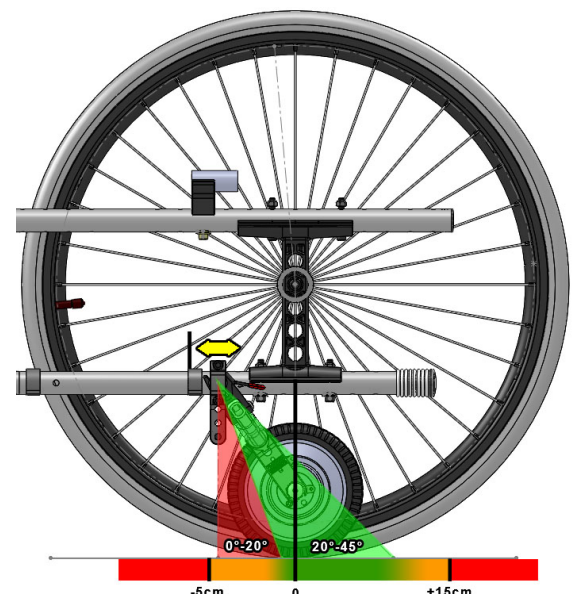

NoGo Matrix Empulse R20

[illegible]