
Alber GmbH
Vor dem Weißen Stein 14
D - 72461 Albstadt
Telefon +49 7432 2006-0
Internet www.alber.de

[Montagevariante 1]
[mounting variant 1]

52

Anbauvorschlag; die Lieferung enthält eventuell Material für verschiedene Anbauvarianten.
Die Halterung kann geringfügig von der Abbildung abweichen.
[Mounting suggestion; consignment may contain material for different mounting variants.]
[Please note that the bracket may slightly differ from the drawing.]

Halterung V24 / Gr.S 1595237 / Gr.M 1595236 / Gr.L 1595235

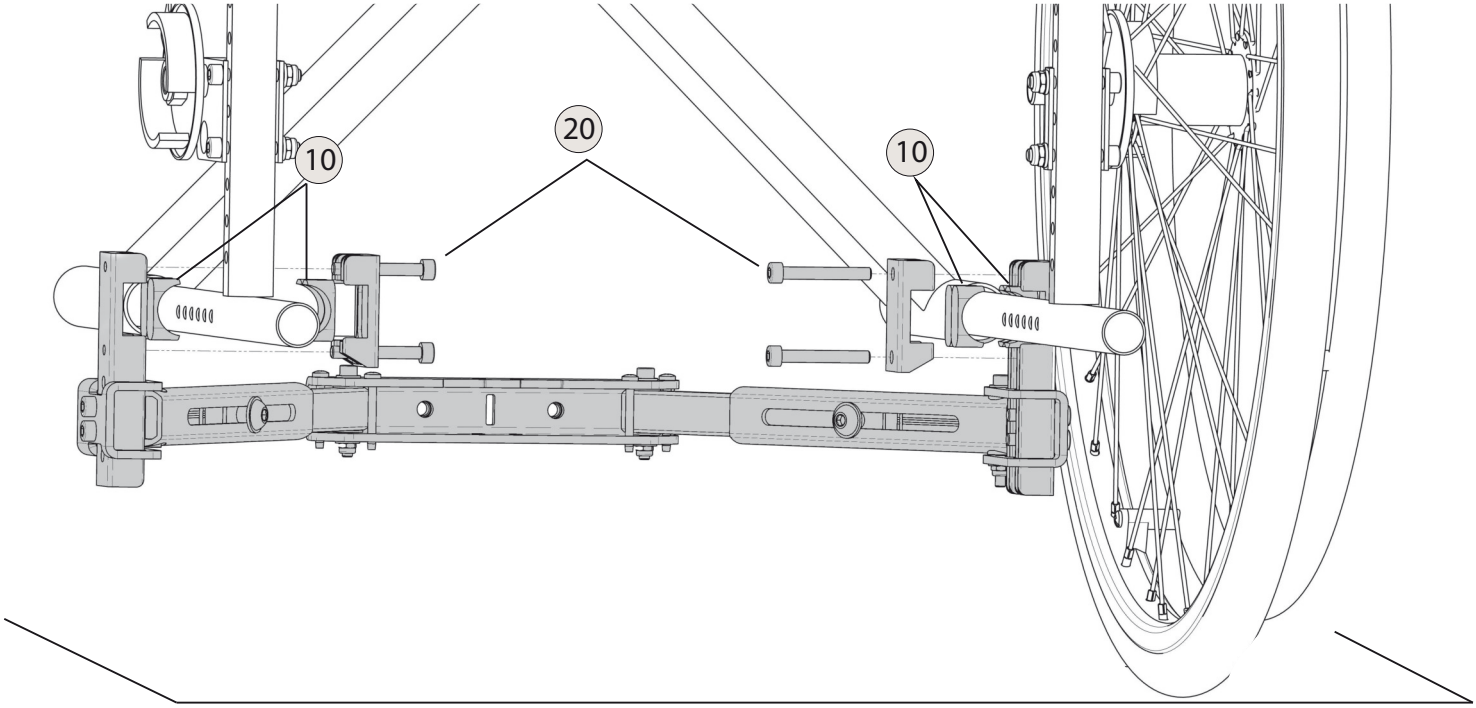

10 20

[Artikel aus Einlege-Profil-set]
[item from insert-profile-set]

[Anzugsmoment 8 Nm für alle Schrauben]
[torque 8 Nm for all screws]

!

[Da das via GO keine Bremsfunktion zur Verfügung stellt, muss der Rollstuhl für Begleitpersonen, die körperlich nicht in der Lage sind ihn in allen Fahrsituationen zum stehen zu bringen mit Bremsen bzw. Trommelbremsen, ausgestattet sein]
[As the via GO does not provide a braking function, the wheelchair must be equipped with brakes for operating persons who are physically unable to bring it to a halt in all driving situations, ideally two drum brakes]

Achtung, der Anbau darf nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte erfolgen !
[**Caution**, any mounting must be done by personnel authorized by the manufacturer !]

Alber GmbH
Vor dem Weißen Stein 14
D - 72461 Albstadt
Telefon +49 7432 2006-0
Internet www.alber.de


[Montagevariante 2]
[mounting variant 2]

52

Anbauvorschlag; die Lieferung enthält eventuell Material für verschiedene Anbauvarianten.
Die Halterung kann geringfügig von der Abbildung abweichen.
[Mounting suggestion; consignment may contain material for different mounting variants.]
[Please note that the bracket may slightly differ from the drawing.]

Halterung V24 / Gr.S 1595237 / Gr.M 1595236 / Gr.L 1595235

[Anbau-Position beachten]
[]note attachment position

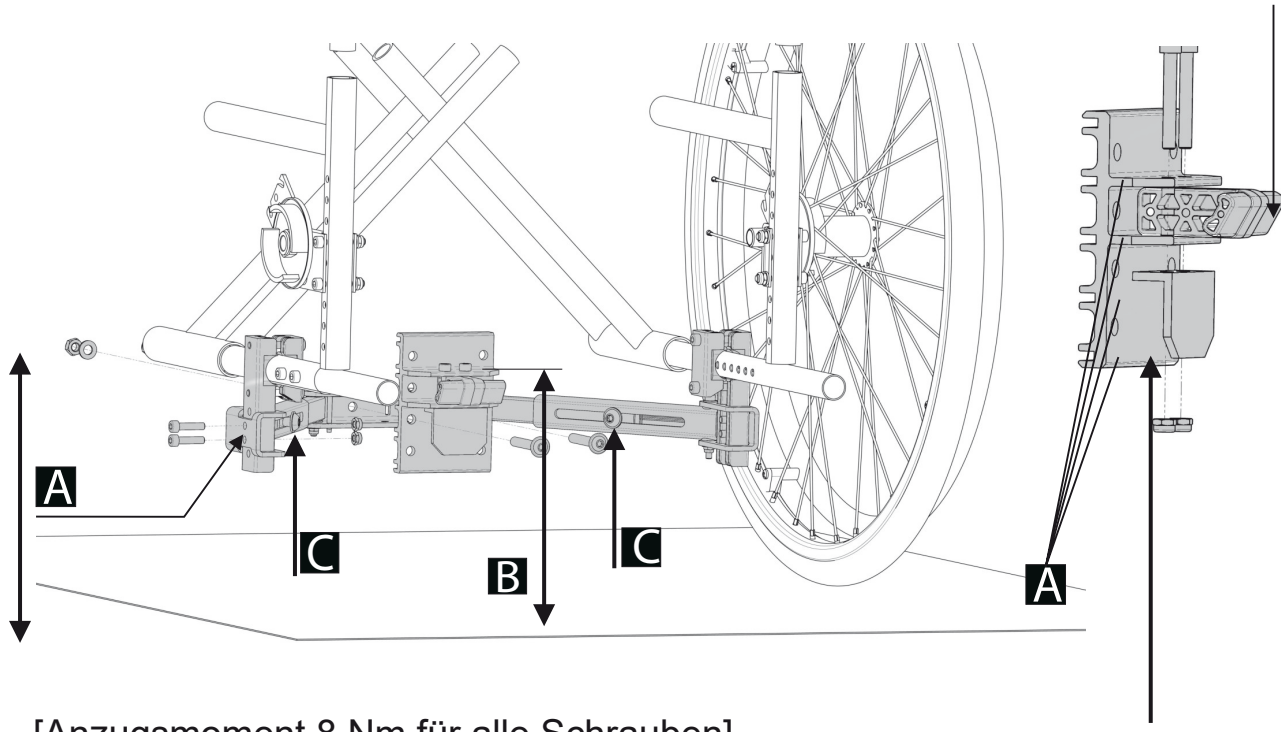

[Anzugsmoment 8 Nm für alle Schrauben]
[torque 8 Nm for all screws]

[Platte kann um 180° gedreht werden]
[plate can be rotated 180 °]

A [Anbauhöhe anpassen]
[adjust mounting height]

B [Anbauhöhe Halterung - Oberkante 175+/-15mm]
[mounting height at the top edge 175+/-15mm]

C [Verstellschraube]
[adjusting screw]

!

[Da das via GO keine Bremsfunktion zur Verfügung stellt, muss der Rollstuhl für Begleitpersonen, die körperlich nicht in der Lage sind ihn in allen Fahrsituationen zum stehen zu bringen mit Bremsen bzw. Trommelbremsen, ausgestattet sein]
[As the via GO does not provide a braking function, the wheelchair must be equipped with brakes for operating persons who are physically unable to bring it to a halt in all driving situations, ideally two drum brakes]


Achtung, der Anbau darf nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte erfolgen !
[**Caution**, any mounting must be done by personnel authorized by the manufacturer !]

Alber GmbH
Vor dem Weißen Stein 14
D - 72461 Albstadt
Telefon +49 7432 2006-0
Internet www.alber.de

52

Sicherung der Schrauben und Muttern
Sofern in der Montageanweisung nicht anders angegeben, sind alle Schraubverbindungen ohne Sicherungsscheibe mit Schraubensicherungen zu versehen (siehe Bilder). Verwenden Sie hierzu WEICON AN 302-43 (blau) / LOCTITE 243 für das Sichern der Adapterhülsen und Schraubverbindungen, sowie WEICON AN 306-01 (grün) / LOCTITE 601 für das Sichern der Verbindungselemente am e-fix Bediengerät.

Locking of screws and screw nuts
If there is no other specification in our mounting instruction: Secure all screw fittings which have no locking washer with screw locking adhesive (see pictures below). Use WEICON adhesive AN 302-43 (blue) / LOCTITE 243 adhesive to glue adapter sockets and screws. Use WEICON adhesive AN 306-01 (green) / LOCTITE 601 adhesive to glue the mechanical fasteners of the e-fix control-unit.

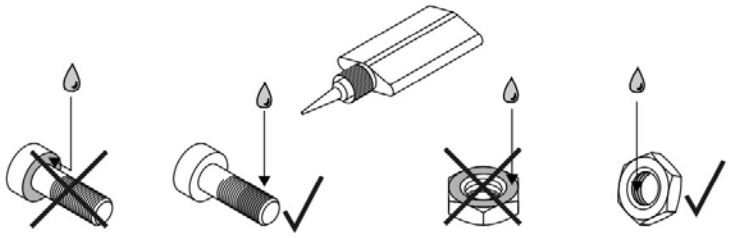

Erlaubter Radsturz des e-fix und e-motion
Wird die Halterung an einen Rollstuhl angebaut, der eine Einstellung des Radsturzes ermöglicht, dürfen folgende Maximalwerte nicht überschritten werden.

Allowed wheel camber of the e-fix and e-motion
Do not exceed the following maximum values, if you mount the bracket at a wheelchair which offers the

Radsturz / *wheel camber incline* e-motion M25

Radgröße M25 *Wheel size M25*	max. Personengewicht bis / *maximum person weight up to* 1° Sturz/*camber*	3° Sturz/*camber*	6° Sturz/camber	9° Sturz/*camber*
22″	100 kg	80 kg	60 kg	40 kg
24″ / 26″	150 kg	100 kg	60 kg	40 kg

Radsturz / *wheel camber incline* e-motion M15, twion T24

Gewicht des Rollstuhlfahrers *Weight of the wheelchair driver*	max. Radsturz *max. wheel camber*
< 40 kg	9°
40 - 60 kg	6°
61 - 100 kg	3°
> 100 kg	1°

Radsturz / *wheel camber* e-fix e-fix E35/E36, E25/E26

Gewicht des Rollstuhlfahrers *Weight of the wheelchair driver*	max. Radsturz *max. wheel camber*
< 60 kg	3°
> 60 kg	1°

Die Werte in obigen Tabellen ersetzen die Angaben auf den vorangegangenen Seiten!
The numerical datas in the charts above replace the specifications of the previous pages.

Anzugsmomente für Schraubverbindungen
Sofern nicht anders angegeben sind Schraubverbindungen wie folgt anzuziehen:

Fastening torques for screw fittings
Unless otherwise noted, tighten the screw fittings as shown in the following table:

Schraubverbindungen / *Screw fitting*

Gewinde/*Thread*	Anzugsmoment/*Fastening torque*
M3	1,1 Nm
M4	3 Nm
M5	5 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	85 Nm

Adapterhülsen / *Adapter sockets*

Gewinde/*Thread*	Anzugsmoment/*Fastening torque*
M16x1	30 Nm

Achtung, der Anbau darf nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte erfolgen !
[**Caution**, any mounting must be done by personnel authorized by the manufacturer !]