




scalamobil®



Gemeinsam Hürden meistern: na sicher!

scalamobil – die mobile Hilfe für einfaches und
sicheres Treppensteigen.

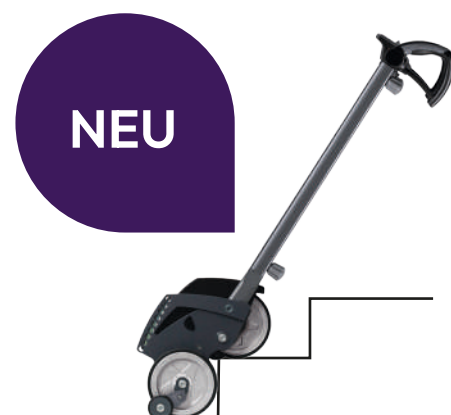

www.alber.de



scala, übernehmen Sie.

Wenn durch Krankheiten oder Unfälle die Mobilität im Alltag zu einem Problem wird, sind Treppen oft ein unüberwindbares Hindernis. Ganze Stockwerke von Häusern können dann nicht mehr bewohnt werden oder es steht sogar der Verbleib im eigenen Heim auf dem Spiel. Auch Partner:innen oder Familienangehörige sind dieser Situation dann nicht mehr gewachsen. Fest installierte Mobilitätslösungen erfordern aufwendige sowie kostspielige Umbaumaßnahmen und eignen sich nicht für

alle Treppenarten. Mit scalamobil gehören durch Treppen verursachte Einschränkungen der Vergangenheit an. Zur Nutzung dieser variabel auf allen Treppenarten einsetzbaren Steighilfen sind keinerlei bauliche Maßnahmen nötig.

Betroffene und deren Angehörige profitieren gleichermaßen von der neu gewonnenen Freiheit und können so ihr Leben und ihren Alltag wieder unabhängig und flexibel gestalten.

scalamobil passt zu dir, wenn:

- ✓ du im eigenen Heim Treppen überwinden musst.
- ✓ du dir Sicherheit für Bedienperson und Rollstuhlfahrer:in wünschst.
- ✓ du eine Mobilitätslösung suchst, die keine baulichen Maßnahmen erfordert.
- ✓ du eine Steighilfe suchst, die du ohne Umsetzen im eigenen Rollstuhl nutzen kannst.
- ✓ du eine Steighilfe suchst, aber im Alltag keinen Rollstuhl verwendest.
- ✓ du großen Wert auf leichte Bedienbarkeit legst.
- ✓ du dir Entlastung für deinen Partner, deine Partnerin oder Angehörige wünschst.





Zu Hause:

SICHERHEIT

zuverlässig & smart

Die scala-Modelle stehen für leichte Bedienbarkeit und sichere Handhabung. Die erprobte und dennoch simple Technik macht die Nutzung besonders einfach und schafft Vertrauen. Schnell werden die Mobilitätshilfen routiniert und selbstbewusst genutzt – und so zu einer sofortigen Erleichterung im Alltag.

Durch die automatische Haltewinkelüberwachung und viele weitere durchdachte Funktionen ist das gute Gefühl von Sicherheit auf jeder Treppe dabei.

- ✓ **Stabilität:** Sehr belastbare Fußstützen und Armlehnen
- ✓ **Steuerung:** Intuitiv nutzbare Bedieneinheit
- ✓ **Funktionsvielfalt:** Verschiedene smarte Fahrmodi, Wegfahrsperrung und Notausschalter

scalamobil & scalacombi auf Rezept.


Als anerkannte Hilfsmittel können die mobilen Treppensteiger von deiner Krankenkasse bezuschusst werden – oft werden die Gesamtkosten oder ein großer Teil davon übernommen. Das Alber-Team informiert gerne über die Abläufe und unterstützt dich bei den Anträgen.

Hilfsmittelnummer scalamobil S45

ist beantragt

Hilfsmittelnummer scalacombi S46

ist beantragt

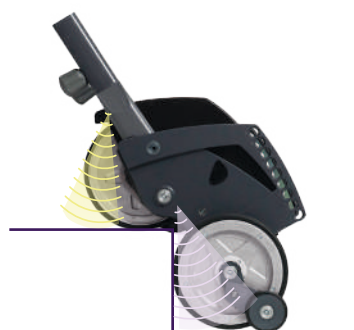

e: voll im Leben.

MOBILITÄT

vielseitig & flexibel

Die mobilen Treppensteiger eignen sich für alle Treppentypen und passen sich an die individuellen Bedürfnisse von Patient:innen und Bedienpersonen an. So werden sie zu einer echten Bereicherung im täglichen Leben. scalacombi lässt sich mit einem Handgriff in zwei Teile zerlegen und kann ganz einfach an beinahe allen Rollstuhltypen angebracht werden. Durch einen Hindernismodus oder die klappbaren Armlehnen und Fußstützen beim scalamobil ist man auf alle Herausforderungen im häuslichen Umfeld bestens vorbereitet.

- ✓ **Montage:** Ohne Umbau und auf vielen Treppenarten sofort einsetzbar
- ✓ **Flexibilität:** scalacombi überzeugt durch seine Faltbarkeit, scalamobil ist ganz leicht zerlegbar

KOMFORT

bequem & schick

Bei der Entwicklung der neuen scala-Modelle wurde vor allem eines berücksichtigt: der Komfort bei der Nutzung für die Insassen. Der breite und stabile Sitz ist weich gepolstert und bietet zugleich besten Halt.

Der dynamische Softstep ermöglicht ein ruhiges Treppensteigen mit gleichmäßiger Bewegung. Auch optisch fügen sich scalamobil oder scalacombi nahtlos in das Zuhause ein. Ihr reduziertes und klares Design sorgt für eine hochwertige Gesamterscheinung.

- ✓ **Komfortabel:** Sanft über Treppen dank Softstep-Elektronik
- ✓ **Wertigkeit:** Hochwertige Verarbeitung – Made in Germany
- ✓ **Optik:** Ansprechendes Design

Gut verstaubar –
für den Transport
einfach zerlegen.






TREPPEN

Nimmt jede Stufe ernst. Und mit Leichtigkeit.


Im Gegensatz zu Treppenliften sind für die mobilen Treppensteighilfen von Alber keinerlei bauliche Veränderungen am Zuhause notwendig. Das spart Zeit, schont die Nerven und bietet eine schnelle und flexible Lösung. Sie sind unabhängig von der Bauart des Treppenhauses einsetzbar und funktionieren auf nahezu allen Arten von Treppen, sogar auf

besonders engen, steilen oder gewendelten. Durch ihre kompakte Form sowie die falt- oder zerlegbarkeit eignen sich die Treppensteighilfen bestens zur Mitnahme.


So helfen sie auch außerhalb der eigenen vier Wände beim bequemen Treppensteigen.

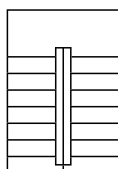


Treppenstufenhöhe bis zu 20 cm

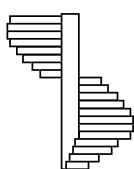

Wendeltreppen

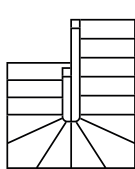

Enge, geschwungene Treppen

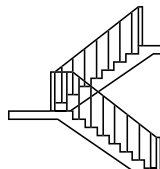

Außentreppen mit Geländer


Egal welcher Treppentyp - es ist kein Umbau nötig.

Viele Ziele, viele Unter- gründe.


Nicht nur in ihrem Aufbau unterscheiden sich Treppen – je nach Zweck und Ort gibt es sie in den verschiedensten Materialien und Ausführungen.

Dabei spielt es für scalamobil keine Rolle, ob Stufen und Absätze aus Holz, Stein oder Metall sind oder ob Teppich auf ihnen verlegt ist. Die Reifen aus abriebfestem Material bieten ausreichend Halt auf allen gängigen Oberflächen und sorgen so für ein gutes und sicheres Gefühl bei den Bedienpersonen. Die scala-Modelle schonen auch bei intensiver Nutzung Treppenbeläge dauerhaft und zuverlässig.


Stein &
Fliesen

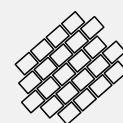


Teppich &
Teppichböden

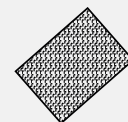

Holz &
Laminat

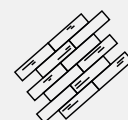

Gitter- &
Metalloberflächen

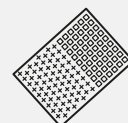

Glas &
Kunststoffe



i Alle trockenen Oberflächen lassen sich im manuellen Modus problemlos befahren



”

Das scalamobil ist einfach fantastisch! Meine Frau und ich können nun problemlos die Treppen überwinden und sind nicht mehr auf fremde Hilfe angewiesen. Danke für diese innovative Lösung, die unser Leben erleichtert!

Max M. aus München

Das scalamobil hat unser Leben positiv verändert. Mein Mann, der aufgrund seiner Rückenprobleme kaum Treppen steigen konnte, kann nun mühelos die Stufen bewältigen. Wir sind dankbar für diese großartige Technik, die ihm wieder Mobilität und Unabhängigkeit schenkt!

Hanna K. aus Stuttgart

“





Gut, besser, am Testen.

Jetzt kostenlos und unverbindlich testen.
Per QR-Code geht's direkt zur Probefahrt.
scalamobil.alber.de/probefahrt



Funktioniert: na sicher.

scalamobil eignet sich ideal, wenn Treppen im eigenen Rollstuhl überwunden werden müssen. scalamobi ist die perfekte Lösung für alle, die nur beim Treppensteigen eine Mobilitätshilfe benötigen und für die Nutzung in engen Treppenhäusern. Die Steigtechnik ist bei beiden Modellen identisch: Zwei elektrisch angetriebene Radpaare übersteigen kontinuierlich eine Treppenstufe nach der anderen. Die Sicherheit von Nutzer:innen und Bedienpersonen stand bereits 1986 bei der ersten Patentanmeldung im Fokus.

MODELLVARIANTEN

scalamobil®**Andocken an den Rollstuhl**

scalamobil kann mit beinahe allen Rollstühlen verbunden werden und ist schnell und ohne Werkzeug montierbar. So können Rollstuhlfahrer:innen einfach in ihrem Rollstuhl sitzen bleiben und dennoch mit Leichtigkeit die Barrieren im eigenen Zuhause oder unterwegs überwinden.

- i** **scalamobil ist auch mit Pflegerollstühlen oder besonders schmalen Rollstühlen kombinierbar.**

**scalacombi®****Mit integriertem Sitz**

scalacombi ist die perfekte Mobilitätslösung für Personen, die beim Treppensteigen Unterstützung brauchen, aber im Alltag nicht auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Der Treppensteiger verfügt über einen komfortablen integrierten Sitz und kann zusammengeklappt platzsparend abgestellt werden.

**Im Lieferumfang enthalten:****Akkupack**

Der kräftige Akku schafft bis zu 300 Stufen

**Automatik-Ladegerät**

Smarte Lade- und Abschalt-automatik

**Griffeinheit mit Display**

Flexibel anpassbare Griffeinheit und ergonomische Bedienung

DISPLAY

Alles im Griff.

Smartes Bedienkonzept für Sicherheit und Komfort.



Der Haltewinkel-assistent zeigt an, ob scalamobil in der richtigen Position ist.



Schwelle:
Mit der Hindernisüberwindung werden auch Barrieren auf dem Weg zur Treppe leicht bewältigt.



Sperren:
Die Wegfahrsperrung sichert die Treppensteighilfe gegen unbefugte Nutzung.



An / Aus:
Hauptschalter zum Ein- und Ausschalten.



Im Automatik-Modus wird die Steigrichtung durch Sensoren erkannt und automatisch eingeleitet.



Unterstütztes Steigen, wenn das Gerät richtig positioniert ist und der Fahrhalter die Sensorsignale bestätigt.




Im manuellen Modus ist das Steigen in jeder Situation möglich, da Sensorfunktionen deaktiviert sind.



Übersichtliches
Display mit Akku-
und Steigrich-
tung-
Anzeige

BREITE & HÖHE

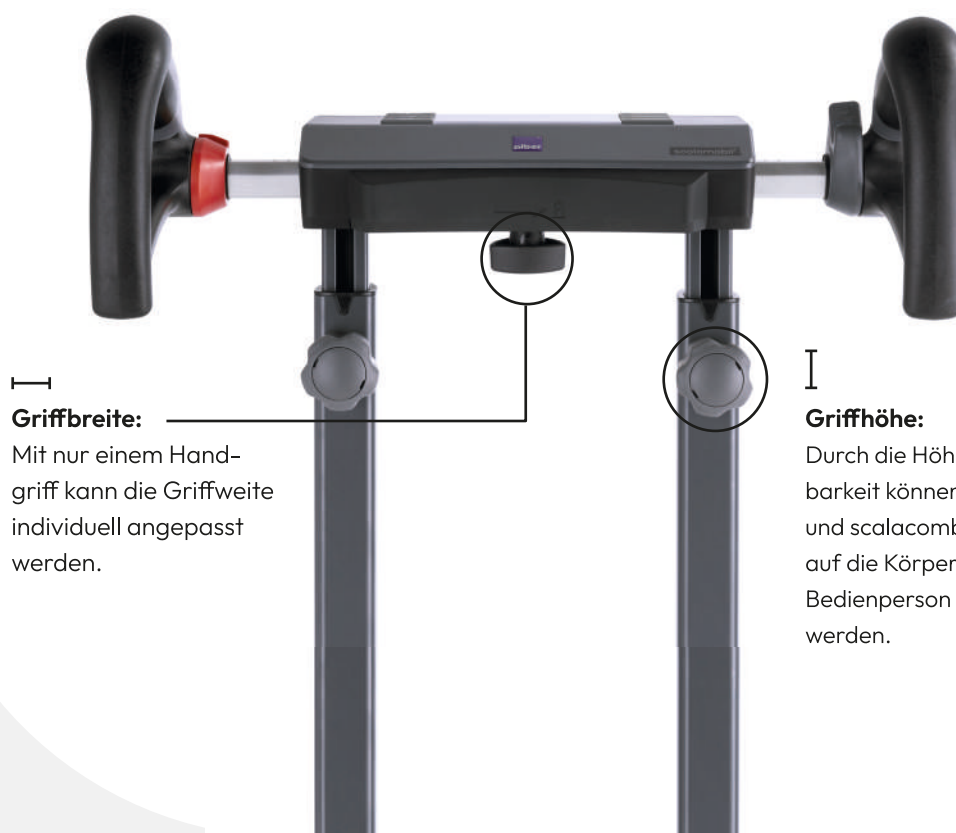

Griffbreite:

Mit nur einem Handgriff kann die Griffweite individuell angepasst werden.

Griffhöhe:

Durch die Höhenverstellbarkeit können scalamobil und scalacombi optimal auf die Körpergröße der Bedienperson angepasst werden.

SENSORIK

Na sicher ist's sicher.


Die Sicherheit steht bei der Nutzung und Bedienung der scala-Geräte an erster Stelle. Eine ganze Reihe ausgeklügelter Funktionen sorgt für zuverlässiges Auf- und Absteigen. Mit den eingebauten Sensoren werden alle benötigten Informationen in Echtzeit erfasst und verarbeitet.

Andocken:

Beim scalamobil müssen die Räder des Rollstuhls für den Steigvorgang abgenommen werden.

Sensoren beim Steigvorgang:

Der dynamische Softstep ist eine der wichtigsten Funktionen der neuen scala-Generation, wenn es um die Bequemlichkeit bei der Nutzung geht. Dabei wird die Geschwindigkeit vor dem Aufsetzen individuell und automatisch reduziert. Im Treppensteiger eingebaute Sensoren messen hierfür die Stufenhöhe und ermöglichen so einen bestens angepassten und sanften Steigvorgang.

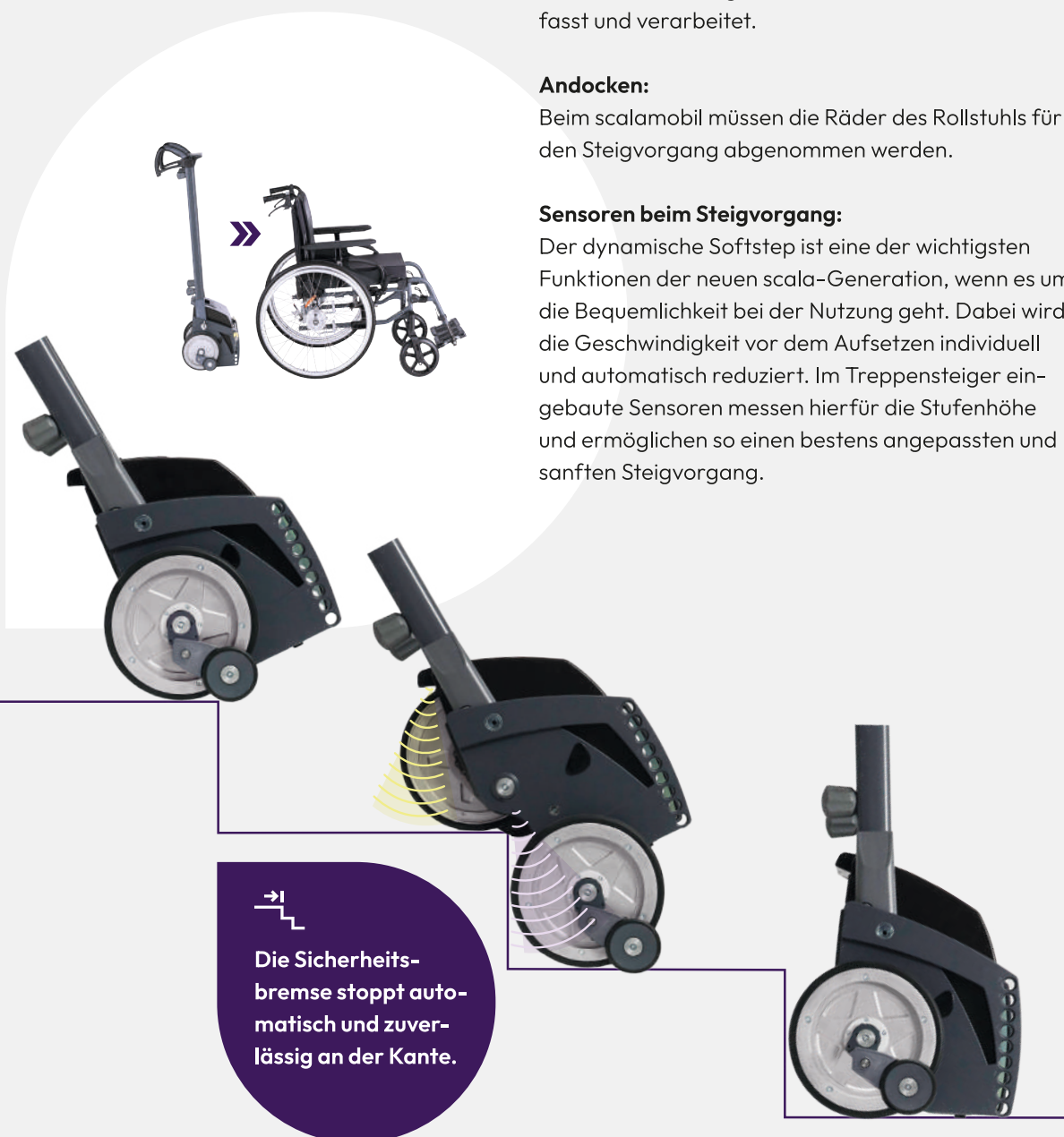

Die Sicherheitsbremse stoppt automatisch und zuverlässig an der Kante.



scalamobil & scalacombi sind erstattungsfähige Hilfsmittel. Oft werden die Gesamtkosten oder ein großer Teil von deiner Krankenkasse übernommen.

Technische Daten

	scalamobil S45	scalacombi S46
Hilfsmittelnnummer	ist beantragt	ist beantragt
Gewicht gesamt	26 kg	38 kg
max. Personengewicht	140 kg	140 kg
max. zulässiges Gesamtgewicht	180 kg (scalamobil, Rollstuhl und Rollstuhlfahrer:in)	
Reichweite	Bis zu 300 Stufen (ca. 20 Stockwerke)*	
Geschwindigkeit	ca. 12 Stufen/Minute inkl. Softstep*	
Akku	2x12 V; 3,4 Ah Blei-Gel, auslaufsicher und wartungsfrei	

* in Abhängigkeit vom Gewicht der Rollstuhlfahrerin oder des Rollstuhlfahrers und des Rollstuhls sowie der Stufengeometrie



Zubehör

01. Halterung

Halterung zur Befestigung des scalamobil am Rollstuhl. Bei der Bestellung müssen Rollstuhltyp und Sitzbreite angegeben werden.

02. Kopfstütze

Die weich gepolsterte Kopfstütze ist in Höhe, Tiefe und Neigung einstellbar und bietet Halt und Stabilität für die Nacken- und Kopfparte.

03. Radtransporthalterung

Die Halterung ermöglicht den Transport der Rollstuhlräder zusammen mit dem scalamobil, um unnötige Wege zu vermeiden. Passt an alle gängigen Rollstuhlmodelle.

04. Kippstützen

Die Kippstützen sind per Schnellverschluss abnehmbar und in Höhe und Länge verstellbar. Die automatische Wegschwankfunktion ermöglicht das Überqueren von Bordsteinen und Absätzen.

05. Automatische Verriegelung

Einfaches Verriegeln des Rollstuhls am scalamobil (keine Quickpins und kein Bücken mehr notwendig).

06. Steckachse

Um mit dem scalamobil Treppen zu steigen, müssen die Rollstuhlräder abgenommen werden. Ein Steckachsensystem ist erforderlich, das als Umrüst-Set erhältlich ist und alle benötigten Bauteile inklusive Montage für Standardnaben und Trommelbremsen enthält.


07. Isofix Anbindung (nur scalacombi S46)

Ermöglicht das einfache Anbringen von Kindersitzen.

Eine Übersicht über das komplette Zubehörprogramm wie z.B. auch Sicherheitsgurte findest du auf:

www.alber.de/scalamobil/zubehoer

www.alber.de/scalacombi/zubehoer

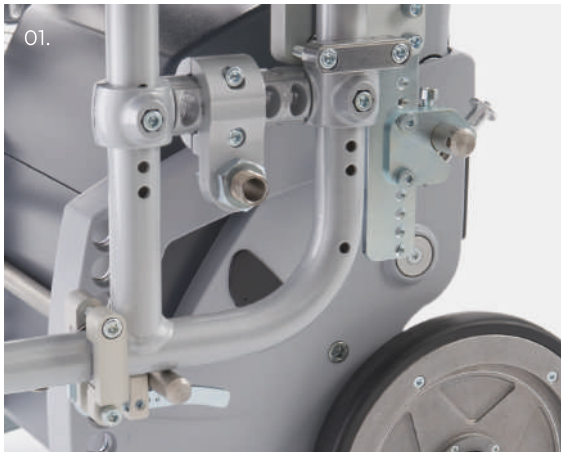

Info zum Standardlieferumfang:
scalamobil und scalacombi werden mit der Griffeinheit inklusive Display, der Steigereinheit mit Sicherheitsbremse und dem Akkupack plus Ladegerät ausgeliefert.



Powered by alber.

Unsere Medizinproduktberater:innen sind in ganz Deutschland flächendeckend vertreten. Vereinbare jetzt deinen Termin für eine kostenlose und unverbindliche scalamobil- oder scalacombi-Probefahrt bei dir zu Hause in deinem gewohnten Umfeld.

Auf unserer Webseite findest du noch viele weitere Infos zu unseren Produkten und Antworten auf all deine Fragen rund um Kosten-erstattung bei deiner Krankenkasse oder bezüglich der Hilfsmittelnummer.

0800 1224567 (gebührenfrei)

Servicezeiten durchgehend von
Mo.–Do. von 8:00–17:00 Uhr, Fr. bis 16:00 Uhr.

www.alber.de



Die via-Familie passt vielleicht auch zu dir?

Schiebe- und Bremshilfen für Begleitpersonen.

Die Modelle der via-Familie kommen dann zum Einsatz, wenn sich eine pflegebedürftige Person nicht mehr selbst oder nur sehr eingeschränkt im Rollstuhl fortbewegen kann und die Begleitperson kraftvolle Unterstützung benötigt, um den Rollstuhl sicher zu schieben bzw. zu steuern.



viamobil®

Kraftvoll bergauf – sicher bergab.

Die komfortable Schiebe- und Bremshilfe für Begleitpersonen.



Mehr erfahren?

Alle Infos zum viamobil findest du auf:
www.alber.de/viamobil



scalamobil – die mobile Hilfe für einfaches und sicheres Treppensteigen.

scalamobil und scalacombi sind CE-konform gemäß der europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) 2017/745 und wurden auf freiwilliger Basis durch den TÜV Süd nach der Produktnorm EN ISO 7176-28 geprüft.

Unser Qualitätsanspruch – deine Sicherheit! Alber ist zertifiziert nach dem aktuellen Qualitätsmanagementstandard ISO 13485 für Medizinprodukte. Die umweltgerechte Herstellung unserer Produkte garantieren wir durch unser Umweltmanagementsystem, zertifiziert nach ISO 14001.

Jetzt das scalamobil kostenlos und unverbindlich testen: scalamobil.alber.de/probefahrt



Alber GmbH

Vor dem Weißen Stein 14
72461 Albstadt-Tailfingen
info@alber.de

Telefon: 0800 1224567 (gebührenfrei)
Mo.–Do. 8:00–17:00 Uhr (durchgehend)
Fr. 8:00–16:00 Uhr (durchgehend)



MADE IN GERMANY ■■■