

SOPUR
Live without limits.



QS 3^x

ERSTKLASSIGE FALTPERFORMANCE.
MAXIMALE FAHRFREUDE.
BESTER PREIS.

QS
SERIES



SOPUR QS3 X

DER EINSTIEG BEI DEN AKTIVEN FALTROLLSTÜHLEN

Der **SOPUR QS3 X** macht die bewährte Performance und das moderne Design der QS-Serie für alle zugänglich.

Dank des leichtgängigen **FreeFold™**-Faltmechanismus lässt sich der Rollstuhl mühelos zusammenfallen, anheben und transportieren. Gleichzeitig sorgt der **leichte Rahmen** für ein komfortables, direktes Fahrgefühl – mit weniger Kraftaufwand im Alltag.

Integrierte Einstellmöglichkeiten, klares Design und moderne Farben schaffen ein Fahrerlebnis, das über den Standard hinausgeht. Der QS3 X verbindet **zeitgemäßes Design** mit konsequenter Alltagstauglichkeit.

Mit einer gezielt zusammengestellten Auswahl an Ausstattungsoptionen **vereinfacht der QS3 X** die Konfiguration, unterstützt kurze Lieferzeiten und ermöglicht Nutzerinnen und Nutzern einen schnellen Zugang zu aktiver Mobilität.



FALTBAR

EINFACH FALTEN – FÜR MEHR FREIHEIT IM ALLTAG

Der QS3 X bringt die bewährte **FreeFold**-Technologie in eine optimierte 2-Arm-Kreuzstrebe- und liefert Faltkomfort auf dem Niveau von Premium-Faltrollstühlen. Mühelos zu bedienen: **Mit einem einzigen Finger zusammengefoldet.**

LEICHTGEWICHT

EINFACH ZU HANDHABEN – IMMER DABEI

Ab nur 9 kg (Swing Away) bzw. 8,3 kg (Fester Vorderrahmen) – so leicht wie ein Handgepäckstück. Einfach anzutreiben, anzuheben, mitzunehmen. Weniger Aufwand im Alltag. Ob Spaziergang, Besuch bei Freunden oder Autofahrt: Der QS3 X ist in Sekunden verstaut und sofort einsatzbereit.



ZWEIARM-KREUZSTREBEN -DESIGN

Cleanes Design trifft auf technische Konsequenz: Die Zweiarmkreuzstrebe reduziert das Gesamtgewicht spürbar und verleiht dem QS3 X ein modernes, unaufdringliches Erscheinungsbild. Das Ergebnis: leichter zu handhaben, kompakter im Alltag, stabil bei jedem Antrieb.

FALTVERRIEGELUNG

Sicher verstaut, wann immer es darauf ankommt: Die optionale Faltverriegelung hält den QS3 X beim Transport und bei der Aufbewahrung zuverlässig in der gefalteten Position – für unkomplizierte Handhabung, wenn er nicht im Einsatz ist.





PERFORMANCE

WENIGER KRAFTAUFWAND. MEHR KONTROLLE.

Für flüssige, effiziente Bewegung entwickelt: Der QS3 X läuft geradeaus, reagiert präzise und fühlt sich steif und stabil an. Sein robuster Rahmen und die optimierte Lenkradausrichtung senken den Kraftaufwand – für eine leichtere, kontrolliertere Fortbewegung über den gesamten Tag.

ALLTAGSTAUGLICH. OHNE KOMPROMISSE.

Aluminium der 6000er-Serie: Höchste Festigkeit, dauerhafte Zuverlässigkeit. Der korrosionsbeständige Rahmen ist für die Anforderungen des täglichen Lebens gemacht – und behält sein cleanes, modernes Erscheinungsbild dauerhaft.

MAXIMALE STABILITÄT IN DER LENKRADANBINDUNG

Weniger Gewicht. Weniger Vibrationen. Weniger Wartung. Die integrierte Lenkradanbindung verbessert die Kraftübertragung und sorgt gleichzeitig für das elegante, moderne Erscheinungsbild des QS3 X.



KONFIGURIERBARKEIT

IHRE BEDÜRFNISSE. IHRE KONFIGURATION.

Fester Vorderrahmen (FF)

Maximaler Halt, optimale Beinposition – den ganzen Tag. Der feste Vorderrahmen (FF) bietet erhöhte Stabilität und Positionierungsunterstützung. Ideal für alle, die ein sicheres, integriertes Fahrgefühl schätzen.

Abschwenkbare Beinstützen (Swing-Away)

Mehr Bewegungsfreiheit beim Transfer: Dank der abschwenkbaren Beinstützen (Swing-Away) lassen sich die Fußstützen einfach zur Seite schwenken. So kommt man näher an Bett, Stuhl oder Fahrzeug heran – und der QS3 X lässt sich kompakter verstauen und unkomplizierter transportieren.





FLEXIBEL FÜR HEUTE. BEREIT FÜR MORGEN.

DESIGNED UM SICH ANZUPASSEN

Der QS3 X passt sich an. Sitzhöhe, Schwerpunkt, Rückenlehnenhöhe, Rückenlehnenwinkel, Sturzhadeinstellung – und zusätzlich eine Sitztiefenanpassung von bis zu 20 mm*. So passt sich der QS3 X Bedürfnissen an und bietet echte Flexibilität – heute und morgen.

Die neue Achsplatte ist leichter, schlanker im Design und bietet volle Verstellbarkeit der hinteren Sitzhöhe sowie Unterstützung mehrerer Sturzpositionen.



*Ab Sitztiefe 400 mm

DESIGN

DAS SICH SO GUT ANFÜHLT WIE ES AUSSIEHT

Selbstbewusstsein beginnt mit dem richtigen Auftritt. Der QS3 X sieht überall gut aus. Weniger klinisch. Mehr Persönlichkeit. Ein Rollstuhl, der zum eigenen Lebensstil passt – und man genau so auftreten kann, wie man möchte.

7 Rahmenfarben zur Wahl. Von zeitlos dezent bis selbstbewusst ausdrucksstark – der QS3 X wird zum persönlichen Statement.



Matt Schwarz



Glanz Schwarz



Solar Orange



Nebel Grau



Mitternachtsblau



Red Pepper



Silber Erz



OPTIONEN IM ÜBERBLICK

DESK SEITENTEIL

Abschwenkbar, abnehmbar, in zwei Größen – für maximale Flexibilität beim Transfer und im Alltag.




SICHERHEITSRÄDER – ABSCHWENKBAR ODER EINSTECKBAR


Sicherheit ohne Kompromisse – flexibel montierbar.



NEUE SEITENTEILE AUS KUNSTSTOFF MIT KLEIDERSCHUTZ

Leicht, stabil, optisch überzeugend: Die neuen Seitenteile aus Kunststoff mit integriertem Kleiderschutz setzen einen neuen Akzent.

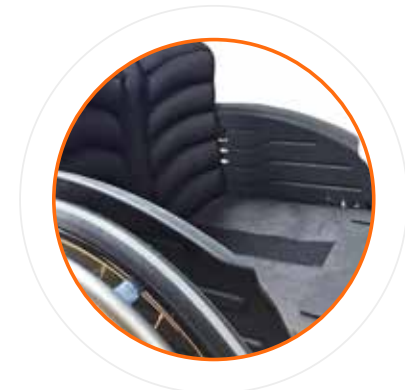

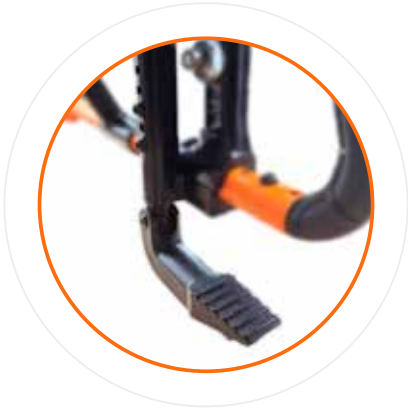

ANKIPPBÜGEL MIT STOCKHALTER-OPTION

Mehr Sicherheit, mehr Komfort: Abschwengbar oder einsteckbarer Ankippbügel – optional mit integriertem Stockhalter.



DESIGNELEMENT ZUM SCHLIESSEN DES HINTERRAHMENS

Ein cleaner Abschluss für ein konsequent modernes Erscheinungsbild.



FUSSBRETT

Geteilt, aus Aluminium, im Winkel stufenlos einstellbar – für optimale Beinpositionierung.



NEUE SITZBESPANNUNG

Mehr Komfort. Mehr Atmungsaktivität. Mehr Halt. Die neue Polsterung kombiniert verbesserte Polsterung mit optimaler Belüftung – für ein angenehmes Fahrgefühl den ganzen Tag.

SCHNELLE LIEFERUNG

BEREIT, WENN SIE ES BRAUCHEN

Mobilität sollte nicht warten müssen. Der QS3 X ist so konzipiert, dass die Konfiguration einfach ist und die Verfügbarkeit zuverlässig – damit weniger Zeit zwischen Versorgung und Auslieferung liegt.



TECHNISCHE DATEN	QS3 X
Max. Nutzergewicht	130 kg
Sitzbreite	360 - 540 mm
Sitztiefe	380 - 500 mm
Vordere Sitzhöhe	400 - 540 mm
Hintere Sitzhöhe	370 - 500 mm
Rückenhöhe	300 - 500 mm
Rückenwinkel	von -5° bis +15°
Gesamtbreite	SB +240/+260/+270 bei 0°, 1,5°, 3° und 24" Antriebsrad (in bestimmten Konfigurationen kann die Gesamtbreite 800 mm überschreiten)
Gesamtlänge	950 mm (FF), 1070 mm (SA)
Gesamthöhe	1080 mm
Max. sichere Steigung (mit arretierten Rädern)	10° (7°)
Rahmenversionen	Swing Away (SA) oder Fester Vorderrahmen (FF)
Rahmenwinkel	70° / 80° (SA); 80° (FF)
Lenkräder	4", 5", 6", 7"
Antriebsräder	22", 24"
Rollstuhlgewicht	ab 11,6 kg (SA); 10,9 kg (FF)
Zerlegtes Gewicht	ab 9 kg (SA); 8,3 kg (FF)
Gewicht des schwersten Teiles	2,3 kg
Abnehmbare Teile	Antriebsräder, Fussrasten
Rahmenfarben	7
Crash getestet	Ja – zugelassen für den Transport im Kraftfahrzeug gemäß ISO 7176-19:2022
Transport ohne Nutzer	Rollstuhl sicher im Fahrzeug befestigen (z. B. Auto oder Flugzeug)
Bestimmungsgemäße Verwendung	Für Personen mit eingeschränkter oder fehlender Gehfähigkeit; Innen- und Außeneinsatz; Betrieb durch Nutzer oder Begleitperson.



Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/HD
Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0
Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222
E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de

Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellformular. Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical.



Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf www.SunriseMedical.de zur Verfügung oder es ist auch im Großdruck erhältlich.



www.SunriseMedical.de

