

Tukan Super Light

- ✓ Transportgewicht unter 4 kg (exklusive Antriebsrädern und Sitzkissen)
- ✓ Integrierter Rahmenschutz (IFP)
- ✓ Offenes Rahmendesign
- ✓ Stabil und besonders leicht
- ✓ Maximales Nutzergewicht: 80 kg

1 7020 ALUMINUM

Der Rollstuhlrahmen wird aus 7020 Aluminum hergestellt. Dabei handelt es sich um die stärkste, gerade noch schweißbare Aluminiumlegierung.

2 INTEGRIERTER RAHMENSCHUTZ (IFP)

Ein gewichtsoptimiertes, integriertes Rahmenschutz-System, das in den Vorderrahmen eingeschweißt ist.

3 OFFENES RAHMENDESIGN



Offenes Rahmendesign für einen modernen Look sowie ergonomisches Handling beim Ein- und Ausladen ins Auto.

4 GEWICHTOPTIMIERTE POLSTERUNG

Die Polsterung wurde im Hinblick auf das Gewicht optimiert, ohne dass bei der Haltbarkeit und Einstellbarkeit Kompromisse gemacht werden mussten. Wir haben Technologien angewandt, die normal bei ultra-leichter Trekking-Ausrüstung verwendet werden.



▲ Tukan Super Light Innovatives Design
kombiniert mit einem superleichten, verstärkten
Rahmen

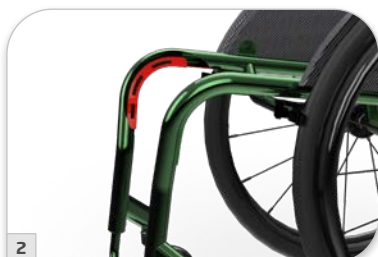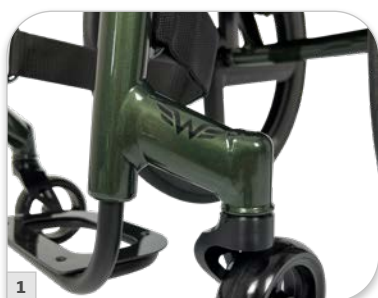

Ultra-Leichtgewicht Rollstuhl

Tukan Super Light Edition mit offenem Rahmendesign: Eine Revolution in Sachen Mobilität und Komfort

Das Design unseres Tukan Super Light-Rollstuhls basiert auf dem Konzept eines offenen Rahmendesigns und bietet nicht nur eine ansprechende Ästhetik, sondern auch ergonomische Vorteile im Hinblick auf die Biomechanik des Sitzens. Das Verladen des Rollstuhls ins Auto, wird durch die Leichtbauweise erleichtert. Dieser innovative Ansatz führt zu einem ultraleichten Rollstuhl mit offenem Rahmen, der bis ins kleinste Detail auf jeden einzelnen Nutzer angepasst wird und gleichzeitig eine lange Haltbarkeit gewährleistet.

Besonderes Augenmerk haben wir auch auf die Polsterung gelegt. Diese wurde im Hinblick auf das Gewicht optimiert, ohne dass bei der Haltbarkeit, Einstellbarkeit oder dem Komfort Kompromisse gemacht werden mussten. Hier haben wir uns von der Welt der ultraleichten Trekkingausrüstung inspirieren lassen und modernste Technologien verwendet, um ein wirklich herausragendes Produkt herzustellen.

Das ultraleichte Design des Tukan Light reduziert die Belastung auf die Schultergelenke und verbessert somit deren Mobilität und allgemeinem Komfort.

Um bei allen unseren Produkten erstklassige Qualität zu gewährleisten, verwenden wir 7020er Aluminium, das gemäß den T6-Spezifikationen wärmebehandelt wird.

Der Super Light Edition-Rollstuhl mit offenem Rahmendesign ist eine bemerkenswerte Innovation, bei der Mobilität, Komfort und Unabhängigkeit im Vordergrund stehen. Seine Leichtbauweise, die fortschrittlichen Materialien sowie die maßgeschneiderten und benutzerfreundlichen Features machen diesen Rollstuhl zum optimalen Weggefährten für NutzerInnen, die sich einen aktiven und erfüllenden Lebensstil wünschen.



TECHNISCHE DATEN		TUKAN SUPER LIGHT
	MAX. NUTZERGEWICHT	80 KG
	TRANSPORTGEWICHT	AB 3,8 KG
	SITZBREITE	34 - 40 CM
	SITZTIEFE	36 - 50 CM
	SITZHÖHE VORNE	36 - 50 CM
	SITZHÖHE HINTEN	36 - 50 CM
	RÜCKENHÖHE	22 - 46 CM
	KINDER & JUGENDLICHE	JA

