



JAY®

LITEPRO

SUPERIOR CLINICAL SEATING – DAMALS WIE HEUTE

Seit seiner Gründung im Jahr 1982 revolutioniert JAY die Rollstuhlsitzkissenversorgung mit einer klaren Mission: hochwertige klinische Sitzlösungen zu entwickeln, die die Haut schützen, die Körperhaltung unterstützen und die Mobilität durch innovative Materialien, wissenschaftliche Erkenntnisse und technologische Entwicklungen verbessern.

Diese Mission treibt uns bis heute an. Besonders aktive Menschen benötigen eine Sitzlösung, die mit ihrem Tempo mithält, mit zuverlässiger Stabilität bei jedem Transfer, jedem Anschub und jeder Herausforderung.

Das JAY LitePro Sitzkissen erfüllt diese Mission mit kompromissloser Leistung in einem ultraleichten, sehr atmungsaktiven und flachen Design. Mit nur 0,9 kg und einer Höhe von 51 mm kombiniert es individuell anpassbaren Hautschutz, aussergewöhnliche Stabilität und effektives Druckmanagement ohne Kompromisse.

Das JAY LitePro wurde entwickelt, um aktive Menschen und Sporttreibende dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu verfolgen und zu erreichen.



Der Einsatz bleibt an Ort und Stelle, um
bei jeder Bewegung für Stabilität zu sorgen.



ULTRALEICHT, ULTRAFLACH – UND FÜR BEWEGUNG GEMACHT

LEICHT UND FLACH

Mit nur 0,9 kg und einer Höhe von 51 mm gehört das JAY LitePro zu den **leichtesten und flachsten** Sitzkissen mit individuell anpassbarer Druckentlastung auf dem Markt. Für einfachere Transfers, mehr Agilität und bessere Performance.

KONTROLLE DES MIKROKLIMAS


Mit einem um 45% besseren Feuchtigkeitstransport als ein herkömmliches Luftkissen **hält das JAY LitePro die Haut trocken und kühl** für stärkere und gesündere Haut.

ANPASSBARE DRUCKENTLASTUNG UND STABILE UNTERSTÜTZUNG

Mit mehr als doppelt so hoher Stabilität wie ein herkömmliches Luftkissen und einem hohen Mass an Druckmanagement bietet das JAY LitePro die **ideale Balance zwischen Druckentlastung und Stabilität**, ganz ohne Kompromisse.

ROBUST UND NUTZERFREUNDLICH

Langlebige Leistung und eine **einfache, wartungsarme Reinigung** machen das JAY LitePro zur idealen Lösung für Menschen, die viel unterwegs sind.

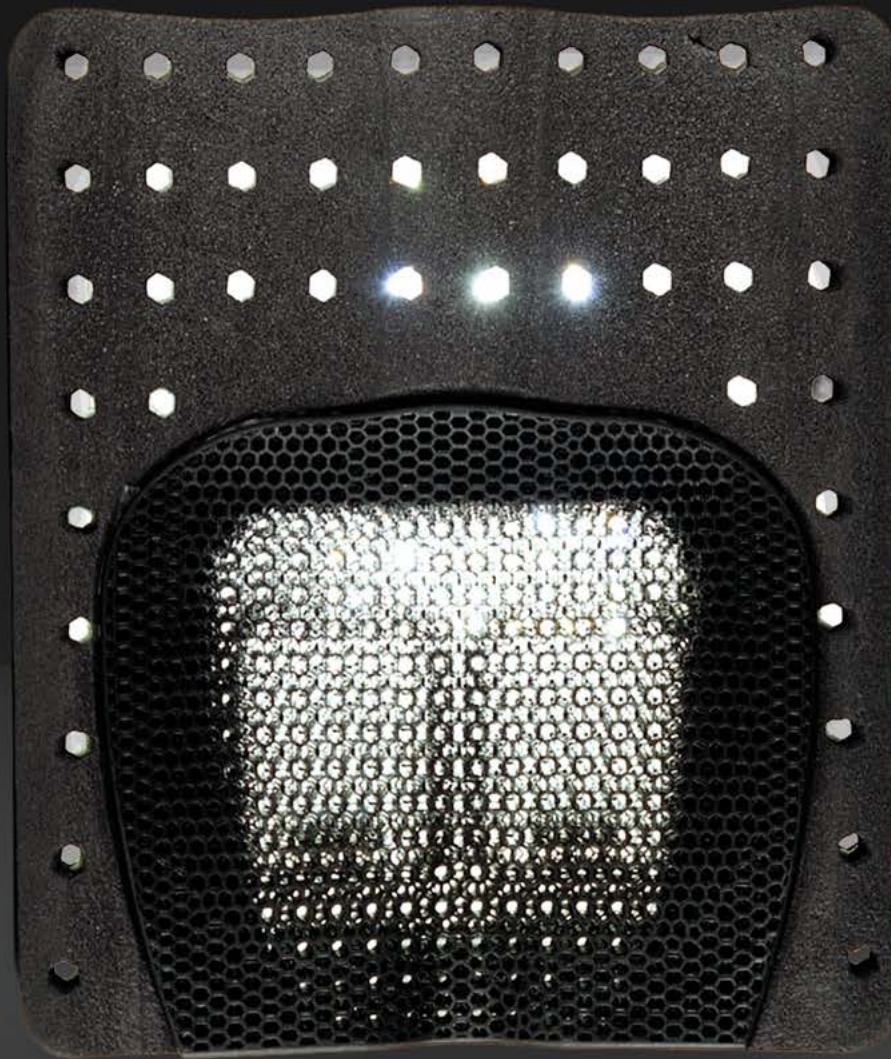

HÄLT DIE HAUT TROCKEN UND KÜHL


360° ATMUNGSAKTIVITÄT

Die atmungsaktive Struktur des Einsatzes in Kombination mit der perforierten Schaumbasis sorgt für eine kontinuierliche Luftzirkulation im gesamten Sitzkissen und hilft, die Temperatur dort zu senken, wo es am wichtigsten ist.

Horizontale und vertikale Luftkanäle in der perforierten Schaumbasis verbessern zusätzlich die Kühlung und unterstützen die Verdunstung von Feuchtigkeit, als Ergänzung zur Luftzirkulation durch den Einsatz.

Die AirExchange-Mesh-Deckschicht fördert zusätzliche Belüftung an der Hautkontaktfläche und hilft, Nutzende kühler und trockener zu halten eine wichtige Voraussetzung für den Schutz der Haut.

Das LitePro bietet mehr als nur Druckentlastung: Mit 45% besserem Feuchtigkeitsabtransport als ein herkömmliches Luftkissen hält es die Haut trocken und kühl und unterstützt so eine stärkere und gesündere Haut.

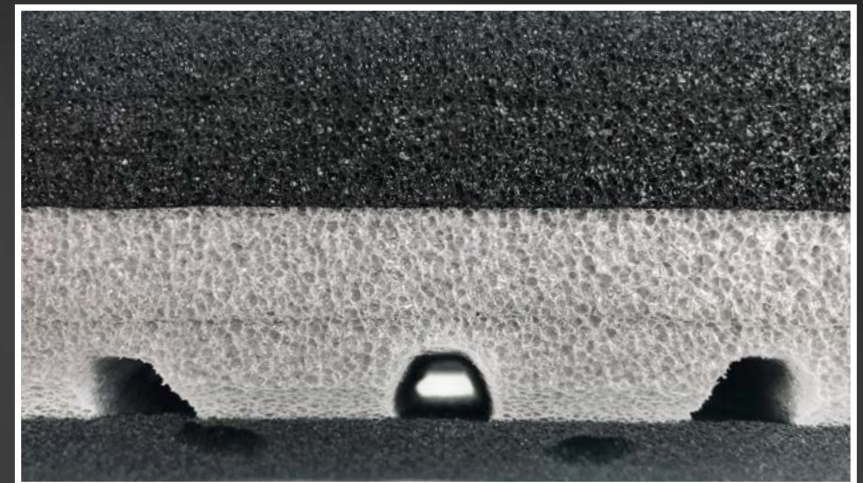

INDIVIDUELL ANPASSBARE DRUCKENTLASTUNG

TIEFES EINSINKEN UND NIEDRIGE SPITZENDRÜCKE

Ein Einsinken von bis zu 40 mm **verteilt den Druck weg von knöchernen Risikobereichen** und unterstützt so eine gesunde und geschützte Haut.

Der Einsatz bleibt zuverlässig an seiner Position und sorgt für konstanten Hautschutz, auch bei häufigen Transfers und aktiver Bewegung im Alltag.

Druckanpassungs-Module ermöglichen **eine individuelle Anpassung der Druckentlastung**, und die Korrektur eines leichten Beckenschiefstandes.


KOMFORT, DER SICH ANPASST

Der Elastomer-Einsatz bewegt sich flexibel in mehrere Richtungen und absorbiert Druck sowie Stöße aus verschiedenen Winkeln. Seine reaktionsfähige Struktur **passt sich den Körperkonturen an**.

Zudem bietet es eine effektive Dämpfung und Stossabsorption, sorgt für eine **gleichmässige Druckverteilung** und vermittelt ein weiches, stützendes Sitzgefühl für langanhaltenden Komfort und Stabilität.



Druckentlastungs-Module – in zwei Härtegraden erhältlich

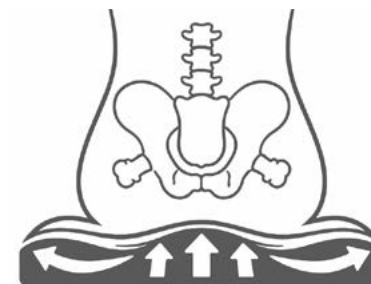

HOHE STABILITÄT

INNOVATIVES MEHRZONEN-DESIGN

Der innovative Einsatz ist in verschiedene Zonen

unterteilt. Jede einzelne Zone geht nahtlos in die nächste über und ist mit einem eigenen Dichteprofil entwickelt, um dort Unterstützung zu bieten, wo der Körper Stabilität benötigt, und Druckentlastung dort zu ermöglichen, wo knöcherne Bereiche geschützt werden müssen.

Die unterschiedlichen Dichtezonen basieren auf anthropometrischen Daten also Messungen von Grösse und Proportionen des menschlichen Körpers um optimale Zonengrössen zu bestimmen.

HERAUSRAGENDE STABILITÄT BEI FLACHEN KISSEN

Das LitePro bietet aussergewöhnliche Stabilität in einem flachen Sitzkissen mehr als doppelt so viel Stabilität wie ein Luftkissen, ohne Kompromisse bei der Druckentlastung.

Konturierte Mehrschicht-Schaumbasis und einsinkender Einsatz kombinieren Haltungsunterstützung, Stabilität und Druckentlastung.

Das Ergebnis: eine stabile Beckenposition für effizienteren Antrieb, bessere Haltung und einfachere Transfers.



Mehrzonen-Design mit unterschiedlichen Dichten



Konturierte Mehrschicht-Schaumbasis



Hoch atmungsaktiv und bis zu 45% weniger Feuchtigkeitsbildung im Vergleich zu anderen Sitzkissentypen, für ein verbessertes Mikroklima und ein geringeres Risiko von Hautschädigungen.



Unser leichtestes Sitzkissen mit weniger als 1 kg, einfach zu handhaben und bequem zu transportieren.



Einfach zu reinigen, wartungsarm und langlebig.

Eines der flachsten Sitzkissen auf dem Markt 51 mm für bessere Nutzbarkeit und Performance.



Durch Einsinken wird der Druck gleichmässig verteilt und das Risiko von Druckbelastungen an knöchernen Bereichen reduziert.



Konturierte Mehrschicht-Schaumbasis für Haltungsunterstützung und Stabilität.



Hohe Stabilität trotz flachem Profil.

*In unabhängigen Labortests, die Temperatur, Feuchtigkeit und Belastung einer Person simulierten, die drei Stunden auf einem Sitzkissen sitzt, zeigte das LitePro an der Kontaktfläche eine um 45% geringere Zunahme der Luftfeuchtigkeit als ein vergleichbares Luftkissen.



TECHNISCHE DATEN

HCPCS CODE	E2622
NUTZERGEWICHT MAX.	150 kg
KISSENBREITE	340–500 mm
KISSENTIEFE	360–500 mm
KISSENHÖHE	51 mm
KISSENGEWICHT	0,90 kg
MATERIAL BEZUG	AirExchange-Aussenbezug für ein verbessertes Mikroklima mit robusten Seitenbändern und PVC-freiem, rutschhemmendem Mesh-Material.

Bitte beachten Sie das Bestellformular, da die Spezifikationen je nach Konfiguration variieren können.

07/2026

Sunrise Medical AG

Erlenauweg 17
3110 Münsingen
031 958 38 38
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch



Sunrise Medical ist um Ihre Sicherheit besorgt. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung für sichere Betriebsanweisungen und Wartungsrichtlinien. Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellblatt. Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical.



Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf www.SunriseMedical.ch zur Verfügung.

