



e-pilot®



Speed up your life.

e-pilot – das ausdauernde Zuggerät
für deinen Rollstuhl.



www.alber.de



Mehr Zug für dein Leben.

Rollstuhlfahren ist oft eine Herausforderung: Bordsteine, Schlaglöcher und unebener Untergrund erschweren das Vorankommen. Das Umsteigen auf das Auto oder öffentliche Verkehrsmittel ist, wenn überhaupt, nur mit großem Aufwand möglich.

Wie wäre es, wenn man den manuellen Rollstuhl bei Bedarf mit nur einem Handgriff in ein sportliches, schnelles Gefährt für Straßen, Geh- und Waldwege verwandeln könnte?

Mit dem e-pilot von Alber wird aus deinem manuellen Rollstuhl in Sekundenschnelle ein Fahrzeug, mit dem du auch längere Strecken und unebenen Untergrund problemlos meisterst. So kannst du im Alltag auch mal auf das Auto oder öffentliche Verkehrsmittel verzichten und bist auf Ausflügen ohne Mühe gleichauf mit deiner Begleitung auf dem Fahrrad.

Mit dem e-pilot erweiterst du ganz entspannt deinen Freiraum – für mehr Freude am Leben.

e-pilot passt zu dir, wenn:

- ✓ du gerne aktiv und draußen unterwegs bist.
- ✓ du gerne auch mal längere Strecken ohne Auto oder öffentliche Verkehrsmittel zurücklegen möchtest.
- ✓ du deinen manuellen Rollstuhl behalten und nur zeitweise Unterstützung möchtest.
- ✓ du bei Hilfsmitteln Wert auf individuelles Design, große Reichweite und gute Performance legst.
- ✓ du im Alltag oder Ausflügen möglichst flexibel sein willst.
- ✓ du dein Leben vielseitig, selbstbestimmt und unabhängig gestalten möchtest.





e-pilot's

FAHRSPASS

Zieht richtig ab.

Der e-pilot verwandelt deinen Rollstuhl in Sekundenschnelle in ein dynamisches Alltagsfahrzeug. Lästige Parkplatzsuche und mühsames Ein- und Aussteigen gehören so der Vergangenheit an. Die stabile Gabel, der im Rahmen integrierte Akku und der hocheffiziente, geräuschlose Radnabenmotor verbinden Fahrspaß mit Design und durchdachter Ergonomie.

- ✓ **Speed:** maximale Geschwindigkeit von bis zu 20 km/h* dank geräuschlosem Elektromotor mit 250 W (konstant) und 650 W (Spitze)
- ✓ **Dynamik:** vier Geschwindigkeitsstufen und Rückwärtsgang
- ✓ **Reichweite:** bis zu 50 km** durch leistungsstarken, entnehmbaren Akkupack im Rahmen (LI-Ionen-Technologie)
- ✓ **Steuerung:** Gasgriff, zwei Scheibenbremse mit zwei Bremshebeln



* In drei Produktvarianten in unterschiedlichen Geschwindigkeiten erhältlich:
6 km/h Standardvariante,
15 km/h nur in Kombination mit TÜV-Abnahme und Sicherheitspaket,
20 km/h nur auf Privatgrundstücken erlaubt.

** nach ISO7176, tatsächliche Reichweite abhängig von Untergrund, Geschwindigkeit, Personengewicht, Temperatur und Topografie.

pole positions.

FLEXIBILITÄT

Zieht überall mit.

Mit dem e-pilot erfährst du ein neues Level an Mobilität und Flexibilität: Ganz ohne Anstrengung mit dem Hund rausgehen, einen Ausflug ins Café unternehmen oder eine ausgiebige Radtour mit Freunden genießen. Der e-pilot eignet sich für unterschiedliche Terrains und kann mit einem Handgriff einfach an- oder abgedockt werden.

- ✓ **Schnell-Dock-Mechanismus:** in wenigen Sekunden an- oder abgedockt. So kannst du den e-pilot auch auf etwas längeren Strecken als praktische Alternative zum Auto nutzen.
- ✓ **Universell:** Passt an eine Vielzahl von Starrrahmen- und Faltrollstühlen mit abnehmbarer Beinstütze.
- ✓ **Oberhand auf jedem Untergrund:** Mit dem großen 16"-Vorderrad überwindest du jeden Bordstein und bleibst immer in der Spur. Mit der optionalen Stollenbereifung kannst du auch auf Waldwegen voll durchstarten.
- ✓ **Mobil ans Ziel:** Lade dein Smartphone mit der USB-Ladebuchse während der Fahrt.



STYLE

Zieht die Blicke auf sich.

Der e-pilot sieht genauso einzigartig aus, wie er sich fährt. Mit seiner sportlichen Optik, dem ansprechenden Rahmen- design mit integriertem, abnehmbarem Akkupack und innen liegender Verkabelung ist der e-pilot ein echter Hingucker. Durch die große Auswahl an Farben kannst du auch in puncto Individualität nochmal einen draufsetzen. Nicht zuletzt gibt es für den e-pilot eine große Bandbreite an Zubehör.

- ✓ **Sportliches Design:** Durch die Verwendung innovativer Hydroformingtechnologie überzeugt der e-pilot mit besonders dynamischem und ergonomischem Rahmendesign.
- ✓ **Große Auswahl:** Wähle aus elf Designfarben und gestalte den e-pilot im Online-Konfigurator ganz nach deinem Geschmack. Weitere Details siehe Seite 13.
- ✓ **Umfangreiches Zubehör:** zur Anpassung an deine individuellen Bedürfnisse, Wünsche oder Einschränkungen. Weitere Details siehe Seite 16.



Gut, besser, am Testen.

Jetzt kostenlos und unverbindlich testen.
Per QR-Code geht's direkt zur Probefahrt.
e-pilot1.alber.de/probefahrt

”

Der e-pilot ist eine Bereicherung für mich, der Aktionsradius wird deutlich erweitert und die Lebensfreude erhöht sich spürbar. Nach meinem sechsständigen Tagesausflug, hatte der e-pilot immer noch eine Restkapazität von über 30 %. Das gibt mir ein sehr beruhigendes Gefühl, dass auch längere Strecken bewältigt werden können.

H.J. Rohe aus Siegburg

In die Stadt fahren, Freunde besuchen oder einkaufen gehen war noch nie so einfach. Der e-pilot ist eine unverzichtbare Ergänzung für mich, die Spontantität und Flexibilität bekommt dadurch einen völlig neuen Stellenwert.

Manfred W. aus Bremen

“





Funktioniert: wie geschmiert.

Aber voll elektrisch & geräuschlos: Die Antriebseinheit des e-pilot verfügt über einen Rahmen aus hydrogeformtem Aluminium mit integriertem, herausnehmbarem Akkupack. Ein Ständer sorgt auch ohne Rollstuhl für stabilen Stand und die patentierte Wegschwenkfunktion erleichtert das Überwinden von Hindernissen.



ANTRIEBSEINHEIT

Geräuschloser Direktantrieb mit 16"-Ballon-Luftbereifung

Innovativer Hydroforming Aluminiumrahmen



Automatik-Ladegerät mit elektronischer Lade- und Abschaltautomatik



Akkupack mit bis zu 50 km* Reichweite, 5 LEDs zur Kapazitätsanzeige und Schloss als Diebstahlsicherung



Ständer mit patentierter Wegschwenkfunktion

LENKER

Display
abnehmbares 2,4"-Farbdisplay mit Anzeige von Akkukapazität, Geschwindigkeit und Tourdaten

Ladebuchse
serienmäßig mit USB-Buchse zum Laden eines Smartphones

Bremse
serienmäßig mit zwei gut dosierbaren hydraulischen Bremshebeln ausgestattet

Gasgriff
für bequemes Fahren wie mit dem Motorrad. (Bedienhilfe für Tetraplegiker optional erhältlich)

Panel links
Aktivierung von Hupe und Licht

Panel rechts
Auswahl der Geschwindigkeitsstufen in vier Schritten und weitere Einstellungen



* nach ISO7176, tatsächliche Reichweite abhängig von Untergrund, Geschwindigkeit, Personengewicht, Temperatur und Topografie.

KOMBINATION MIT DEM ROLLSTUHL

Dock'n'roll.

Nach einmaligem Anbau der Halterung am Rollstuhl ist der e-pilot ruckzuck an- oder abgedockt: In Kombination mit seiner hohen Reichweite von bis zu 50 km* hast du so für viele Strecken eine praktische und umweltfreundliche Alternative zum Auto.

Nur wenige, leichte Teile verbleiben dauerhaft am Rollstuhl. Hier wird lediglich der Adapter eingehängt, an dem der e-pilot angedockt wird.

So einfach geht's:

An- und Abkoppeln in wenigen Sekunden.

1. e-pilot heranziehen
und einrasten



2. Zur Arretierung nach
vorn drücken



Anbringen
der Halterung
am Rollstuhl.



Der e-pilot passt an sehr viele Rollstuhlmodelle, sowohl mit starrem Rahmen als auch mit abnehmbarer Beinstütze.

Wir empfehlen einen Rollstuhl mit langem Radstand.

Technische Daten

Hilfsmittelnummer:	18.99.04.0005
Geschwindigkeit	0,5–20 km/h; bis 6 km/h (Standardversion)/bis 15 km/h*/bis 20 km/h**
Gewicht gesamt	18,5 kg
max. Personengewicht	Max. 100 kg
max. zulässiges Gesamtgewicht	Max. 135 kg (e-pilot, Rollstuhl und Rollstuhlfahrer:in)
Steig- & Bremsfähigkeit	Bis 10 % (bergauf), bis 15 % (bergab)
Reichweite	Bis 50 km (nach ISO 7176, je nach Untergrund, Geschwindigkeit, Personengewicht, Temperatur und Topografie)
Akku	36 V, 13,4 Ah, 482,4 Wh
Akkugewicht	3,0 kg
Ladezeit	ca. 4 h
Maße	900 x 560 x 950 mm (L x B x H)

* Nur mit entsprechender Ausstattung (Sicherheitspaket), Einzelabnahme und Versicherung.

**Nur auf privatem Gelände erlaubt.

MODELLVARIANTEN

Schnell, schneller, e-pilot.



**e-pilot
6 km/h**



Der Basislieferumfang aller Geschwindigkeitsvarianten des e-pilot beinhaltet:

- ✓ Abnehmbares Display
- ✓ Akkupack mit Schloss/Diebstahlsicherung
- ✓ Antriebsrad mit geräuschlosem und hocheffizientem Radnabenmotor
- ✓ Ladegerät
- ✓ Im Rahmen integrierter Ständer

Zuzüglich Halterung und Anbauteile/individuelle Prüfung im Fachhandel.

Weiteres Zubehör findest du auf Seite 17/18.



**e-pilot
15 km/h**



Gemäß StVZO sind für die 15 km/h-Version des e-pilot Rücklicht, Zulassung und Versicherungskennzeichen erforderlich. Dieses entsprechende Sicherheitspaket kann zusätzlich erworben werden.

Gegen Aufpreis übernehmen wir die TÜV-Abnahme und Zulassung.



**e-pilot
20 km/h**



Die Nutzung der 20 km/h-Version des e-pilot ist offiziell nur auf Privatgrundstücken erlaubt und erfolgt auf eigene Verantwortung.



e-pilot auf Rezept

Als anerkanntes Hilfsmittel kann der e-pilot von deiner Krankenkasse bezuschusst werden – oft werden die Gesamtkosten oder ein großer Teil davon übernommen. Das Alber-Team informiert gerne über die Abläufe und unterstützt dich bei den Anträgen.

Hilfsmittelnummer e-pilot

18.99.04.0005



ONLINEKONFIGURATOR

Raffiniert: konfiguriert.

Konfiguriere deinen e-pilot ganz bequem vom Sofa aus – mit dem praktischen Onlinekonfigurator. Du wählst einfach deine Geschwindigkeitsvariante, deine Lieblingsfarbe und dein Wunschzubehör aus und speicherst deine Auswahl ab. Der Sanitätshändler deines Vertrauens kümmert sich auf dieser Basis dann um alles Weitere.

Den Konfigurator findest du auf der Alber-Webseite. Den e-pilot gibt es in elf verschiedenen Farbtönen. Standardmäßig wird er in Weiß seidenmatt ausgeliefert, ist aber auch in vier Hochglanz-Signalfarben und in sechs Metallicfarben matt verfügbar.



⊕ erhältlich in elf verschiedenen Farben



Jetzt konfigurieren:
e-pilot.alber.de

Zubehör

Immer weiter. Immer erweiterbar.

Mach dir deinen e-pilot, wie er am besten zu dir passt. Wähle aus der umfangreichen Liste an Zubehör und passe ihn an deine Bedürfnisse an. Von der Tetrabremse über den Stollenreifen für herausforderndes Terrain bis hin zur praktischen Shopping-Tasche: dein e-pilot, deine Wahl.

01: Handballenauflage Gasgriff für Personen mit eingeschränkter Handfunktion

02: Tetrabremse

03: Abdeckung

04: Andockhilfe zum Andocken mit einer Hand

05: Rückspiegel

06: Halterung (s. Anbau Seite 11)

07: Shopping-Tasche

08: Stollenreifen für mehr Traktion auf unebenem Terrain

09: Vorderlicht Supernova mit 50 % mehr Lichtausbeute im Vergleich zur Standardbeleuchtung

10: Compact-Tasche

11: Zusatzgewichte für mehr Traktion an Steigungen



Eine Übersicht über das komplette Zubehörprogramm findest du auf:
www.alber.de/e-pilot/zubehoer
oder im e-pilot Konfigurator.



01:



04:



07:




10:



02:




03:

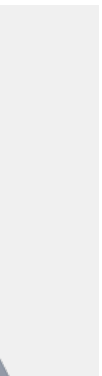


05:




06:



08:

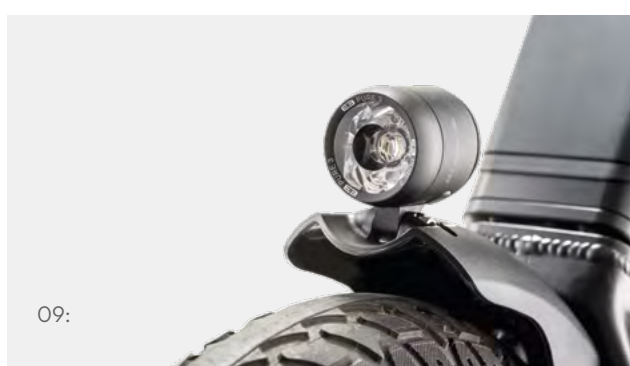

09:



11:



Powered by alber.

Unsere Medizinproduktberater:innen sind in ganz Deutschland flächendeckend vertreten. Vereinbare jetzt deinen Termin für eine kostenlose und unverbindliche e-pilot-Probefahrt bei dir zu Hause in deinem gewohnten Umfeld.

Auf unserer Webseite findest du noch viele weitere Infos zu unseren Produkten und Antworten auf all deine Fragen rund um Kostenerstattung bei deiner Krankenkasse oder bezüglich der Hilfsmittelnnummer.

0800 1224567 (gebührenfrei)

Servicezeiten durchgehend von
Mo.–Do. von 8:00–17:00 Uhr, Fr. bis 16:00 Uhr.

www.alber.de



Passt doch nicht ganz?

Es ist natürlich möglich, dass ein anderes Alber-Produkt einfach besser zu dir und deinen individuellen Anforderungen passt. Wir helfen dir gerne dabei, es zu finden. Soll es ein wenig mehr unterstützen oder noch flexibler sein? Entdecke weitere Mobilitätslösungen von Alber auf www.alber.de.



Mehr Unterstützung:

e-motion®

Der kraftverstärkende Antrieb für deinen Rollstuhl.



Mehr Flexibilität:

smoov®

Der flexible Powerbooster für deinen Rollstuhl.



Du bist hier:

e-pilot®

Das ausdauernde Zuggerät für deinen Rollstuhl.



Jetzt kostenlos testen.

Per QR-Code geht's direkt zu deiner unverbindlichen e-pilot Probefahrt.
e-pilot1.alber.de/probefahrt



e-pilot – das ausdauernde Zuggerät für deinen Rollstuhl.

Der e-pilot ist CE-konform gemäß der europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) 2017/745 und wurde auf freiwilliger Basis durch den TÜV Süd nach der Produktnorm EN 12184 geprüft.

Unser Qualitätsanspruch – deine Sicherheit! Alber ist zertifiziert nach dem aktuellen Qualitätsmanagementstandard ISO 13485 für Medizinprodukte. Die umweltgerechte Herstellung unserer Produkte garantieren wir durch unser Umweltmanagementsystem, zertifiziert nach ISO 14001.

**Jetzt den e-pilot kostenlos und unverbindlich testen:
e-pilot1.alber.de/probefahrt**

42.0001.6.01.06 Stand 09/2024 © Alber GmbH, Albstadt.
Technische Änderungen vorbehalten.



Alber GmbH
Vor dem Weißen Stein 14
72461 Albstadt-Tailfingen
info@alber.de

Telefon: 0800 1224567 (gebührenfrei)
Mo.–Do. 8:00–17:00 Uhr (durchgehend)
Fr. 8:00–16:00 Uhr (durchgehend)

MADE IN GERMANY ■■■