

ATTITUDE PURE FREIHEIT



DIE ATTITUDE FAMILIE

GENIESSE DEINE FREIHEIT WIE NIE ZUVOR MIT DEN NEUEN ANKLEMMBAREN ATTITUDE HANDBIKES.

Egal, ob Du Sport treibst oder Deine Mobilität verbessern möchtest, wir haben das passende ATTITUDE Handbike für Dich. Die manuelle Ausführung ATTITUDE Manual ist ein leichtes und manövrierfähiges Handbike für Dein individuelles Training. Die Hybrid Variante ATTITUDE Hybrid ist das E-Bike für Deinen Rollstuhl, fahrbar mit eigener Muskelkraft oder elektrischer Unterstützung. Das leistungsstarke Zuggerät ATTITUDE Power bietet Dir volle Mobilität mit Elektroantrieb.



ATTITUDE Manual

DAS KRAFTVOLLE TRAININGS-BIKE





ATTITUDE Hybrid

DAS E-BIKE FÜR DEN ROLLSTUHL



ATTITUDE Power

DAS LEISTUNGSSTARKE ZUGGERÄT




IN 6 SEKUNDEN STARTKLAR

Mit dem einfachen Anklemm-Mechanismus wird das ATTITUDE in Sekundenschnelle an einen Rollstuhl mit festem Vorderrahmen an- und abgeklemmt. Ideal, wenn Du es eilig hast.

Der Anklemm-Mechanismus ist unkompliziert, rastet einfach und sicher an der Vorderseite Deines Rollstuhls ein – ohne zusätzliche Teile oder unpraktische Kabel, die Deine Beinfreiheit einschränken.

Nach dem Abklemmen verbleiben nur zwei kleine Pins (je 85 g) von 2 cm Durchmesser an Deinem Rollstuhl.

- 1 Lasse die untere Halterung in die Pins einrasten.
- 2 Drücke das ATTITUDE am Handgriff etwas von Dir weg und schwenke die oberen Klemmen dann nach unten.
- 3 Arretiere die Verbindung, indem Du den roten Hebel ziehst.

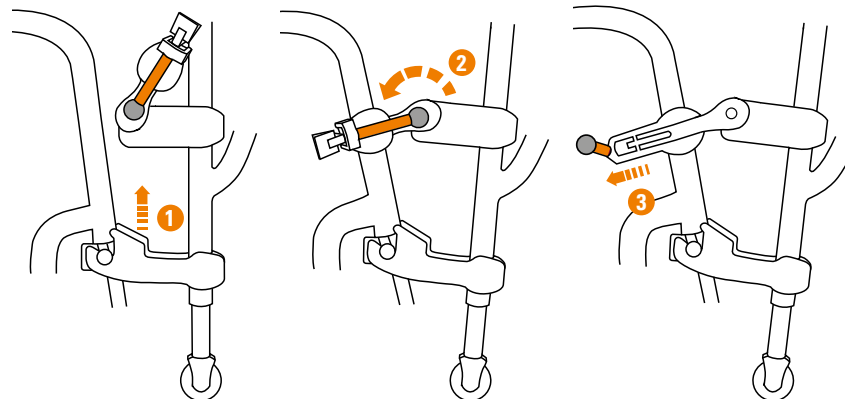


Attitude-Andockvideo
ansehen



OPTIMALE KURBELPOSITION

Die neue Tiefen- und Winkelverstellung des Attitude Manual und Hybrid Handbikes sorgt für eine ergonomische Kurbelposition. Dies ist wichtig für ein energieeffizientes Fahrerlebnis und gibt Ihnen die Freiheit, noch längere Strecken zu fahren.

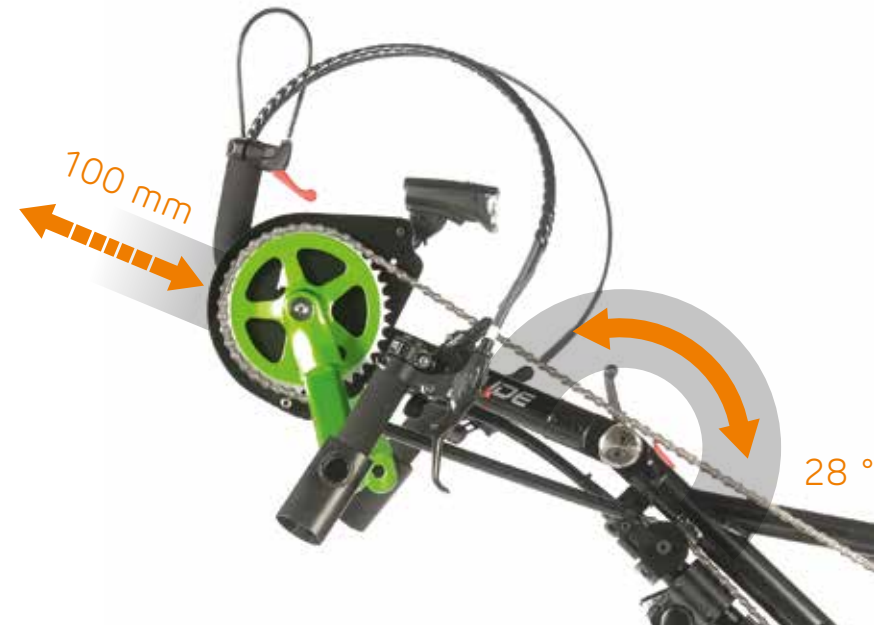

DAS KRAFTVOLLER TRAININGS-BIKE

Das **ATTITUDE Manual** ist ideal, wenn Du Deine Kraft und Ausdauer durch Handbiken aufbauen möchtest. Das 20 Zoll Vorderrad und 30 Gänge sorgen für ein ausgezeichnetes Fahrgefühl in jedem Gelände. Die leistungsstarke Scheibenbremse bietet maximale Sicherheit bei jedem Wetter. Leicht und einfach zu manövrieren – die perfekte Ergänzung für Deinen Aktivrollstuhl.



Tiefen- und winkelverstellbare Kurbelposition.



ATTITUDE

Manual



MANUAL | HYBRID | POWER



// GEARING (1X11)

11 speed gearing is perfect for all terrains. The disc brake allows a smooth speed control.



// TRIGGER SHIFTER

The easy one hand operation trigger shifter allows quick and easy gear shifting.



// RIDE IN STYLE

The crank and the chain protection can be chosen in a different colour.



// PARKBREMSE

Eine einfach zu bedienende Parkbremse mit Einrastfunktion gehört bei allen ATTITUDE Modellen zur Standardausstattung.

DAS E-BIKE FÜR DEN ROLLSTUHL

Das ATTITUDE Hybrid vereint alle gesundheitlichen Vorteile des Handbikens mit der Zuverlässigkeit der elektrischen Unterstützung. Es kann wahlweise manuell oder mit elektrischer Unterstützung genutzt werden. Der Elektromotor trägt zur Reduzierung der Ermüdung bei und kann an Steigungen oder immer dann eingesetzt werden, wenn es mal etwas schneller gehen soll. Jetzt auch mit Tetraplegiker-Steuerungs-Optionen erhältlich.



ATTITUDE

Hybrid

The Attitude Hybrid- standard with a light-weight electrical support system and 8Ah (288Wh) flight friendly battery, all while providing up to 25km of pedal assistance via 5 support levels.

8 Ah battery (14 Ah optional)
250 W motor up to 25 kph
LCD display
Integrated front light design

MANUAL | HYBRID | POWER

// LITHIUM-IONEN-AKKU

8 Ah Lithium-Ionen-Akku (14 Ah optional) für verbesserte Reichweite. Das Display zeigt die verbleibende Akkukapazität an.



// LEISTUNGSSTARKER 250 WATT MOTOR

Der leistungsstarke 250-Watt-Motor ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 25 km/h und ist damit ideal für hügeliges Gelände oder längere Strecken.



// IMMER UNTER KONTROLLE

5 Modi (Eco, City, Tour, Power, Boost) bieten jeweils 5 unterschiedliche Unterstützungsstufen – für eine optimale Unterstützung.



// Ergonomische V-Kurbel

Die ergonomische Griffposition verhindert, dass die Kurbel des Handbikes mit dem Körper in Berührung kommt, vor allem beim Manövrieren um Kurven.



DAS LEISTUNGSSTARKE ZUGGERÄT

Das ATTITUDE Power bietet volle Mobilität durch 100% Elektroantrieb. Es entlastet Deinen Oberkörper und eignet sich ideal für Steigungen oder längere Strecken. Einfach entspannen und die Fahrt genießen!



ATTITUDE

Power



// LEISTUNGSSTARKER 250 WATT MOTOR

Der leistungsstarke 250 Watt Motor ist ideal für hügeliges Gelände oder größere Entfernungen.



// VERSTELLBARER LENKER

Der ergonomische Lenker lässt sich über den Lenkervorbau in der Höhe verstellen. Auf dem Display werden verschiedene Fahroptionen angezeigt.



// LITHIUM-IONEN AKKU

9 Ah oder 13,4 Ah Lithium-Ionen-Akku für eine große Reichweite. Lithium-Ionen-Akkus haben keinen Memory-Effekt.



// INTEGRIERTER FRONT- SCHEINWERFER

Der helle Frontscheinwerfer wird direkt vom Akku betrieben.

TECHNISCHE DATEN

<i>ATTITUDE</i>	<i>Manual</i>	<i>Hybrid</i>	<i>Power</i>
Max. Nutzergewicht	100 kg	100 kg	100 kg
Rahmenbreite vorne (+ 20 mm verstellbar)	260 – 460 mm	260 – 460 mm	260 – 460 mm
Gewicht der zwei Teile am Rollstuhl	170 g	170 g	170 g
Gesamtgewicht des Handbikes	14,5 kg	19,7 kg	15,3 kg
Radgröße	20"	20"	16"
Höchstgeschwindigkeit des Motors	–	25 km/h	6 km/h, 10 km/h, 15 km/h
Motor	–	250 W	250 W
Akku	–	8 Ah (14 Ah optional)	9 Ah & 13,4 Ah
Schalthebel	Daumenschalter	Daumenschalter	–
Gänge	11	10	–
Breite der V-Kurbel	470 mm	470 mm	–
Länge der Kurbel	170 mm	170 mm	–
Breite des Lenkers	–	–	570 mm
Bremse	Scheibenbremse (180 mm)	Scheibenbremse (180 mm)	Scheibenbremse (180 mm)
Park Bremse	ja	ja	ja
Rahmenfarbe	22	22	22

WICHTIGE MITTEILUNG

Aufgrund einer kürzlich erfolgten Aktualisierung entsprechen die angezeigten Farben möglicherweise nicht der aktuellen Verfügbarkeit. Die aktuellste Auswahl finden Sie im neuesten Bestellformular oder erfahren Sie von Ihrem Sunrise Medical Ansprechpartner.



Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/HD
Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0
Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222
E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de

Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellformular. Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical.



Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf www.SunriseMedical.de zur Verfügung oder es ist auch im Großdruck erhältlich.

