



e-fix[®]



Klein. Leicht. Dein.

e-fix – der vielseitige Zusatzantrieb für
deinen individuellen Rollstuhl.



www.alber.de



Kraftvolle Leichtigkeit.

Das selbstständige Fortbewegen deines Rollstuhls erfordert eine ordentliche Portion Kraft. Elektrorollstühle sind aber oftmals keine geeignete Alternative zu deinem bereits auf dich angepassten Rollstuhl, da sie relativ schwer und unhandlich sind. Im Alltag und auf Reisen kann dies zu erheblichen Einschränkungen deiner Unabhängigkeit

führen. Mit dem e-fix wird dein manueller Rollstuhl ganz einfach zum kompakten, vielseitigen und zuverlässigen Elektrorollstuhl, der dich genau in dem Maße unterstützt, wie du es benötigst. So ermöglicht er dir einen selbstständigen und aktiven Alltag – und du kannst dein Leben wieder unbeschwert genießen.

e-fix passt zu dir, wenn:

- ✓ du dir einen leichten elektrischen Antrieb für deinen Rollstuhl wünschst.
- ✓ du Wert auf einen kompakten Aufbau und kraftvolle Unterstützung legst.
- ✓ du nach einem individuell einstellbaren Zusatzantrieb suchst.
- ✓ du weiter deinen gewohnten Rollstuhl nutzen und nicht auf einen gewöhnlichen E-Rollstuhl zurückgreifen willst.
- ✓ du dein Leben weiter aktiv gestalten willst und dabei unabhängig bleiben möchtest.
- ✓ du dir ein absolut hochwertiges und intuitiv bedienbares Hilfsmittel wünschst.
- ✓ du einen zuverlässigen Antrieb für einen Rollstuhl mit kleinem Raddurchmesser suchst.





e-fix auf Rezept.

Als anerkanntes Hilfsmittel kann der e-fix von deiner Krankenkasse bezuschusst werden – oft werden die Gesamtkosten oder ein großer Teil davon übernommen. Das Alber-Team informiert gerne über die Abläufe und unterstützt dich bei den Anträgen.

Hilfsmittelnummer e-fix E35 18.99.05.1018
Hilfsmittelnummer e-fix E36 18.99.05.1019

Kleine Ma

VIELSEITIGKEIT

universell & individuell

Nach einmaliger Montage der e-fix-Komponenten bei deinem Fachhändler, kannst du je nach deinen Zielen oder deiner Tagesform entscheiden, ob du den einen elektrischen Zusatzantrieb nutzen möchtest. Um den e-fix manuell zu bewegen, können die Antriebsräder einfach ausgekuppelt oder mit wenigen Handgriffen getauscht werden.

Der wendige Antrieb eignet sich gleichermaßen für Innenräume wie auch für draußen und passt sich durch intelligente Einstellungsoptionen perfekt an deine individuellen Anforderungen an.

- ✓ **Smart:** programmiere dein individuelles Fahrerprofil
- ✓ **Intuitiv:** leicht bedienbare und ergonomische Steuerung
- ✓ **Erweiterbar:** Upgrades im Mobility Plus Package verfügbar (weitere Infos auf S. 14)
- ✓ **Flexibel:** passt an beinahe jeden Rollstuhl



Be – große Stärken.

MOBILITÄT

klein & kompakt

Wer sich einmal an seinen kompakten und leichten Rollstuhl gewöhnt hat, möchte nur ungern auf die Vorteile verzichten, die sein eigenes Modell bietet: flexibler Transport, geringes Gewicht, einfaches Handling und optimale Ergonomie.

Mit dem e-fix bleibt der Komfort deines Rollstuhls erhalten und durch sein geringes Gesamtgewicht ist er auch weiterhin leicht transportierbar. Bei Bedarf kann der e-fix einfach in seine Einzelteile zerlegt werden und passt so ohne Probleme in jeden Kofferraum oder wird zum idealen Reisebegleiter.

- ✓ **Platzsparend:** Motor, Bremse, Getriebe und Kupplung in Radnabe integriert
- ✓ **Leicht:** alle Komponenten wiegen zusammen unter 20 kg
- ✓ **Praktisch:** Funktionalitäten und Komfort des Rollstuhls bleiben erhalten
- ✓ **Mobil:** in seine Einzelteile zerlegt passt er in jeden Kofferraum



QUALITÄT

ausdauernd & zuverlässig

Bei der Auswahl eines Hilfsmittels spielen die Faktoren Qualität und Vertrauen eine besonders wichtige Rolle. Der e-fix ist Ausdruck der langjährigen Erfahrung von Alber im Bereich Elektromobilität und zugleich auch der hohen Ansprüche des Unternehmens an Design und Technik. Made in Germany steht für höchste Zuverlässigkeit.

Die starken, in zwei Varianten verfügbaren Lithium-Ionen-Akkupacks bieten eine Reichweite* von 16 bzw. 20 km, sodass man sich auch auf längeren Ausflügen keine Sorgen um die Kraft mehr machen muss.

- ✓ **Stark:** Akku unterstützt auf Strecken von bis zu 20 km
- ✓ **Zuverlässig:** zertifizierte Qualität „made in germany“
- ✓ **Schick:** dezentes und sehr hochwertiges Design
- ✓ **Bedienerfreundlich:** übersichtliches Display mit allen wichtigen Infos



* Nach ISO 7176, abhängig von Untergrund, Anwendergewicht, Temperatur und Topografie

VIELSEITIG

Deiner für alles.

Die wichtigste Eigenschaft des kraftvollen e-fix ist seine Vielseitigkeit. Er eignet sich für verschiedenste Anforderungsprofile und Situationen.

Dein Ausflug: entspannt.

Mit dem e-fix kannst du viele neue Ziele entdecken: Auch wenn's hoch hinaus gehen soll, wird der Weg dorthin nicht zum Hindernis. Mit dem Zusatzantrieb bewältigst du Steigungen von bis zu 20 %* und genießt dann oben einfach ganz entspannt die Aussicht.

Wenn du magst, begleitet der e-fix dich auf jeder Reise. Dank seines leichten Gewichts und seiner kompakten Maße ist er super zu transportieren und darf natürlich auch mit ins Flugzeug.

Dein Alltag: flexibel.

Vor allem im täglichen Geschehen zu Hause möchtest du vielleicht nicht auf die gewohnten Eigenschaften deines Rollstuhls verzichten. Abgesehen von der bereits passenden Sitzergonomie fährst du manchmal gerne manuell und erledigst alles in vertrauter Arbeitsweise.

Den e-fix musst du nur dann nutzen, wenn du die Unterstützung auch möchtest. Die Antriebsräder kannst du mit einem Handgriff selbst auskuppeln und das Fahrverhalten deines Rollstuhls bleibt immer unbeeinträchtigt.

* Die Grenzwerte des Rollstuhlherstellers sind zu beachten



Praktisch immer auf Achse: Für den Transport kannst du schnell alles in Einzelteile zerlegen oder den Rollstuhl zusammen mit montiertem e-fix falten. Der Zusatzantrieb ist außerdem IATA-konform und kann problemlos mit ins Flugzeug genommen werden.





ANPASSBAR

Dein Antrieb: e-fix.

Der e-fix ist so konzipiert, dass Antrieb, Steuerung und sogar die Optik perfekt für verschiedene Bedürfnisse und Altersgruppen angepasst werden können. Neben verschiedenen individualisierbaren Funktionen, eigenen Fahrprofilen und weiteren smarten Einstellungsoptionen gibt es für den e-fix eine Vielzahl an speziellem Zubehör (s. Seite 16).

Die Auswahl umfasst dabei sowohl praktische Standard-Ergänzungen wie auch Lösungen für komplexe Anforderungen. Wenn du zum Beispiel eine eingeschränkte Handfunktion hast, können dir verschiedene Aufsätze für den Joystick die Steuerung des e-fix und des Rollstuhls erleichtern.

Selbst bei nahezu gänzlich fehlender Handmotorik kann der e-fix noch genutzt werden: Frage hierzu deinen Fachhändler nach möglichen Sondersteuerungen für dein Bewegungsprofil oder wende dich direkt an die Hersteller, mit denen wir zusammenarbeiten. Humanelektronik GmbH (www.humanelektronik.de) und Wergen Systemtechnik (www.wergen.com) beraten dich ebenfalls gerne zu den e-fix kompatiblen Sondersteuerungen.



Perfekt bis ins Detail: Mithilfe der „Opti-Box“ können zum Beispiel spezielle Sondersteuerungen, ein externer Ein-/Ausschalter für dich/deine Begleitperson oder ein Schalter zur Nutzung eines Stehrollstuhls angebunden werden.

”

Ich bin super zufrieden mit dem e-fix. Er ist sehr wendig, der Akku hält sehr lange und dank des geringen Eigengewichts kann man ihn prima ins Auto verladen. Ich kann endlich wieder am Leben teilhaben.

Paul M. aus der Pfalz

Der e-fix ist mein unauffälliger Elektrorollstuhl, den ich draußen und auch in meiner Wohnung nutzen kann.

Alina B. aus München

“





Jetzt e-fix testen

Vereinbare jetzt online deine kostenlose
und unverbindliche e-fix Probefahrt auf
e-fix.alber.de/probefahrt





Wie für dich gedacht.

Der e-fix besteht aus nur vier Komponenten und ist deshalb ganz einfach anzubringen und mitzunehmen. Möglich macht's das smarte Antriebsrad. In seiner Nabe sind Motor, Bremse, Getriebe und Kupplung kompakt untergebracht. Die Umrüstung des Rollstuhls ist völlig unkompliziert und erfolgt initial durch deinen Fachhändler.

LIEFERUMFANG

Vier gewinnt.

Der e-fix lässt keine Wünsche offen: Dank der leichten, dezenten und durchdachter Einzelkomponenten wird dein bereits angepasster, manueller Rollstuhl zum kraftvollen und exakt auf dich abgestimmten Elektrorollstuhl. Dabei entscheidest du jederzeit flexibel, wann du den E-Antrieb nutzen möchtest oder lieber manuell anschiebst.

Das **Antriebsrad** ist in verschiedenen Größen (22 und 24 Zoll) erhältlich und kann ohne Werkzeug ausgekuppelt, angesteckt und abgenommen werden. (Ab Herbst 2024 ebenfalls in 14 Zoll verfügbar)



Das **Bediengerät** gefällt durch sein modernes, flaches Design und bietet gleichzeitig einfache Bedienbarkeit sowie perfekte Ergonomie.



Der **Akku** überzeugt durch hervorragende Leistungswerte. Dabei ist er so leicht und kompakt, dass er problemlos mit einer Hand entnommen werden kann.



AKKU ANDOCKEN



Einsetzen: Den Akkupack mit der Unterseite zuerst in die Akkuaufnahme einsetzen. Dann drücken, bis der graue Sicherungsverchluss an der Oberseite einrastet.



Entriegeln: Zur Entnahme ganz einfach den grauen Sicherungsverchluss nach oben ziehen und so den Akkupack entriegeln.



Entnehmen: Einfach den Akkupack am grauen Sicherungsverchluss mit der Oberseite zuerst aus der Akkuhalterung nehmen.

STEUERUNG

So geht's leicht von der Hand.

Mit dem ergonomischen und innovativen Bediengerät steuerst du den e-fix intuitiv per Joystick und regelst so auch stufenlos die Geschwindigkeit von 0,5–6 km/h.

Die Steuerung lässt sich individuell programmieren und sich dadurch an deine persönlichen Bedürfnisse anpassen. So kannst du den e-fix auch im Innenbereich mühelos und exakt manövrieren und sogar auf der Stelle wenden. Sicher kommst du auf Anhieb mit der Steuerung zurecht und fühlst dich schnell sicher in der Bedienung.

- ✓ **Leicht verständliche Bedienhinweise im Display**
- ✓ **Intuitive Steuerung per Joystick**
- ✓ **Individuell programmierbare Fahrparameter**
- ✓ **Anpassungen der Anzeigeoptionen, der Fahrmodi und der Einstellungen**
- ✓ **Modernes, superflaches Design**





**Integrierte LED-
Umfeldbeleuch-
tung**

Technische Daten

	e-fix E35	e-fix E36
Hilfsmittelnummer	18.99.05.1018	18.99.05.1019
Geschwindigkeit	0,5–6 km/h	0,5–6 km/h
Gewicht		
gesamt	19,1 kg (7,8 kg je Antriebsrad)	19,1 kg (7,8 kg je Antriebsrad)
max. Personengewicht*	120 kg	160 kg
max. zulässiges Gesamtgewicht**	170 kg	210 kg
Steig- & Bremsfähigkeit*	bis 20 %	bis 15 % (mit max. 160 kg Personengewicht) bis 20 % (mit max. 120 kg Personengewicht)
Akku	37 V, 5,85 Ah, 216 Wh Lithium-Ionen, auslaufsicher und wartungsfrei, Ladezeit ca. 5 Stunden Beide Akkus sind IATA konform (unter 300 Wh) und können im Flugzeug mitgenommen werden	36 V, 7,35 Ah, 265 Wh
Reichweite***	Bis zu 16 km (optional bis 20 km)	Bis zu 18 km
Verfügbare Radgrößen	22 und 24 Zoll 14 Zoll ab Herbst 2024	24 Zoll

* Die Grenzwerte des Rollstuhlherstellers sind zu beachten

** e-fix, Rollstuhl und Rollstuhlfahrer:in

*** Nach ISO 7176, abhängig von Untergrund, Anwendergewicht, Temperatur und Topografie

Tipp & topp.



e-fix E36

Für Personen
bis 160 kg



e-fix E35

In 2 Radgrößen
erhältlich*

e-fix E35

Erhältlich mit 22" und 24" Antriebsrädern*

Die Modellvariante e-fix E35 ist in zwei Radgrößen erhältlich und passt sich so perfekt an die Bedürfnisse und Wünsche kleiner wie auch großer Nutzer:innen an. Der starke Li-Ionen-Akku sorgt dabei für genug Leistung und Reichweite, wodurch sich der E35 sowohl für Ausflüge und kleinere Touren als auch für den alltäglichen Gebrauch bestens eignet.



* Ab Herbst 2024 auch in 14" erhältlich

e-fix E36

Noch stärker und stabiler, erhältlich in 24"

Wenn deine Anforderungen an Leistung und Tragkraft höher sind, ist der e-fix E36 die beste Wahl für dich. Räder, Speichen und Felgen wurden zusätzlich verstärkt und für ein maximales Personengewicht von 160 kg konzipiert. Dank der kräftigeren Akkuvariante hat der E36 genug Power auf der Strecke und lässt dich auch an Steigungen oder Gefällen nicht hängen.

App sofort mobiler.

Die e-fix Mobility App kostenlos zum Download

Zeichne gefahrene Strecken auf, erhalte nützliche Tipps zur Bedienung (e-fix Guide) oder prüfe die verbleibende Reichweite – mit der Mobility App für dein Smartphone hast du alles Wichtige stets im Blick.



Play Store



App Store

Das Mobility Plus Package



Speed

Erhöht die maximale Geschwindigkeit von 6 auf 8 km/h*. So erlebst du ein neues dynamisches Fahrgefühl mit deinem e-fix.

Remote

Ermöglicht die Fernsteuerung deines unbesetzten Rollstuhls über dein Smartphone: mit einem virtuellen Joystick oder durch leichtes Kippen des Smartphones.

Phone

Wenn du einen Anruf, eine SMS oder WhatsApp erhältst, wird dir das auf dem Display deines Bediengeräts angezeigt. **

349,99 € inkl. MwSt.
gesamtes Mobility Plus Package



* Im Geltungsbereich der Straßenverkehrsordnung (StVO) darf die Geschwindigkeit nicht über 6 km/h erhöht werden, 8 km/h Unterstützungsgeschwindigkeit sind nur auf privatem Gelände erlaubt. Bei Verwendung des e-fix mit 8 km/h im Geltungsbereich der StVO ist eine Einzelabnahme nach StVZO und Versicherung gemäß Pflichtversicherungsgesetz notwendig.

** Für iOS nicht verfügbar

Alles für deinen.

Der e-fix überzeugt durch eine umfangreiche Liste an nützlichem Zubehör, das für die verschiedensten möglichen Anforderungen entwickelt wurde. Konfiguriere dir deinen e-fix genau so, wie du ihn brauchst.

01: Kippstützen mit Wegschwenk- und Aufbockfunktion

(Aufgebockt können die Räder noch einfacher abgenommen werden)

02: Intuitive Begleitsteuerung und Zusatzschiebegriff

(Leichter, unterstütztes Schieben für die Begleitperson)

03: Rammschutzbügel

04: Wechselakku

05: Speichenschutz in 22"/24"

06: Bedienhilfe Antriebsrad

07: Externe Ladebuchse

08: Schwenkarm für Bediengerät

09: Sticker Set „Kids“ (Dino, Lama, Sprüche)

10: Joystickaufsätze

10 a: Tetragabel

10 b: Spezial

10 c: Soft

11: Bedienhilfe Geschwindigkeitsvorwahl



01:



04:



07:




09:

Eine Übersicht über das komplette Zubehörprogramm vom e-fix findest du online:

www.alber.de/e-fix/zubehoer




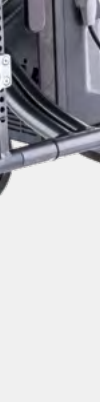

02:




03:



05:



06:



10:



08:



11:



Powered by alber.

Unsere Medizinproduktberater:innen sind in ganz Deutschland flächendeckend vertreten. Vereinbare jetzt deinen Termin für eine kostenlose und unverbindliche e-fix-Probefahrt bei dir zu Hause in deinem gewohnten Umfeld.

Auf unserer Webseite findest du noch viele weitere Infos zu unseren Produkten und Antworten auf all deine Fragen rund um Kostenerstattung bei deiner Krankenkasse oder bezüglich der Hilfsmittelnummer.

0800 1224567 (gebührenfrei)

Servicezeiten durchgehend von
Mo.–Do. von 8:00–17:00 Uhr, Fr. bis 16:00 Uhr.

www.alber.de



Passt doch nicht ganz?

Es ist natürlich möglich, dass ein anderes Alber-Produkt einfach besser zu dir und deinen individuellen Anforderungen passt. Wir helfen dir gerne dabei, es zu finden. Suchst du einen Antrieb, der dich aktiver bleiben lässt und an deinen manuellen Rollstuhl angebaut wird oder wünschst du dir ein Komplettgerät, welches du nur hin und wieder nutzen möchtest?

Entdecke jetzt noch mehr Mobilitätslösungen auf www.alber.de.



Aktiver anschieben:

e-motion®

Der kraftverstärkende Antrieb für deinen Rollstuhl.



Du bist hier:

e-fix®

Der vielseitige Zusatzantrieb für deinen individuellen Rollstuhl.



Komplettgerät:

erivo®

Der komfortable und faltbare Elektrorollstuhl.

Jetzt e-fix testen

Vereinbare jetzt online deine kostenlose und unverbindliche e-fix Probefahrt auf e-fix.alber.de/probefahrt





e-fix – der vielseitige Zusatzantrieb für deinen individuellen Rollstuhl.

Der e-fix ist CE-konform gemäß der europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) 2017/745 und wurde auf freiwilliger Basis durch den TÜV Süd nach der Produktnorm EN 12184 geprüft.

Unser Qualitätsanspruch – deine Sicherheit! Alber ist zertifiziert nach dem aktuellen Qualitätsmanagementstandard ISO 13485 für Medizinprodukte. Die umweltgerechte Herstellung unserer Produkte garantieren wir durch unser Umweltmanagementsystem, zertifiziert nach ISO 14001.

**Jetzt den e-fix kostenlos und unverbindlich testen:
e-fix.alber.de/probefahrt**

41.0005.6.0111 Stand 09/2024 © Alber GmbH, Albstadt.
Technische Änderungen vorbehalten.



Alber GmbH

Vor dem Weißen Stein 14
72461 Albstadt-Tailfingen
info@alber.de

Telefon: 0800 1224567 (gebührenfrei)
Mo.–Do. 8:00–17:00 Uhr (durchgehend)
Fr. 8:00–16:00 Uhr (durchgehend)

MADE IN GERMANY ■ ■ ■